


Mode d'emploi et description technique



Accessoires de l'Essenza® 400

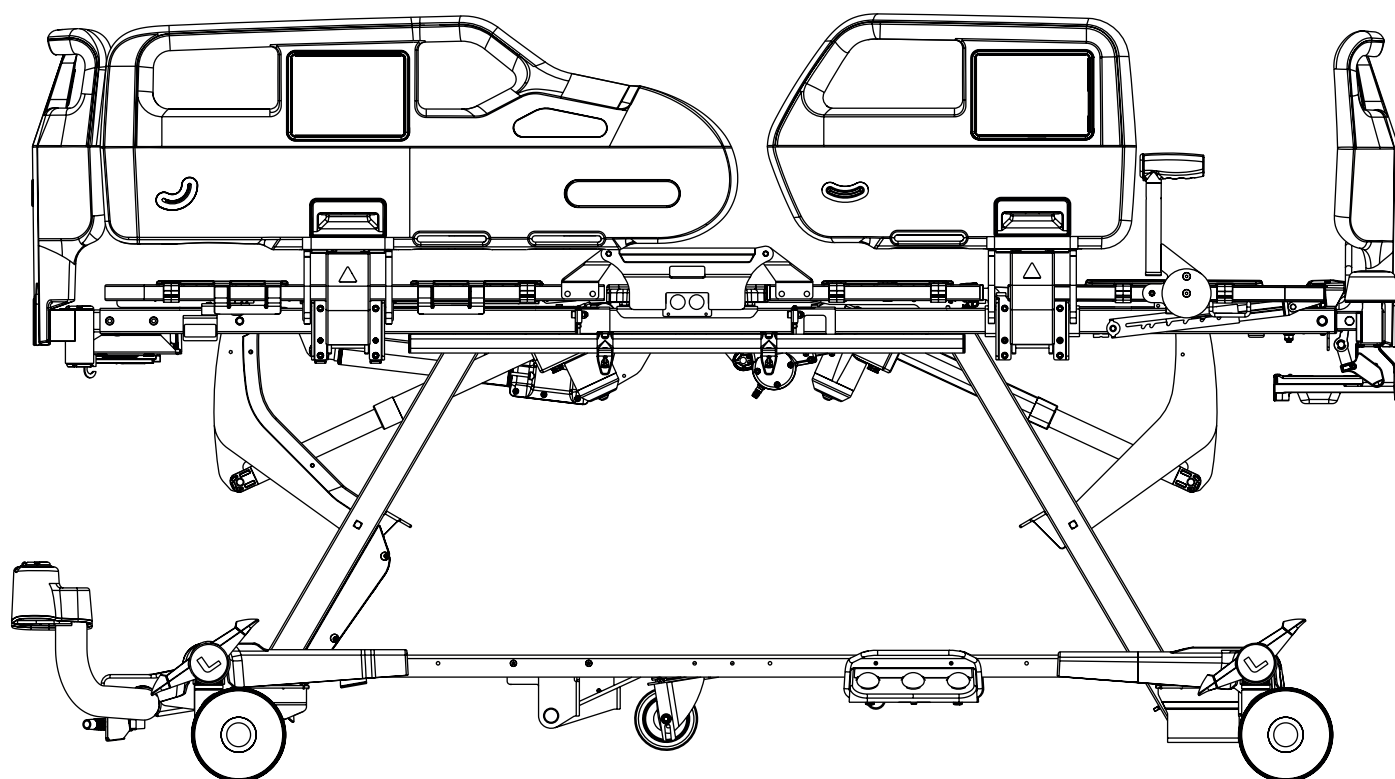

D9U00AEZ4-0103

Version : 00

Date de publication : 2026-09

Fabricant :

L I N E T spol. s.r.o.
Želevčice 5
274 01 Slaný

Tél. : +420 312 576 111
Fax : +420 312 522 668

Adresse e-mail : info@linet.cz
<http://www.linet.com>
Service après-vente : service@linetgroup.com

Accessoires de l'Essenza® 400

Auteur : L I N E T, s.r.o.
Liens connexes : www.linet.com

D9U00AEZ4-0103

Version : 00
Date de publication : 2026-09

Copyright © L I N E T, s.r.o., 2026
Traduction © L I N E T, s.r.o., 2026
Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu du mode d'emploi en fonction des réglementations techniques du produit. C'est pour cette raison que le contenu du mode d'emploi peut présenter des différences par rapport à la fabrication actuelle du produit. Reproduction, y compris d'extraits, uniquement avec l'autorisation préalable de l'éditeur. Sous réserve de modifications dues à des développements techniques. Toutes les données techniques sont des données nominales et sont soumises à des tolérances de construction et de fabrication.

Table des matières

1 Symboles et définitions.....	5
1.1 Mises en garde	5
1.1.1 Types de mises en garde	5
1.1.2 Structure des mises en garde	5
1.2 Instructions.....	5
1.3 Listes.....	5
1.4 Symboles sur l'emballage	6
1.5 Symboles sur les accessoires.....	7
1.6 Abréviations	12
2 Instructions de sécurité pour l'Essenza 400 avec acces-	13
soires	13
3 Conditions d'environnement	17
4 Accessoires	18
4.1 Potence	23
4.2 Potence prolongée	25
4.3 Poignée triangulaire pour potence	27
4.4 Crochet à perfusion pour potence.....	28
4.5 Porte-pompe Infusion Pump Holder (barre d'accessoires)	29
4.6 Porte-bouteille	29
4.7 Tige à perfusion télescopique	30
4.8 Tige à perfusion mobile	32
4.9 Tablette porte-moniteur	33
4.10 Tablette écritoire.....	35
4.11 Plateau	36
4.12 Porte-bouteille à oxygène	38
4.12.1 Porte-bouteille à oxygène vertical	38
4.12.2 Porte-bouteille à oxygène horizontal pour panneau tête	39
en polypropylène	39
4.13 Porte-poche à urine	40
4.14 Porte-urinal	41
4.14.1 Porte-urinal pour barrières polypropylène.....	41
4.15 Porte-bouteille de Redon	42
4.16 Porte-béquilles	43
4.16.1 Porte-béquilles pour panneau pied en plastique....	43
4.17 Porte-serviettes	45
4.17.1 Porte-serviettes pour panneau pied en plastique ..	45
4.18 Porte-nom	46
4.18.1 Porte-nom pour panneau pied en plastique.....	46
4.19 Porte-documents.....	47
4.19.1 Porte-documents pour panneau pied en plastique	47
4.20 Support pour petits accessoires avec deux crochets	48
4.21 Coussin de positionnement.....	48
4.22 Protections pour barrières polypropylène intégrales en	49
deux parties	49
4.23 Cadre de traction Z	51
4.24 Lampe de lecture	53
4.25 Support de cadre de traction D pour panneau pied avec un	55
mécanisme de verrouillage de sécurité	55
4.26 Cadre de traction T73	57
4.27 Cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un	59
mécanisme de verrouillage de sécurité	59
4.28 Porte-pompe Cross Infusion Pump Holder	61
4.29 Support intubation	62
5 Élimination.....	64
5.1 Protection de l'environnement.....	64
5.2 Élimination	64
5.2.1 En Europe	64
5.2.2 Hors Europe	64

Liste des figures

Fig. Étiquette de lavage des protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties.....	11
Fig. La potence insérée dans la douille située du côté tête de sommier	23
Fig. La potence prolongée insérée dans l'adaptateur pour accessoires du côté tête de lit.....	23
Fig. Douilles pour la potence standard (1) à l'extrémité tête du sommier.....	24
Fig. Potence prolongée	25
Fig. Potence standard	25
Fig. Douilles pour la potence prolongée (1) à l'extrémité tête du sommier	26
Fig. Adaptateurs pour accessoires pour la potence prolongée (2) dans le châssis bas du lit	26
Fig. Poignée triangulaire 4ROTGERSG700-2	27
Fig. Poignée triangulaire extensible 4ROTGNR100GR-2	27
Fig. Crochet à perfusion.....	28
Fig. Porte-bouteille	29
Fig. Porte-pompe Infusion Pump Holder côté tête du lit.....	29
Fig. Tige à perfusion dans la douille du côté tête du sommier	31
Fig. Tige à perfusion en forme de S (4MA45MNA0003)	31
Fig. Tige à perfusion avec réceptacle pour canules (4PKV26107200)	31
Fig. Tige à perfusion mobile avec réceptacle pour canules (4ZZ426100)	32
Fig. Tablette porte-moniteur installée sur les butoirs d'angle du côté pied du lit.....	33
Fig. Manipulation avec levier de commande de la tablette porte-moniteur (1)	34
Fig. Description de la tablette porte-moniteur	34
Fig. Tablette écriteiro	35
Fig. Panneau de tablette écriteiro	35
Fig. Plateau sur le panneau pied	36
Fig. Montage d'un conteneur en plastique dans la structure en fil métallique du plateau.....	37
Fig. Conteneur en plastique en position de non-fonctionnement (1 - levier de déverrouillage du conteneur en plastique)	37
Fig. Deux porte-bouteilles à oxygène verticaux sur le plateau de tête en polypropylène.....	38
Fig. Porte-bouteille à oxygène horizontal sur le panneau tête en polypropylène	39
Fig. Porte-poche à urine suspendu au crochet sur le rail d'accessoires	40
Fig. Porte-urinal suspendu à la fenêtre de droite dans la barrière de pieds en polypropylène	41
Fig. Porte-bouteille de Redon sur le rail d'accessoires sous le relève-buste du lit avec des barrières polypropylène	42
Fig. Porte-béquilles 1102070000000	43
Fig. Mise en place de la béquille sur le porte-béquilles 1102070000000	44
Fig. Porte-béquilles 1102070000000 sur le panneau pied en plastique	44
Fig. Porte-serviettes sur le panneau pied en plastique.....	45
Fig. Porte-nom sur le panneau pied en plastique.....	46
Fig. Porte-documents sur le panneau pied en plastique	47
Fig. Support pour petits accessoires avec deux crochets	48
Fig. Support pour petits accessoires avec deux crochets sur le panneau pied en plastique avec un mécanisme de verrouillage de sécurité	48
Fig. Coussin de positionnement	48
Fig. Mise en place des protections prévues à cet effet sur les barrières polypropylène intégrales en deux parties	49
Fig. Positions des protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties	50
Fig. Positions du cadre de traction Z (1) s'il s'agit d'un lit avec butoirs d'angle avec douilles accessoires	51
Fig. Cadre de traction Z.....	52
Fig. Lampe de lecture	53
Fig. Adaptateurs pour accessoires pour la lampe de lecture (1) dans le châssis bas du lit	54
Fig. Douilles pour lampe de lecture (2) à l'extrémité tête du sommier	54
Fig. Positions du support du cadre de traction D pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité (1) sur le lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires.....	55
Fig. Mise en place du cadre de traction D sur son support pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité.....	56
Fig. Positions pour le cadre de traction T73 (1) sur le lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires	57
Fig. Cadre de traction T73.....	58
Fig. Positions pour le cadre de traction partiel MP pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité (1) sur le lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires.....	59
Fig. Cadre de traction partiel MP pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité	60
Fig. Douilles pour le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder (1).....	61
Fig. Porte-pompe Cross Infusion Pump Holder	61
Fig. Relève-buste standard avec supports compatibles pour support intubation.....	62
Fig. Support intubation 4MAS25012800	62
Fig. Relève-buste pouvant passer aux rayons X avec supports compatibles pour support intubation	63

1 Symboles et définitions

1.1 Mises en garde

1.1.1 Types de mises en garde

Les mises en garde sont différenciées selon le type de danger et repérées par les mentions suivantes :

- ▶ **AVERTISSEMENT** met en garde contre les risques de dommages matériels.
- ▶ **ATTENTION** met en garde contre le risque de blessure physique.
- ▶ **DANGER** met en garde contre le risque de blessure mortelle.

1.1.2 Structure des mises en garde



DANGER !
Tension électrique dangereuse !
 ▶ Mesures pour éviter le risque.



ATTENTION !
Type et source de risque !
 ▶ Mesures pour éviter le risque, le cas échéant.



AVERTISSEMENT !
Type et source de risque !
 ▶ Mesures pour éviter le risque, le cas échéant.

1.2 Instructions

Structure des instructions :



- ▶ Étape à effectuer.
- Résultats, si nécessaire.

1.3 Listes


Structure des listes à puces :



- Liste niveau 1
 - Liste niveau 2
 - Liste niveau 3


1.4 Symboles sur l'emballage

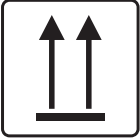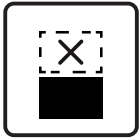	FRAGILE, À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION
	CE CÔTÉ EN HAUT
	GARDER AU SEC (SENSIBLE À L'HUMIDITÉ)
	SYMBOLE DE RECYCLAGE DU PAPIER
	NE PAS UTILISER DE DIABLE ICI
	NE PAS EMPILER PENDANT LE STOCKAGE
	COLIS À L'ÉTRANGER : LIMITE D'EMPILAGE EN NOMBRE (4 COLIS POUR LE STOCKAGE)
	COLIS À L'ÉTRANGER : LIMITE D'EMPILAGE EN NOMBRE (2 COLIS POUR LE TRANSPORT)
	LIRE LE MODE D'EMPLOI
	NE PAS POLLUER L'ENVIRONNEMENT

1.5 Symboles sur les accessoires

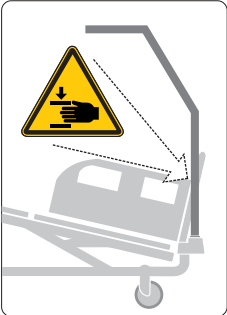	CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ
	ATTENTION DANGER D'ÉCRASEMENT DES MAINS
	TABLETTE PORTE-MONITEUR : LA CHARGE MAXIMALE DE LA TABLETTE PORTE-MONITEUR EST DE 15 KG, PLACER LE MONITEUR DE CE CÔTÉ DE LA TABLETTE
	TABLETTE PORTE-MONITEUR : LA CHARGE MAXIMALE DE LA TABLETTE PORTE-MONITEUR EST DE 15 KG, NE PAS PLACER LE MONITEUR SUR CE CÔTÉ DE LA TABLETTE
	MARQUAGE CE (PRODUIT NORMALEMENT HARMONISÉ POUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN)
	FABRICANT
	DATE DE FABRICATION
	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (TYPE DE PRODUIT SELON LA CONFIGURATION)
	POTENCE : RISQUE DE COINCEMENT DE LA MAIN ENTRE LA POTENCE ET LE LIT LORS DU POSITIONNEMENT EN DÉCLIVE AVEC LA POTENCE DANS L'ADAPTATEUR POUR ACCESSOIRES DU CHÂSSIS BAS

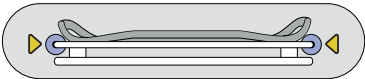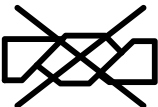	NUMÉRO DE SÉRIE
	DISPOSITIF MÉDICAL (CONFORME À LA RÉGLEMENTATION SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX)
	NUMÉRO DE LOT
	TABLETTE PORTE-MONITEUR : INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN PLACE CORRECTE DE LA TABLETTE PORTE-MONITEUR
	LIRE LE MODE D'EMPLOI
	NE PAS REPASSER
	NE PAS UTILISER DE NETTOYANT CONTENANT DU PHÉNOL
	NE PAS TORDRE
	INSPECTER RÉGULIÈREMENT L'INTÉRIEUR DE LA HOUSSE POUR VÉRIFIER QU'ELLE N'EST PAS CONTAMINÉE
	LAVAGE EN MACHINE À 71 °C AVEC UN DÉTERGENT

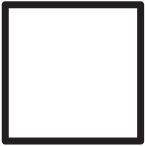	SÉCHAGE AU SÈCHE-LINGE À BASSE TEMPÉRATURE (MAX. 60 °C)
	NETTOYAGE CHIMIQUE PROFESSIONNEL (PROCÉDURE MODÉRÉE)
	RINCER AVEC DE L'EAU CHAUDE ET UN DÉTERGENT NEUTRE (LA TEMPÉRATURE INITIALE DE L'EAU CHAUDE NE DOIT PAS DÉPASSER 50 °C)
	DÉSINFECTER À L'AIDE D'UNE SOLUTION NE CONTENANT PAS PLUS DE 1 000 PPM DE CHLORE
	RINCER À L'EAU CHAUDE
	SÉCHAGE NATUREL
	NE PAS BLANCHIR
	LE MATELAS EST CONFORME À LA NORME BS7177 : 2008 POUR UN RISQUE MOYEN
	COUSSIN DE POSITIONNEMENT : TEMPÉRATURE MAXIMALE DE LAVAGE 40 °C

	CONSULTER LE MODE D'EMPLOI OU LE MODE D'EMPLOI ÉLECTRONIQUE
	DISTRIBUTEUR
	POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT
	SIGNE D'AVERTISSEMENT
	SIGNE DE DANGER GÉNÉRAL
	POIDS DES ACCESSOIRES
	PARTIES APPLIQUÉES DE TYPE B
	MARQUAGE EAC (CONFORMITÉ EURASIENNE)
	MARQUAGE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AU ROYAUME-UNI (UKCA) (PRODUIT NORMALISÉ POUR LA ZONE ÉCONOMIQUE DE LA GRANDE-BRETAGNE)
	REPRÉSENTANT AUTORISÉ EN GRANDE-BRETAGNE

CH REP	REPRÉSENTANT AUTORISÉ EN SUISSE
	MISE À LA TERRE

BS 7175

MEDIUM HAZARD

1

+

2

NaClO

1,000 ppm

max

3

4

D7001340D

Fig. Étiquette de lavage des protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties

1.6 Abréviations

CA (~)	Courant alternatif
ALT	Thérapie de latéralisation automatique
CE	Conformité européenne
CPR	Réanimation cardio-pulmonaire
dB	Unité d'intensité sonore
CC (---)	Courant continu
CUC	Numéro de configuration
CEM	Compatibilité électromagnétique
TEC	Transistor à effet de champ
HF	Haute fréquence
HPL	Stratifié haute pression
USI	Unité de soins intensifs
INT.	Cycle d'utilisation
IP	Protection contre les infiltrations
IV	Intraveineuse
LCD	Écran à cristaux liquides
LED	Diodes électroluminescentes
ME	Dispositif électro-médical
ON	Activation
OFF	Désactivation
ppm	Parties par million, un millionième (1 000 ppm = 0,1 %)
REF	Numéro de référence (type de produit selon la configuration)
SCU	Compresseur (matelas intégré)
SN	Numéro de série
SWL	Charge de fonctionnement en sécurité
UDI	Identification unique du dispositif (pour les dispositifs médicaux)
USB	Bus série universel
WEEE	Déchets d'équipements électriques et électroniques

2 Instructions de sécurité pour l'Essenza 400 avec accessoires



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- Le lit Essenza 400 doit rester dans sa position la plus basse lorsque le patient n'est pas surveillé afin de réduire le risque de blessures dues à des chutes !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- Les barrières du lit Essenza 400 doivent être dans la position relevée afin de réduire le risque que le patient glisse ou roule accidentellement hors du matelas !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- La fonction de latéralisation du lit Essenza 400 avec latéralisation est une fonction de positionnement prévue uniquement pour le personnel médical formé. Avant d'utiliser la fonction de latéralisation, y compris le réglage de l'angle d'inclinaison, le personnel doit évaluer l'état du patient. Cette évaluation doit prendre en compte tous les risques résultant de l'état physique et mental du patient, notamment le risque de chute et le risque de perte de la stabilité du lit.



ATTENTION !

S'assurer qu'aucun bouton servant d'élément de commande n'est appuyé accidentellement par des personnes, par les accessoires du lit, par le matelas ou par d'autres objets !

- Pour éviter l'activation involontaire de pièces mobiles lors de toute utilisation du lit, vérifier systématiquement qu'aucun des boutons des éléments de commande du lit n'est enfoncé !
- Toujours s'assurer qu'aucun clavier de panneau de commande n'est couvert ou pressé par un objet et qu'il n'y a aucune charge exercée sur le clavier !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- Une évaluation experte par le personnel est indispensable pour examiner tous les cas individuels de contre-indications !



ATTENTION !

Risque de coincement ou d'écrasement en raison de la constitution corporelle du patient disproportionnée par rapport à la taille du sommier !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- Certains positionnements du lit ne sont pas adaptés à des diagnostics/conditions médicales spécifiques. La position de Fowler ne convient pas aux patients avec des lésions de la moelle épinière ! La position décline ne convient pas aux patients souffrant d'hypertension intracrânienne !



ATTENTION !

Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi !



ATTENTION !

Ce dispositif médical n'est pas prévu pour être utilisé dans un milieu enrichi en oxygène !



ATTENTION !

Ce dispositif médical n'est pas prévu pour être utilisé avec des substances inflammables !



ATTENTION !

Ce dispositif médical n'est pas un dispositif électro-médical portable !



ATTENTION !

Le patient est autorisé à utiliser les éléments de commande sélectionnés uniquement si le personnel hospitalier a évalué que son état physique et psychique le lui permettait et uniquement si le personnel hospitalier a formé le patient conformément au mode d'emploi !



ATTENTION !

Une prise multiple supplémentaire ou une rallonge ne doit pas être connectée au système électrique médical du lit Essenza 400.



ATTENTION !

Une manipulation inappropriée du câble d'alimentation du lit Essenza 400, telle que des gestes ayant pour conséquence sa pliure, son cisaillement ou d'autres dommages mécaniques, est dangereuse !



ATTENTION !

Lors des examens ou des traitements spécifiques, il y a un risque important d'interférences réciproques causées par le lit Essenza 400 (dispositif électro-médical).



ATTENTION !

Pour éviter tout risque d'électrocution, cet équipement ne doit être connecté qu'à un réseau d'alimentation avec mise à la terre.



ATTENTION !

Des barrières et un matelas incompatibles peuvent causer un risque de coincement !



ATTENTION !

Des matelas incompatibles peuvent créer des dangers !



ATTENTION !

Ce lit est prévu pour un adulte.

► Voir le chapitre Utilisation prévue.



ATTENTION !

S'il est nécessaire de passer les câbles d'autres équipements dans le lit Essenza 400, veiller à ne pas les coincer entre les éléments du lit Essenza 400 !



ATTENTION !

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
Ne pas modifier cet équipement sans l'autorisation du fabricant.



ATTENTION !

Si ce lit médicalisé Essenza 400 (dispositif électro-médical) est modifié, une inspection et des tests appropriés doivent être effectués afin de garantir son fonctionnement en sécurité.



ATTENTION !

Seule une personne autorisée et formée utilisant un outil approprié est autorisée à changer les fusibles, les accumulateurs, les unités de commande et les sources d'alimentation !



ATTENTION !

Veiller à ce que le cycle d'utilisation (2 min ON/18 min OFF) ne soit pas dépassé pendant le positionnement du lit !



ATTENTION !

Aucune partie du dispositif électro-médical Essenza 400 ne doit être réparée ou entretenue lorsque le lit est occupé par le patient !



ATTENTION !

Le patient est autorisé à utiliser certains éléments de commande du dispositif électro-médical, à condition qu'aucune opération d'entretien ou de maintenance de ce dispositif ne soit effectuée !



ATTENTION !

Éviter les collisions entre les accessoires situés au-dessus du panneau tête ou du panneau pied du lit et les objets situés au-dessus du lit (par exemple, le cadre de la porte) !



ATTENTION !

Seuls les accessoires destinés au lavage en machine peuvent être lavés dans le tunnel de lavage automatique compatible !

Instructions supplémentaires pour une utilisation correcte :

- ▶ Suivre attentivement le mode d'emploi.
- ▶ Utiliser le lit uniquement s'il est en parfait état de fonctionnement.
- ▶ Si nécessaire, vérifier les fonctions du lit quotidiennement ou à chaque changement d'équipe.
- ▶ S'assurer que tout utilisateur a lu et compris entièrement ce manuel avant d'utiliser le produit.
- ▶ Utiliser le lit uniquement avec l'alimentation secteur appropriée.
- ▶ Veiller à ce que le lit soit utilisé uniquement par le personnel qualifié et formé conformément au mode d'emploi.
- ▶ S'assurer que le lit est utilisé par le personnel qualifié et formé à l'utilisation du lit conformément au mode d'emploi par le fabricant ou par une personne agréée par le fabricant, éventuellement par un représentant autorisé ou par une personne agréée par le représentant autorisé.
- ▶ S'assurer que le patient (si son état de santé le permet) a été instruit sur le fonctionnement du lit et sur toutes les consignes de sécurité applicables.
- ▶ Contacter immédiatement le service après-vente du fabricant pour faire remplacer les pièces endommagées par les pièces de rechange d'origine.
- ▶ Déplacer le lit uniquement sur un sol plat et régulier, au revêtement dur.
- ▶ Remplacer immédiatement toute pièce endommagée par des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Veiller à ce que la maintenance et l'installation soient effectuées exclusivement par le personnel qualifié qui a été formé par le fabricant.
- ▶ Avant d'appliquer une charge élevée ou une surcharge inévitable (CPR), placer le sommier dans sa position la plus basse.
- ▶ Veiller à ce qu'un seul patient adulte soit allongé sur le lit à tout moment.
- ▶ Prendre garde à ne pas se blesser ou à ne pas se coincer les doigts lors de l'utilisation de pièces mobiles.
- ▶ En cas d'utilisation d'une potence ou d'une tige à perfusion, veiller à déplacer ou ajuster le lit avec précaution afin d'éviter tout endommagement.
- ▶ Actionner le frein des roues lorsque le lit est occupé.
- ▶ Maintenir le sommier dans sa position la plus basse lorsque le patient n'est pas surveillé par le personnel de santé afin de minimiser le risque de chute du patient.
- ▶ Veiller à ce que les barrières soient manipulées uniquement par le personnel de santé.
- ▶ Ne jamais utiliser le lit dans des endroits où il existe un danger d'explosion.
- ▶ Activer ou désactiver les fonctions des éléments de commande en fonction de l'état physique et mental du patient. Ensuite, s'assurer que la fonction de verrouillage a été utilisée correctement.
- ▶ Veiller à ce que les parties mobiles du lit ne soient pas bloquées.
- ▶ Ne jamais manipuler la fiche secteur avec des mains mouillées.
- ▶ Débrancher le produit du secteur uniquement en tirant sur la fiche secteur.
- ▶ Tenir toujours la fiche et non le câble d'alimentation lors du retrait de la fiche secteur.
- ▶ Positionner le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit ni bouclé ni plié. Protéger le câble contre l'usure mécanique.
- ▶ Une manipulation incorrecte du câble d'alimentation peut entraîner un danger de choc électrique, d'autres blessures graves ou des dommages au système de matelas intégré.
- ▶ Veiller à ce que le cycle d'utilisation du moteur défini par le fabricant ne soit pas dépassé.
- ▶ Pour changer les fusibles ou les câbles, contacter un centre de service autorisé par le fabricant.
- ▶ Pour éviter les défaillances, utiliser exclusivement les accessoires et matelas d'origine tels que définis par le fabricant.
- ▶ Veiller à ce que la charge de fonctionnement en sécurité définie par le fabricant ne soit pas dépassée.
- ▶ Si l'état du patient peut entraîner un risque de coincement, laisser le sommier en position plate lorsque le patient n'est pas surveillé.
- ▶ Régler la hauteur du lit lors du transport du lit de manière à faciliter le franchissement d'éventuels obstacles.
- ▶ Ne pas dépasser la charge maximale de 80 kg pour la rallonge du sommier.
- ▶ Ne rien suspendre aux câbles.
- ▶ Ne pas modifier le lit et ses composants sans accord du fabricant.
- ▶ Ne pas dépasser le poids maximal autorisé pour le patient (voir les spécifications mécaniques).
- ▶ Ne pas utiliser le lit dans le cas où ses pièces ont été retirées, sauf si ces pièces sont conçues pour être retirées.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou tout écrasement, procéder avec grande précaution lors de l'utilisation de toute pièce mobile du lit.
- ▶ Ne jamais utiliser le système de remplacement du matelas compatible avec le lit Essenza 400 à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- ▶ Il est nécessaire de choisir un emplacement approprié pour placer les accessoires du lit et d'autres objets afin d'éviter l'activation involontaire de boutons ou d'éléments de commande qui pourraient entraîner le changement de positionnement du lit.
- ▶ Ne jamais placer d'accessoires ou la télécommande sur les barrières où se trouvent les claviers.
- ▶ Après chaque situation d'urgence, vérifier systématiquement si l'un des éléments de commande n'est pas involontairement appuyé par les accessoires du lit ou par le matelas.
- ▶ Pour éviter l'activation involontaire de pièces mobiles pendant toute utilisation du lit, vérifier systématiquement qu'aucun des éléments de commande du lit n'est appuyé par des personnes, le matelas ou d'autres objets.
- ▶ Lors du réglage de la latéralisation dans le cas du lit Essenza 400 avec latéralisation, s'assurer que ce procédé ne présente aucun risque de chute ou de blessure du patient, ni d'arrachement des cathéters ou des tubes trachéaux.

3 Conditions d'environnement



ATTENTION !
Risque d'endommager le produit en cas de conditions d'environnement incorrectes !
► Ne pas utiliser le lit Essenza 400 avec les accessoires compatibles dans des conditions d'environnement autres que celles spécifiées dans le chapitre Conditions d'environnement !



AVERTISSEMENT !
Risque d'endommager le produit si son emballage est exposé à des conditions d'environnement autres que celles spécifiées dans le chapitre Conditions d'environnement !

Paramètre	Valeur
Conditions d'utilisation	
Température ambiante	10 °C - 40 °C
Humidité relative	30 % - 75 %
Pression atmosphérique	795 - 1 060 hPa
Conditions de stockage et de transport	
Température ambiante	-20 °C - 50 °C
Humidité relative	20 % - 90 %
Pression atmosphérique	795 - 1 060 hPa

4 Accessoires



ATTENTION !

L'utilisation d'accessoires non compatibles présente un risque de blessure !

- Utiliser exclusivement les accessoires d'origine du fabricant.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à l'utilisation d'accessoires non approuvés.



ATTENTION !

L'utilisation d'accessoires endommagés présente un risque de blessure !

- Utiliser uniquement des accessoires en parfait état.



ATTENTION !

Risque de blessure ou de dommages matériels en cas de mauvaise utilisation !

- Les accessoires compatibles fabriqués par différents fabricants ont leurs propres instructions d'utilisation. Il est nécessaire de lire le mode d'emploi d'un accessoire compatible, ainsi que le mode d'emploi du produit LINET compatible pour respecter notamment les paramètres techniques, les mises en garde, les instructions de nettoyage et d'entretien des produits LINET et de leurs accessoires compatibles !



ATTENTION !

Risque de blessure ou de dommages matériels lors du réglage du lit !

- S'assurer qu'aucun accessoire installé ne risque d'entrer en collision avec les pièces mobiles du lit.
- Des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter toute collision des accessoires avec les parties du lit et d'autres accessoires lors du positionnement du lit.
- Des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter toute collision des accessoires installés sur le lit et des objets se trouvant à proximité du lit.



ATTENTION !

Le patient est autorisé à utiliser certains accessoires uniquement si le personnel hospitalier a évalué que son état physique et psychique le lui permettait et uniquement si le personnel hospitalier a formé le patient conformément au mode d'emploi !

Accessoires compatibles avec le lit Essenza 400

Accessoires compatibles avec le lit Essenza 400	Fabricants et numéros d'identification	Compatibilité
Potence	LINET : 11011410A0000, 11011410B0000, 1101141000000	toutes les variantes de lit
Potence prolongée	LINET : 11011460A0000, 11011460B0000, 1101146000000	lit avec adaptateur pour accessoires
Poignée triangulaire pour potence	Rolko Kohlgruber : 4ROTGERSG700-2, 4ROTGNR100GR-2	toutes les variantes de lit
Crochet à perfusion pour potence	MARO - Mader: 4MAPL00N1001, LINET : 16010700A0000, 16010700B0000, wissner-bosserhoff : WDE5006220000	toutes les variantes de lit
Porte-pompe Infusion Pump Holder (barre d'accessoires)	LINET : 1102520000000	toutes les variantes de lit
Porte-bouteille	DRÁTĚNÝ PROGRAM : 4DR426101	toutes les variantes de lit
Tige à perfusion télescopique (D34)	Provita Medical : 4PV340290000, 4PV17744500L, 4PV17587200L, 4PV322717000, 4PV297475000	toutes les variantes de lit
Tige à perfusion télescopique (D18)	Provita Medical : 4PKV26107200	toutes les variantes de lit
Tige à perfusion télescopique en forme de S	Provita Medical : 4PV17604800L, 4PV50-0742-0000, MARO - Mader: 4MA45MNA0003	toutes les variantes de lit
Tige à perfusion mobile	Provita Medical : 4ZZ426100	toutes les variantes de lit
Tablette porte-moniteur	LINET : 11026500B0000	lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires
Tablette écriteire	LINET : 11023240B0000	lit à panneau tête et panneau pied en plastique
Plateau pour panneau tête et panneau pied en plastique	LINET : 11026000B0000	lit à panneau tête et panneau pied en plastique
Porte-bouteille à oxygène vertical	MARO - Mader : 4MAR250141, 4MAR250140	lit à panneau tête et panneau pied en polypropylène
Porte-bouteille à oxygène horizontal pour panneau tête en polypropylène	MARO - Mader : 4MAS0001653	lit à panneau tête et panneau pied en polypropylène
Porte-poche à urine	LINET : 11023700B0000	toutes les variantes de lit
Porte-urinal pour barrières polypropylène	LINET : 11027900B0000	lit à barrières polypropylène
Porte-bouteille de Redon	LINET : 11008200B0000, 11008200A0000	toutes les variantes de lit
Porte-béquilles pour panneau pied en plastique	LINET : 1102070000000, 1102080000000	lit à barrières polypropylène, lit à panneau tête et panneau pied en plastique
Porte-serviettes pour panneau pied en plastique	LINET : 11025002B0000	lit à panneau tête et panneau pied en plastique
Porte-nom pour panneau pied en plastique	Grafiteam : 4GT006000000	lit à panneau tête et panneau pied en plastique
Porte-documents pour panneau pied en plastique	LINET : 11023900A0000	lit à barrières polypropylène, lit à panneau tête et panneau pied en plastique
Support pour petits accessoires avec deux crochets	LINET : 1102490000000	lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires
Coussin de positionnement	PERCEPT-FUN : 4SET17500001	toutes les variantes de lit
Protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties	LINET : 4PPCHRPEZ400P	lit avec barrières polypropylène intégrales en deux parties
Cadre de traction Z	MARO - Mader : 4MAEXZ000000	lit avec butoirs d'angle avec douilles accessoires, lit avec butoirs sans douilles accessoires et avec deux adaptateurs pour cadre de traction Z

Accessoires compatibles avec le lit Essenza 400	Fabricants et numéros d'identification	Compatibilité
Lampe de lecture	Provita Medical : 4PV383435X00	toutes les variantes de lit
Support de cadre de traction D pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité	LINET : 1103470000000	lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires
Cadre de traction T73	Kinetec SAS : 4KI4655006152	lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires
Cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité	Kinetec SAS : 4KI4655006178	lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires
Porte-pompe Cross Infusion Pump Holder	LINET : 1102480000000	toutes les variantes de lit
Support intubation	MARO - Mader : 4MAS25012800	lit équipé d'un support de support intubation
Jeu de sacs de poids pour adultes (6,5 kg)	ROUSEK: 4RKZVSD006	MARO - Mader cadre de traction
Jeu de sacs de poids pour enfants (5,75 kg)	ROUSEK: 4RKZVSD001	MARO - Mader cadre de traction
Jeu de poids (5 kg)	MARO - Mader: 4MAEX2500580	MARO - Mader cadre de traction
Kit de suspension de bras	Kinetec SAS : 4KI4655003124	Cadre de traction Kinetec
Kit de traction cervicale	Kinetec SAS : 4KI4655002548	Cadre de traction Kinetec
Kit de suspension lombaire	Kinetec SAS : 4KI4655002530	Cadre de traction Kinetec
Kit de traction Boppe	Kinetec SAS : 4KI4655002556	Cadre de traction Kinetec

Spécifications des accessoires compatibles pour le lit Essenza 400



AVERTISSEMENT !

Risque de dommages matériels en cas de nettoyage ou une désinfection incorrects !

► Vérifier si les produits de nettoyage et les désinfectants utilisés sont compatibles avec les matériaux dont l'accessoire est constitué ! Pour des informations plus détaillées, consulter les tableaux suivants.

Accessoires compatibles avec le lit Essenza 400	Matériaux (surfaces des accessoires mentionnées à des fins de nettoyage et de désinfection)	Poids des accessoires	SWL
Potence 11011410A0000	Acier laqué	5,76 kg	75 kg
Potence 11011410B0000	Acier laqué	5,76 kg	75 kg
Potence 1101141000000	Acier chromé	5,76 kg	75 kg
Potence prolongée 11011460A0000	Acier laqué	6,1 kg	75 kg
Potence prolongée 11011460B0000	Acier laqué	6,1 kg	75 kg
Potence prolongée 1101146000000	Acier chromé	6,1 kg	75 kg
Poignée triangulaire pour potence 4ROTGERSG700-2		0,19 kg	75 kg
Poignée triangulaire pour potence 4ROTGNR100GR-2		0,37 kg	75 kg
Crochet à perfusion pour potence 4MAPL00N1001	Acier inoxydable	0,15 kg	9 kg
Crochet à perfusion pour potence 16010700A0000	Acier laqué	0,15 kg	9 kg (3 kg par crochet)
Crochet à perfusion pour potence 16010700B0000	Acier laqué	0,15 kg	9 kg (3 kg par crochet)
Crochet à perfusion pour potence WDE5006220000	Acier laqué	0,41 kg	20 kg (5 kg par crochet)
Porte-pompe Infusion Pump Holder (barre d'accessoires)	Acier chromé	1,7 kg	3 kg
Porte-bouteille 4DR426101	Acier inoxydable	0,08 kg	2 kg
Tige à perfusion télescopique (D34) 4PV340290000	Acier chromé	0,78 kg	15 kg (2 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique (D34) 4PV17744500L	Acier chromé	1,58 kg	15 kg (2 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique (D34) 4PV17587200L	Acier chromé	1,57 kg	8 kg (2 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique (D34) 4PV322717000	Acier chromé	1,51 kg	15 kg (2 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique (D34) 4PV297475000	Acier chromé	1,63 kg	10 kg (5 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique (D18) 4PKV26107200	Acier chromé	1,54 kg	8 kg (2 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique en forme de S 4PV17604800L	Acier chromé	1,45 kg	4 kg (2 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique en forme de S 4PV50-0742-0000	Acier inoxydable	1,37 kg	4 kg (5 kg par crochet)
Tige à perfusion télescopique en forme de S 4MA45MNA0003	Acier inoxydable	2,3 kg	20 kg (5 kg par crochet)
Tige à perfusion mobile 4ZZ426100		4 kg	
Tablette porte-moniteur 11026500B0000	Acier laqué + HPL	8,84 kg	15 kg
Tablette écriteire 11023240B0000	Acier laqué + acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	3 kg	10 kg
Plateau pour panneau tête et panneau pied en plastique 11026000B0000	Acier laqué + acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	2 kg	10 kg
Porte-bouteille à oxygène vertical 4MAR250141		1,68 kg	15 kg
Porte-bouteille à oxygène vertical 4MAR250140		1,84 kg	15 kg
Porte-bouteille à oxygène horizontal pour panneau tête en polypropylène 4MAS0001653		1,39 kg	15 kg

Accessoires compatibles avec le lit Essenza 400	Matériaux (surfaces des accessoires mentionnées à des fins de nettoyage et de désinfection)	Poids des accessoires	SWL
Porte-poche à urine 11023700B0000	Acier laqué	0,1 kg	5 kg
Porte-urinal pour barrières polypropylène 11027900B0000	Acier laqué	0,42 kg	5 kg
Porte-bouteille de Redon 11008200B0000	Acier laqué	0,47 kg	5 kg
Porte-bouteille de Redon 11008200A0000	Acier laqué	0,47 kg	5 kg
Porte-béquilles pour panneau pied en plastique 1102070000000	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	0,2 kg	3 kg
Porte-béquilles pour panneau pied en plastique 1102080000000	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	0,2 kg	3 kg
Porte-serviettes pour panneau pied en plastique 11025002B0000	Acier galvanisé + acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	0,84 kg	3 kg
Porte-nom pour panneau pied en plastique 4GT006000000		0,04 kg	
Porte-documents pour panneau pied en plastique 11023900A0000	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	0,26 kg	
Support pour petits accessoires avec deux crochets 1102490000000	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)		3 kg
Coussin de positionnement 4SET17500001	Housse lavable	1,47 kg	
Protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties 4PPCHRPEZ400P	Voir les instructions de nettoyage sur l'étiquette de lavage !	1,6 kg (ensemble)	
Cadre de traction Z 4MAEXZ000000	Acier inoxydable + Polyamide (PA) + Laiton + Duralumin	35 kg	75 kg
Lampe de lecture 4PV383435X00	Consulter le mode d'emploi de ce produit !	1,2 kg	
Support de cadre de traction D pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité 1103470000000	Acier chromé + Polyamide (PA) + Polyéthylène (PE)	6 kg	20 kg
Cadre de traction T73 4KI4655006152	Consulter le mode d'emploi de ce produit !	24 kg	75 kg
Cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité 4KI4655006178	Consulter le mode d'emploi de ce produit !	4,5 kg	20 kg
Porte-pompe à perfusion en croix 1102480000000	Acier chromé + Acier inoxydable + Plastique	1,11 kg	3 kg
Support intubation 4MAS25012800	Acier inoxydable + Polyamide (PA) + Acier chromé + Duralumin	1,59 kg	0,6 kg
Jeu de sacs de poids pour adultes (6,5 kg) 4RKZVSD006		6 kg	
Jeu de sacs de poids pour enfants (5,75 kg) 4RKZVSD001		5,75 kg	
Jeu de poids (5 kg) 4MAEX2500580		5 kg	
Kit de suspension de bras 4KI4655003124		24 kg	
Kit de traction cervicale 4KI4655002548		7 kg	
Kit de suspension lombaire 4KI4655002530		7 kg	
Kit de traction Boppe 4KI4655002556		16 kg	

4.1 Potence



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ S'assurer que la potence est correctement insérée dans l'une des douilles pour potence situées dans les coins intérieurs du sommier du côté tête de lit !
- ▶ Vérifier que la potence est fixée au-dessus du sommier afin d'éviter tout risque de basculement du lit !

La potence est destinée à soutenir le patient qui l'utilise pour s'asseoir ou se lever seul ou avec l'assistance d'un soignant.

La potence standard n'est pas compatible avec l'Essenza 400 doté de l'adaptateur pour accessoires.

La potence doit être insérée dans une douille du côté tête de sommier.

La charge maximale de la potence est de 75 kg.

Pour garantir une utilisation de la potence en toute sécurité :

- ▶ Ne jamais dépasser la charge maximale de 75 kg.
- ▶ Ne jamais utiliser la potence pour des exercices de rééducation exigeants.
- ▶ Pour empêcher que le lit ne bascule, s'assurer que la potence ne surplombe pas à l'extérieur du lit.

Pour installer la potence :

- ▶ Insérer la potence dans une douille située du côté tête de sommier.
- ▶ S'assurer que la potence est installée en toute sécurité au-dessus du sommier.
- ▶ S'assurer que la goupille de sécurité de la potence est bien verrouillée dans la douille compatible.
- ▶ Attacher la poignée triangulaire avec une sangle réglable à la potence.

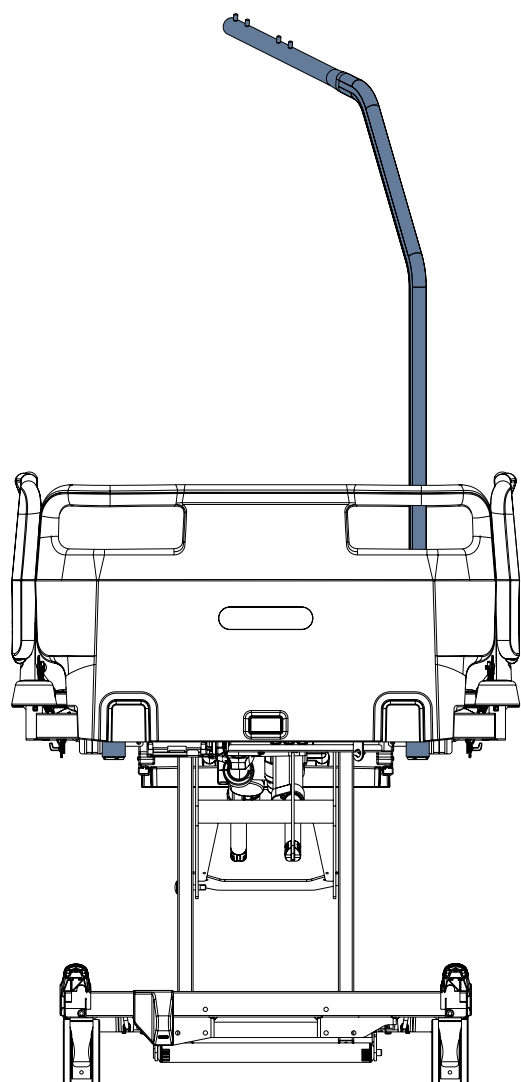


Fig. La potence insérée dans la douille située du côté tête de sommier

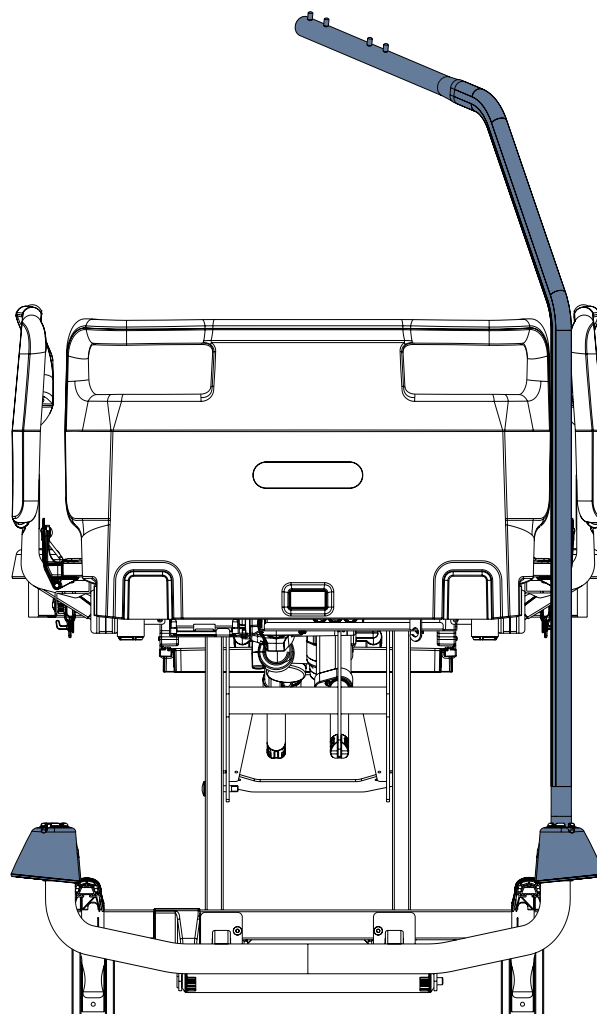


Fig. La potence prolongée insérée dans l'adaptateur pour accessoires du côté tête de lit

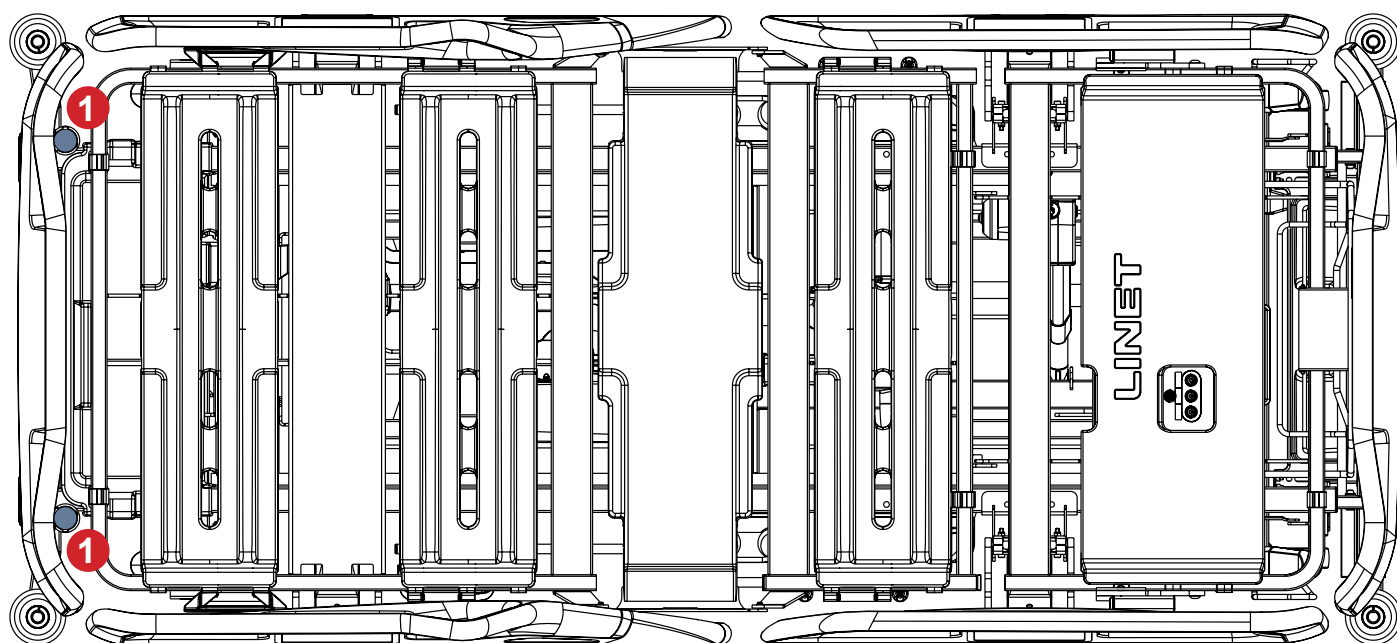


Fig. Douilles pour la potence standard (1) à l'extrémité tête du sommier

4.2 Potence prolongée



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ S'assurer que la potence prolongée est correctement insérée dans l'une des douilles pour la potence situées dans les coins intérieurs du sommier du côté tête du lit ou dans une douille dans l'adaptateur d'accessoires du côté tête du lit !
- ▶ Vérifier que la potence prolongée est fixée au-dessus du sommier afin d'éviter tout risque de basculement du lit !

La potence prolongée est destinée à soutenir le patient qui l'utilise pour s'asseoir ou se lever seul ou avec l'assistance d'un soignant. La potence prolongée est compatible avec l'Essenza 400 doté d'un adaptateur pour accessoires. La potence prolongée doit être insérée dans une douille du côté tête du sommier ou dans une douille sur l'adaptateur d'accessoires du côté tête du lit. La charge maximale de la potence prolongée est de 75 kg.

Pour garantir une utilisation de la potence prolongée en toute sécurité :

- ▶ Ne jamais dépasser la charge maximale de 75 kg.
- ▶ Éviter toute collision entre la potence prolongée et le panneau tête pendant le réglage du relève-buste ou de la position décline.
- ▶ Ne jamais utiliser la potence prolongée pour des exercices de rééducation exigeants.
- ▶ Pour empêcher que le lit ne bascule, s'assurer que la potence prolongée ne surplombe pas à l'extérieur du lit.

Pour installer la potence prolongée :

- ▶ Insérer la potence prolongée dans une douille située du côté tête du sommier.
- ▶ S'assurer que la potence prolongée est installée en toute sécurité au-dessus du sommier.
- ▶ S'assurer que la goupille de sécurité de la potence prolongée est bien verrouillée dans la douille compatible.
- ▶ Attacher la poignée triangulaire avec une sangle réglable à la potence prolongée.

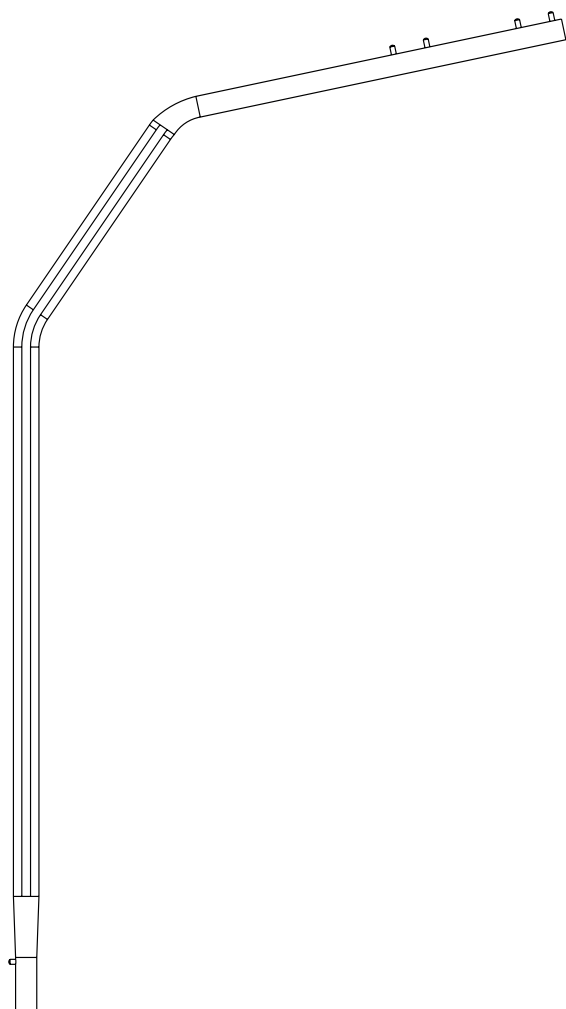


Fig. Potence prolongée

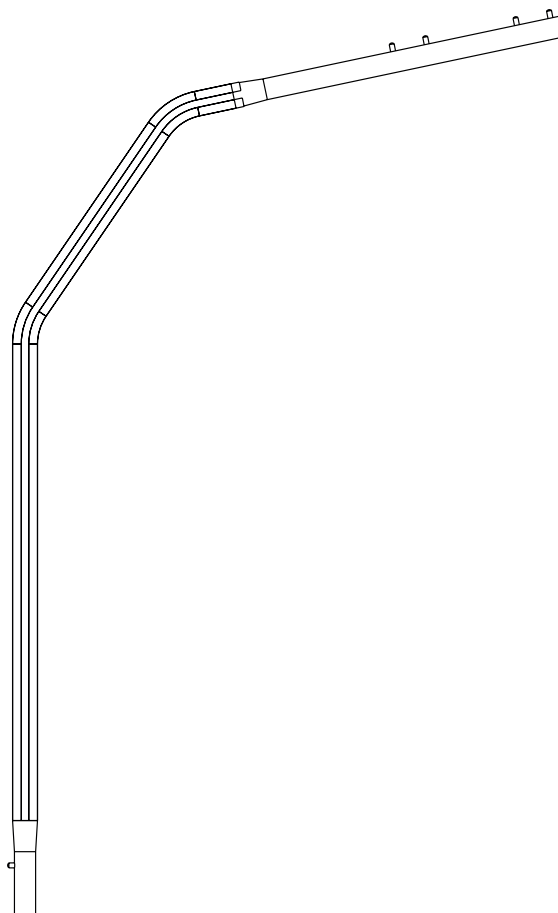


Fig. Potence standard

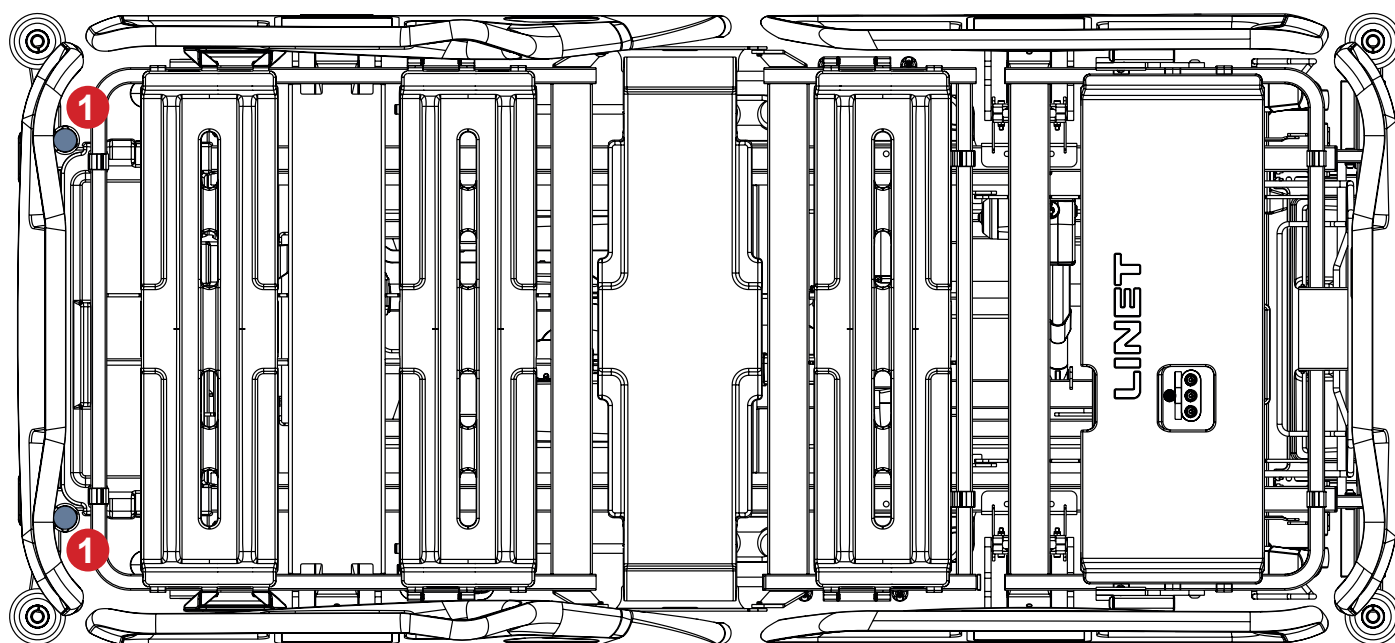


Fig. Douilles pour la potence prolongée (1) à l'extrémité tête du sommier

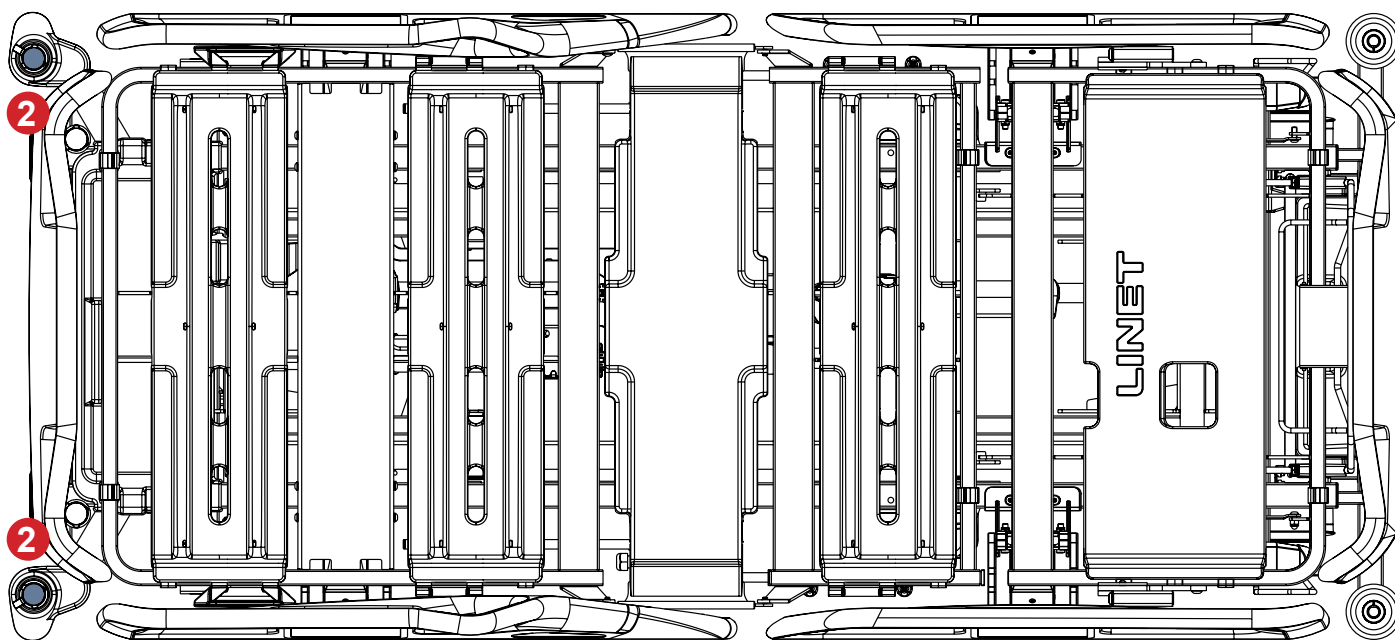


Fig. Adaptateurs pour accessoires pour la potence prolongée (2) dans le châssis bas du lit

4.3 Poignée triangulaire pour potence



ATTENTION !

Toujours lire les instructions d'utilisation de la poignée triangulaire avant d'utiliser ce produit !



ATTENTION !

Remplacer la poignée triangulaire lorsque ce remplacement est recommandé par son fabricant ! Toujours lire les instructions d'utilisation de la poignée triangulaire avant d'utiliser ce produit !

La poignée triangulaire est destinée à soutenir le patient qui l'utilise pour s'asseoir ou se lever seul ou avec l'assistance d'un soignant.

La poignée triangulaire est destinée à être attachée sur la potence.

La charge maximale de la poignée triangulaire est de 75 kg.

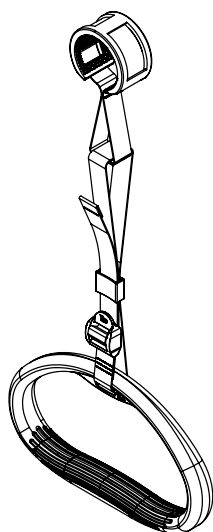
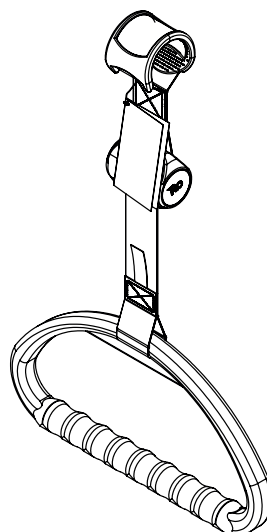


Fig. Poignée triangulaire 4ROTGERSG700-2



*Fig. Poignée triangulaire extensible
4ROTGNR100GR-2*

4.4 Crochet à perfusion pour potence

Le crochet à perfusion est destiné à suspendre des poches de perfusion contenant des solutions intraveineuses.
Le crochet à perfusion est destiné à être attaché sur la potence.
La charge maximale du crochet à perfusion est de 9 kg.

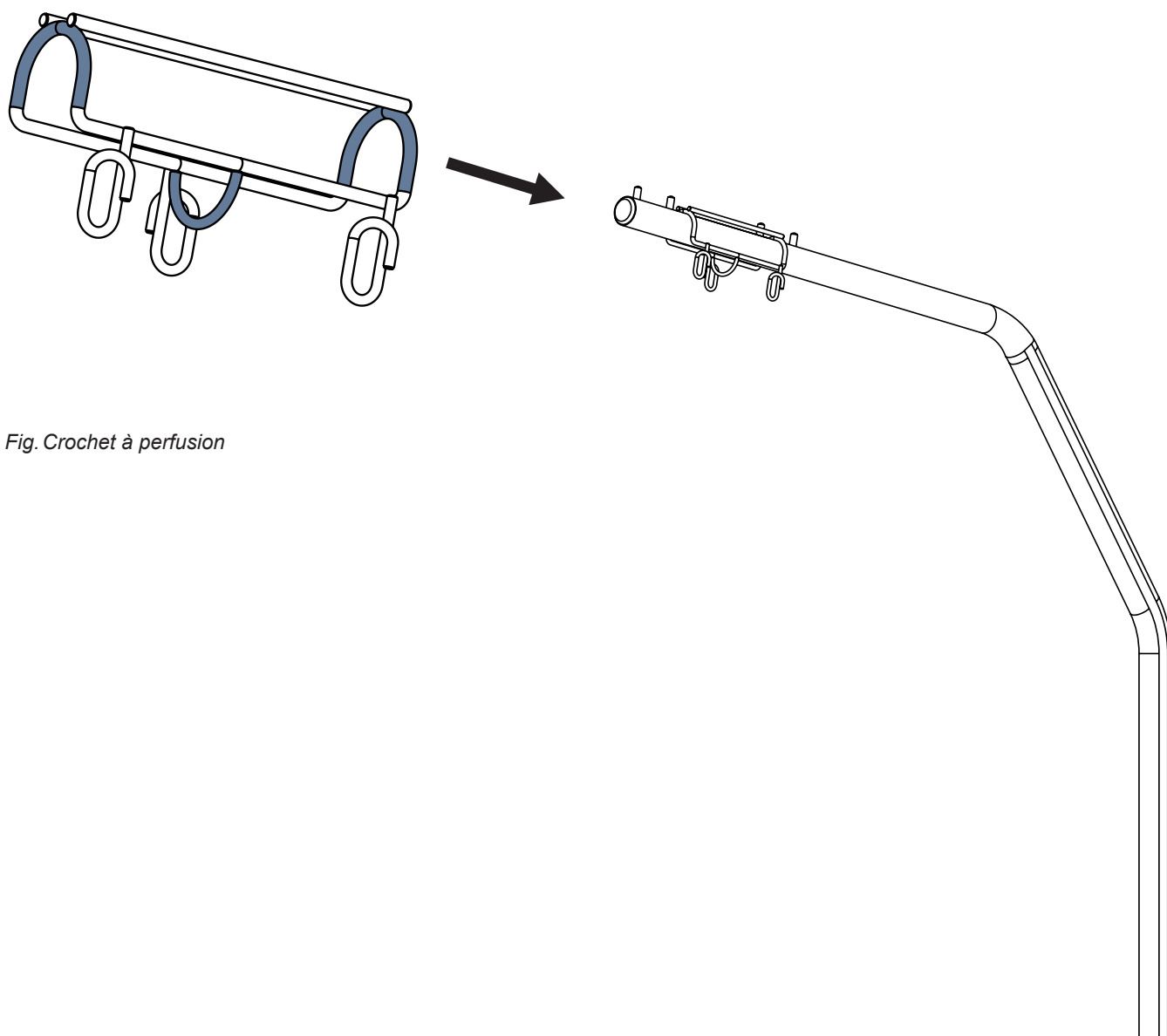


Fig. Crochet à perfusion

4.5 Porte-pompe Infusion Pump Holder (barre d'accessoires)



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ S'assurer que le porte-pompe Infusion Pump Holder ne risque pas d'entrer en collision avec les pièces mobiles du lit (notamment le relève-buste) ou avec le patient. Ceci doit être vérifié lors de l'installation.
- ▶ Ne pas serrer trop les pinces de serrage de la pompe à perfusion pendant le montage. Un serrage excessif peut endommager le porte-pompe Infusion Pump Holder.
- ▶ La pompe à perfusion ne peut être utilisée que si le porte-pompe Infusion Pump Holder est inséré dans une douille du côté tête du sommier ou dans une douille sur l'adaptateur d'accessoires du côté tête du lit.
- ▶ Ne pas utiliser le porte-pompe Infusion Pump Holder pour diriger ou pousser le lit pendant son déplacement.

Le porte-pompe Infusion Pump Holder est destiné à recevoir une pompe à perfusion compatible.

Le porte-pompe Infusion Pump Holder doit être inséré dans une douille du côté tête du sommier ou dans une douille sur l'adaptateur d'accessoires du côté tête du lit.

4.6 Porte-bouteille

Le porte-bouteille est destiné à recevoir des bouteilles avec des solutions intraveineuses.

Il est destiné à être suspendu à une tige à perfusion compatible.

La charge maximale du porte-bouteille est de 2 kg.

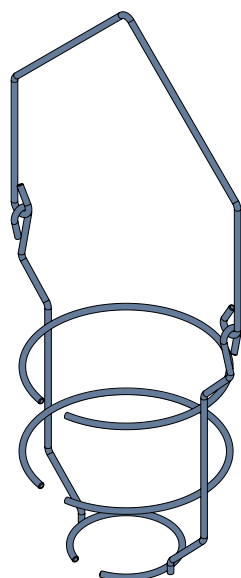


Fig. Porte-bouteille

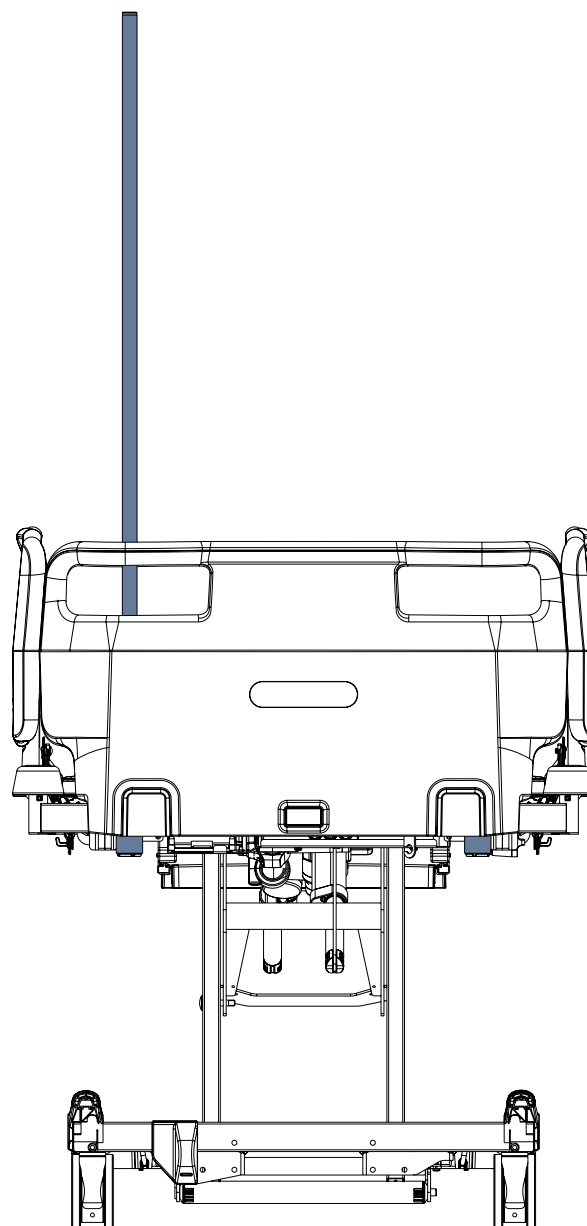


Fig. Porte-pompe Infusion Pump Holder côté tête du lit

4.7 Tige à perfusion télescopique



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

Les tiges à perfusion doivent être utilisées seulement pour les utilisations prévues. Toujours lire les instructions d'utilisation de la tige à perfusion correspondante !

- ▶ Installer une pompe à perfusion uniquement dans la section télescopique inférieure (plus large) de la tige à perfusion, au-dessus du panneau tête ou du panneau pied de lit.
- ▶ Ne jamais installer une pompe à perfusion sur la section télescopique supérieure (plus fine) de la tige à perfusion.
- ▶ S'assurer que la pompe à perfusion ne risque pas d'entrer en collision avec les pièces mobiles du lit (notamment le relève-buste) ou avec le patient. Ceci doit être vérifié lors de l'installation !
- ▶ Ne pas trop serrer les pinces de serrage de la pompe à perfusion pendant le montage. Un serrage excessif peut endommager la tige à perfusion.
- ▶ La pompe à perfusion ne peut être utilisée que si la tige à perfusion est insérée dans une douille du côté tête de sommier ou dans une douille sur l'adaptateur pour accessoires du côté tête de lit ou dans une douille sur le butoir d'angle, selon la compatibilité.
- ▶ Ne pas utiliser la tige à perfusion pour diriger/pousser le lit pendant son déplacement !
- ▶ Utiliser exclusivement des tiges à perfusion dotées de crochets pour suspendre les poches de perfusion ou dotées de porte-bouteilles avec des solutions intraveineuses.
- ▶ Ne pas insérer la tige à perfusion de type 4PV50-0742-0000 dans les douilles de l'adaptateur pour accessoires du côté tête du lit !
- ▶ S'assurer de ne pas dépasser la charge de fonctionnement en sécurité sur chaque crochet de la tige à perfusion !
- ▶ S'assurer de ne pas dépasser la charge de fonctionnement en sécurité de l'ensemble de la tige à perfusion !
- ▶ Régler la partie télescopique de la tige à perfusion dans la position requise en tournant le bouton et s'assurer que la partie télescopique de la tige à perfusion est bien fixée ! Informer le patient s'il est autorisé à régler le bouton rotatif !

Les tiges à perfusion sont destinées à fournir un support approprié pour attacher des pompes à perfusion/pompes à seringue et pour suspendre des poches de perfusion, des bouteilles ou des porte-bouteilles avec des solutions intraveineuses. La charge maximale de chaque crochet de la tige à perfusion et la charge maximale de l'ensemble de la tige à perfusion sont indiquées sur la tige à perfusion correspondante.

Numéro d'identification de la tige à perfusion	Emplacement
4PV340290000	2 douilles du côté tête du sommier, 2 douilles sur l'adaptateur pour accessoires du côté tête du lit
4PV17744500L	
4PV17587200L	
4PV322717000	
4PV297475000	
4PV17604800L	
4MA45MNA0003	
4PV33449300L	
4PV30862900L-A	
4PV33466000L	
4PV50-0742-0000	2 douilles du côté tête du sommier
4PKV26107200	douilles dans les butoirs d'angle du lit

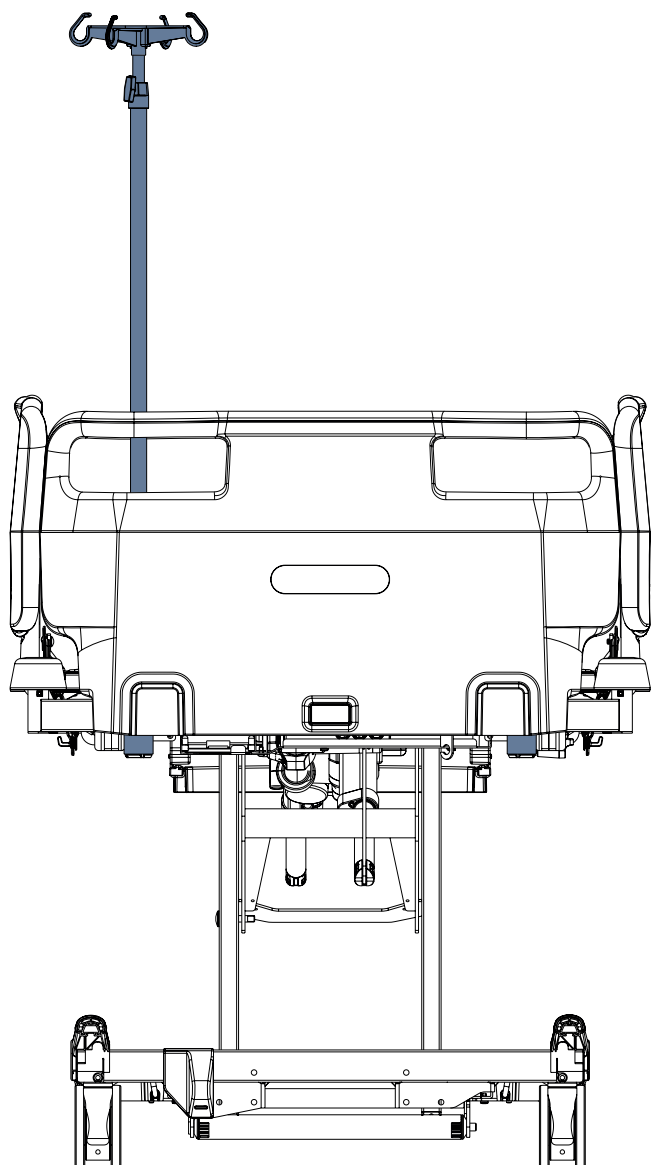


Fig. Tige à perfusion dans la douille du côté tête du sommier

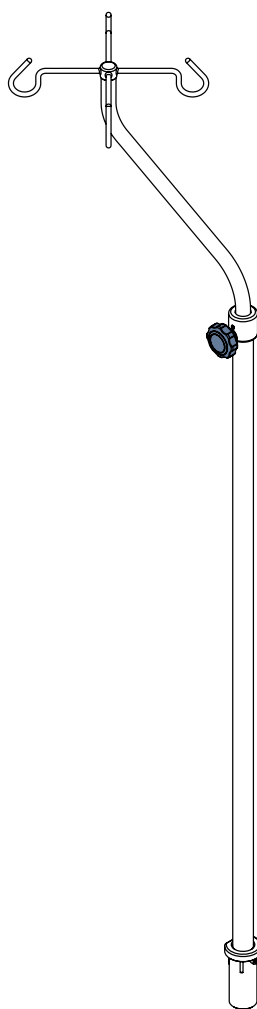


Fig. Tige à perfusion en forme de S (4MA45M-NA0003)

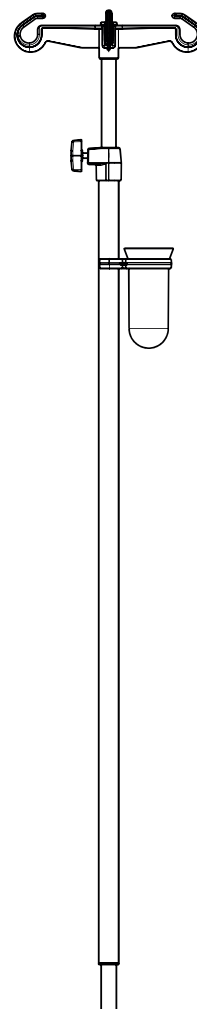


Fig. Tige à perfusion avec réceptacle pour canules (4PKV26107200)

4.8 Tige à perfusion mobile



ATTENTION !

Lire le mode d'emploi de la tige à perfusion mobile avant de l'utiliser !

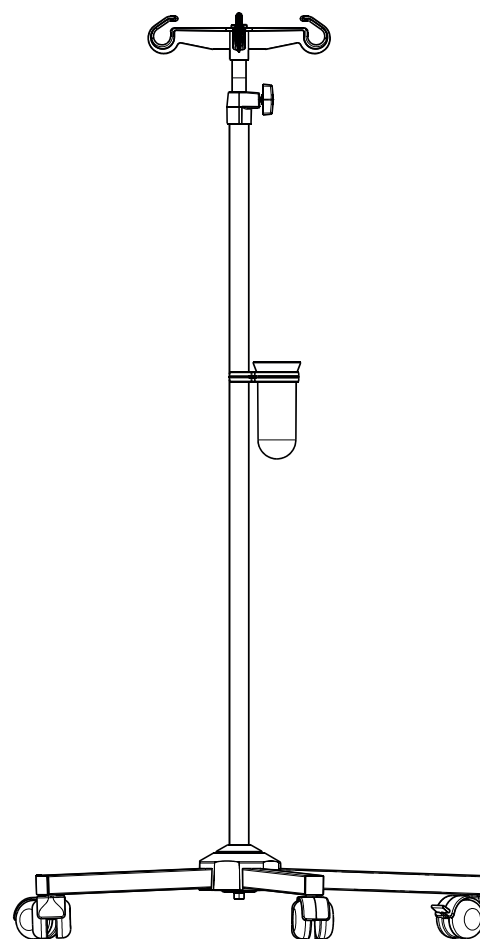


Fig. Tige à perfusion mobile avec réceptacle pour canules (4ZZ426100)

4.9 Tablette porte-moniteur



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ Le moniteur doit être fixé avec des sangles sur la tablette porte-moniteur avant d'être utilisé !
- ▶ Éviter toute collision avec la tablette porte-moniteur lorsque vous soulevez le relève-jambes !
- ▶ Il est interdit d'installer la tablette porte-moniteur dans les butoirs d'angle du lit sur le côté tête de lit !

La tablette porte-moniteur est destinée à transporter un moniteur lorsque la tablette porte-moniteur est repliée vers l'intérieur du lit (3). La tablette porte-moniteur doit être installée sur le côté pied du lit, dans les butoirs d'angle du lit uniquement. Lorsque la tablette porte-moniteur est repliée vers l'extérieur du lit (2), elle sert à écrire. La tablette porte-moniteur est munie de sangles permettant d'attacher un moniteur sur la tablette.

La tablette porte-moniteur est uniquement compatible avec le lit équipé de butoirs d'angle avec des douilles accessoires. La charge maximale de la tablette porte-moniteur en position de transport d'un moniteur (3) et d'écriture (2) est de 15 kg.

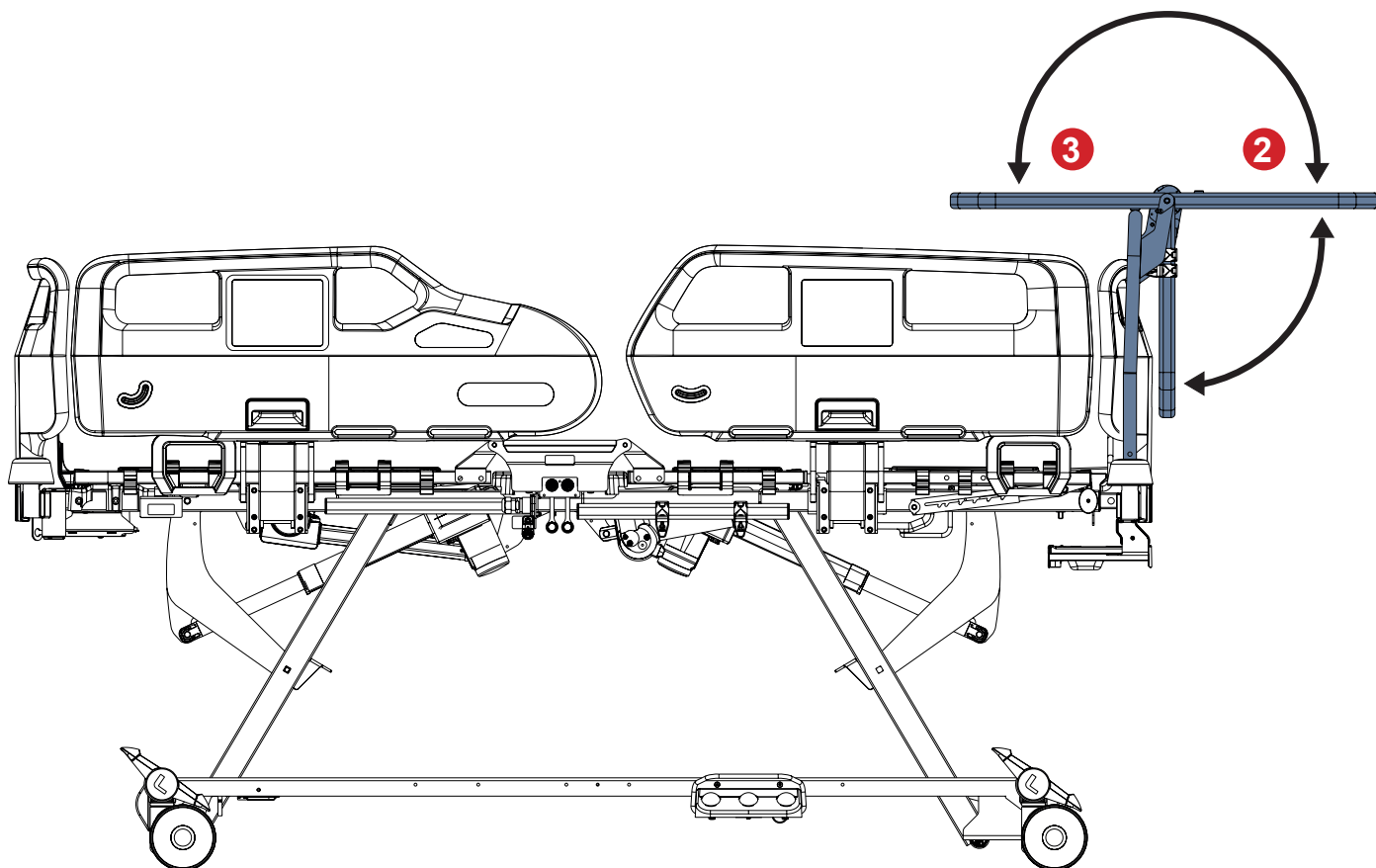


Fig. Tablette porte-moniteur installée sur les butoirs d'angle du côté pied du lit

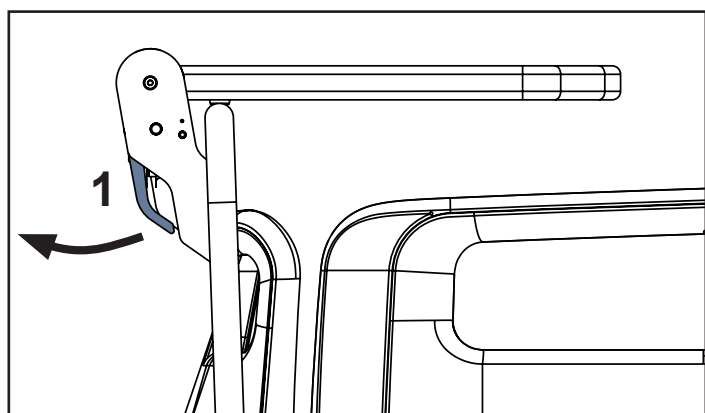


Fig. Manipulation avec levier de commande de la tablette porte-moniteur (1)

- 1. Levier de commande de la tablette porte-moniteur
- 4. Panneau de tablette porte-moniteur
- 5. Sangles de fixation d'un moniteur
- 6. Crochets pour accessoires

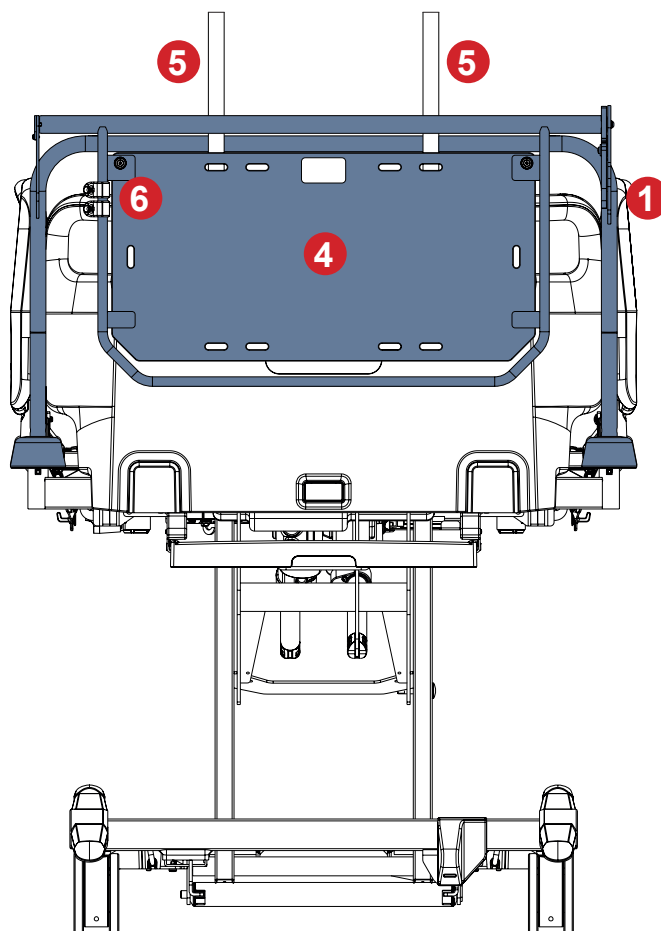


Fig. Description de la tablette porte-moniteur

Pour changer la position de la tablette :

- Tirer le levier de commande (1).
- Changer la position de la tablette.
- Relâcher le levier de commande (1) afin de verrouiller la position de la tablette.
- Essayer de bouger la tablette vers le haut et vers le bas afin de vérifier si la tablette est bien verrouillée dans sa position.

CROCHETS POUR ACCESSOIRES

La position des crochets attachés au cadre de la tablette porte-moniteur peut être modifiée selon les besoins. Observer la charge maximale de la tablette porte-moniteur lorsque vous suspendez des objets à ces crochets ! La charge maximale d'un crochet en plastique est de 2 kg.

4.10 Tablette écriteire

La tablette écriteire est destinée à être utilisée comme support d'écriture par le personnel de soins.
Il est destiné à être installé uniquement sur le bord supérieur du panneau pied ou du panneau tête en plastique.
La charge maximale de la tablette écriteire est de 10 kg.

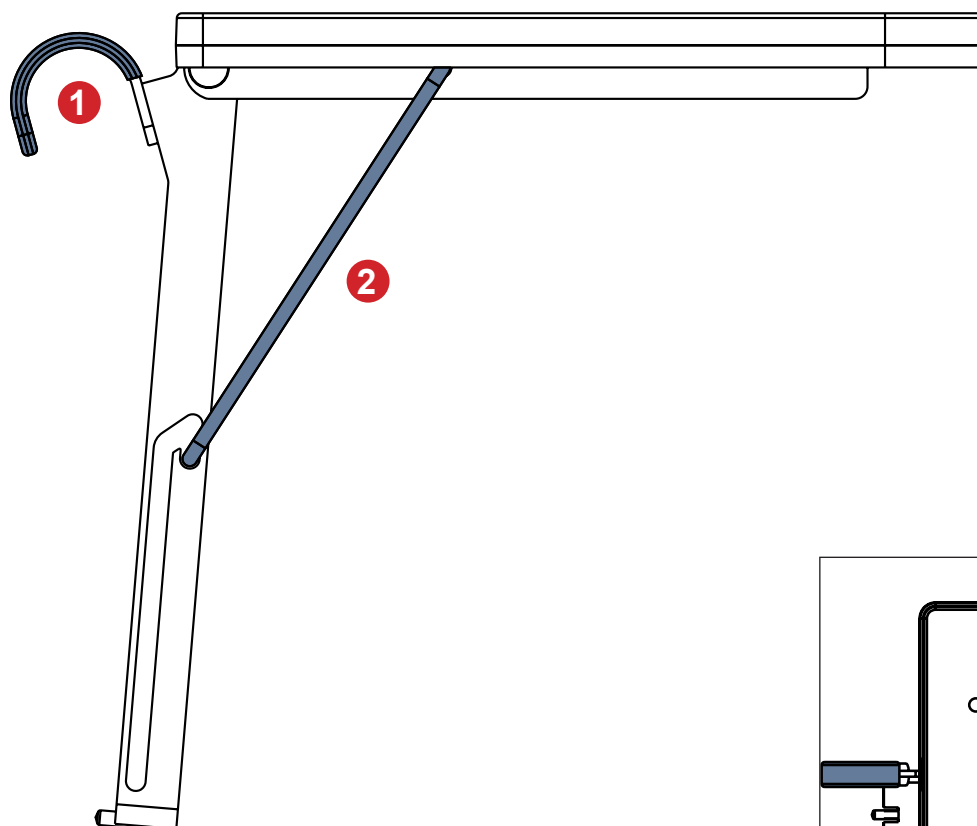


Fig. Tablette écriteire

1. Crochet à installer sur le bord supérieur du panneau pied ou du panneau tête.
2. Support du panneau de tablette écriteire

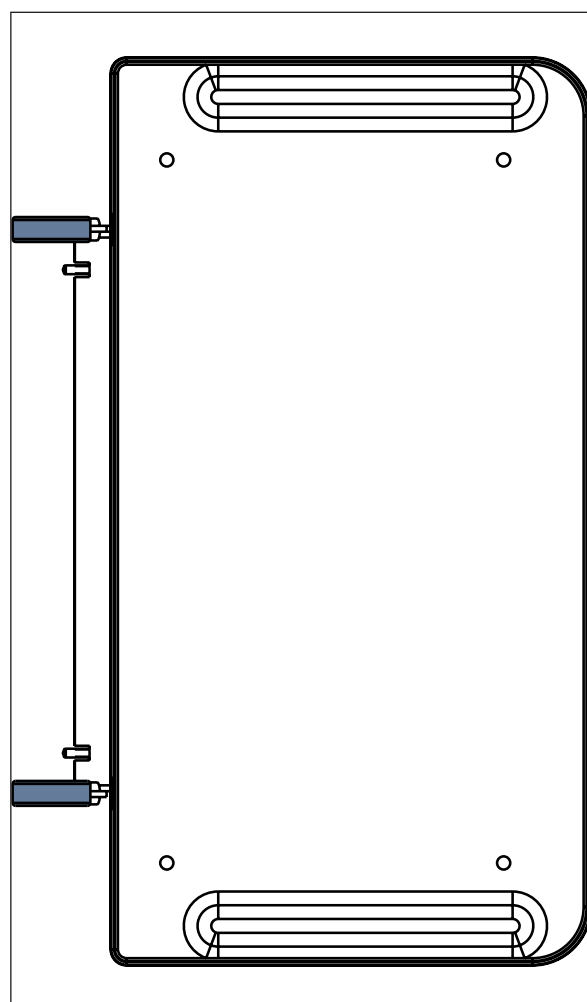


Fig. Panneau de tablette écriteire

4.11 Plateau

Le plateau est prévu pour ranger des couvertures ou des draps de lit.
Il est destiné à être installé sur le panneau tête ou le panneau pied en plastique.
La charge maximale du plateau est de 10 kg.

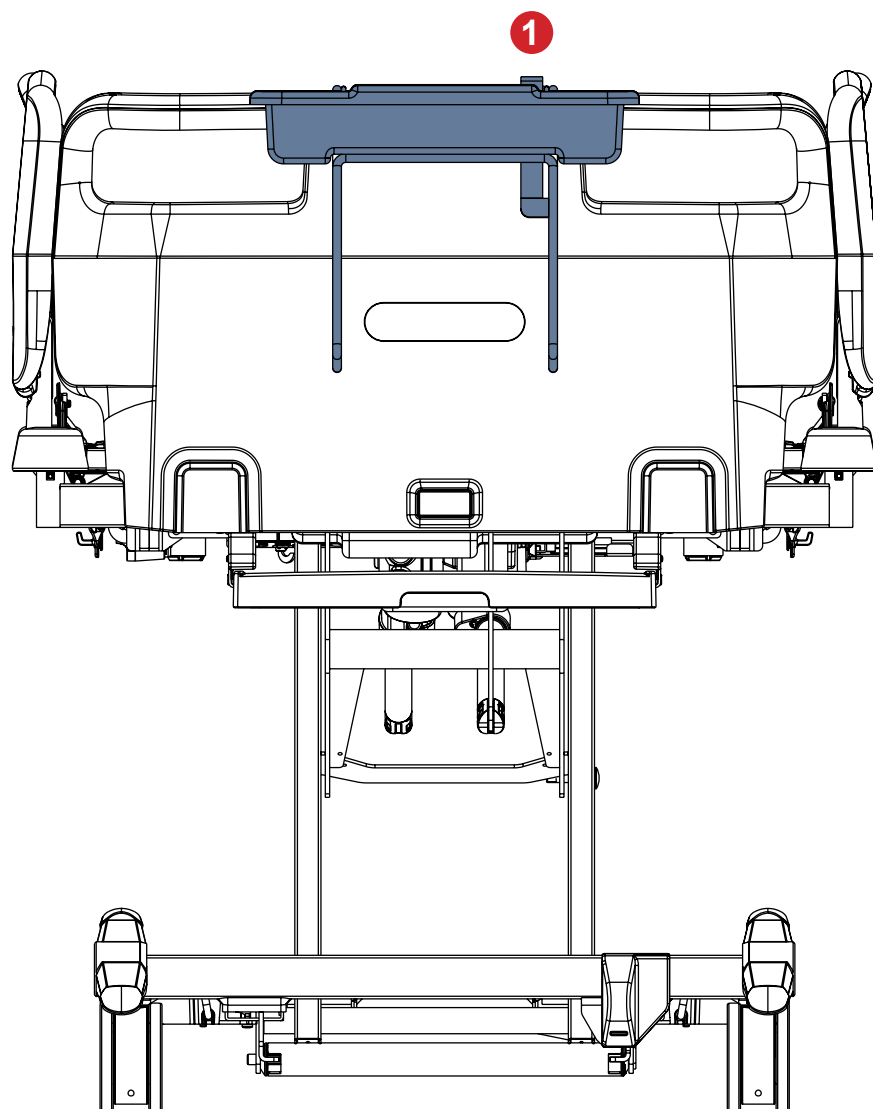


Fig. Plateau sur le panneau pied

Pour monter le plateau sur le panneau tête ou le panneau pied en plastique :

- Attacher la structure en fil métallique du plateau sur le panneau tête ou le panneau pied.
- Insérer le bord supérieur du conteneur en plastique sous la console supérieure de la structure métallique, comme indiqué sur l'image ci-dessus.
- Abaisser l'autre extrémité du conteneur en plastique afin de le suspendre à la structure métallique.

Pour faire basculer le conteneur en plastique en position de non-fonctionnement :

- Appuyer sur le levier de déverrouillage (1) et faire basculer le conteneur en plastique dans la structure métallique.

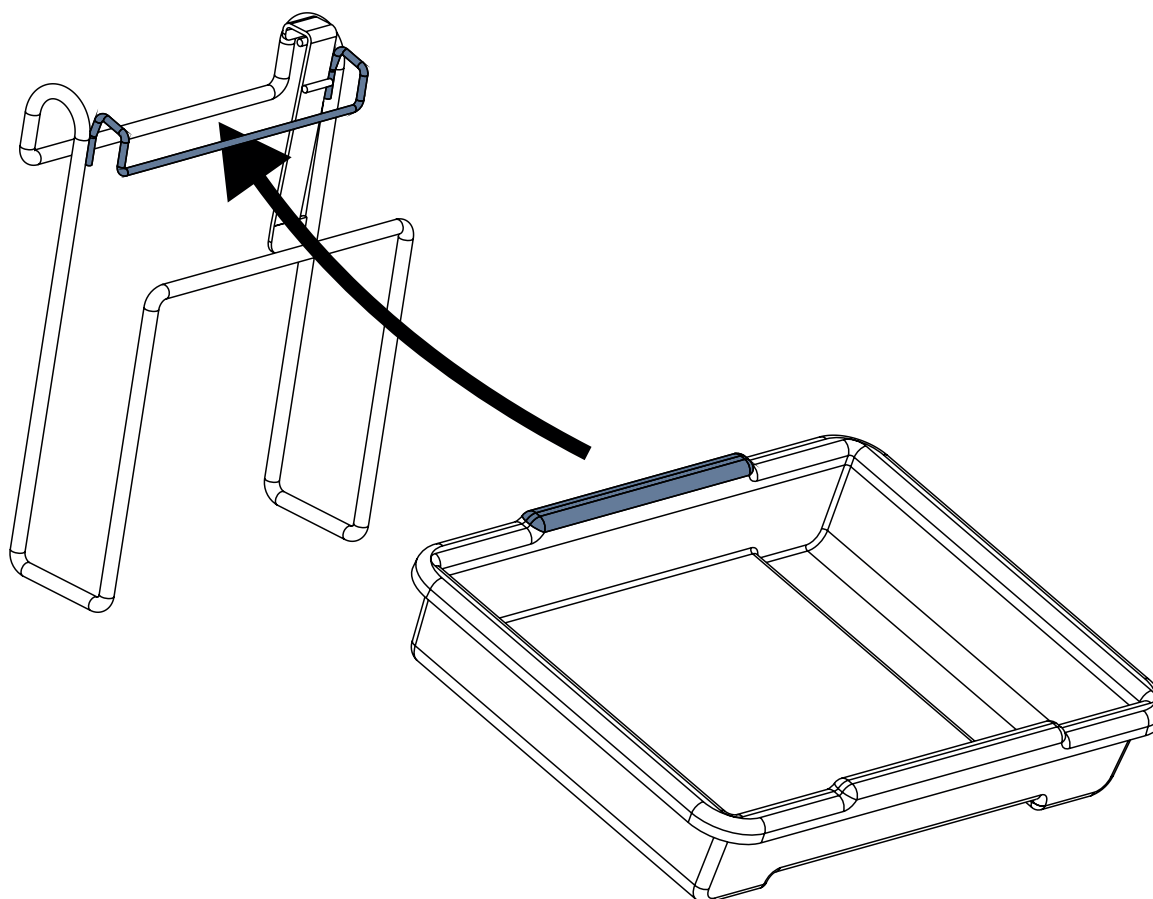


Fig. Montage d'un conteneur en plastique dans la structure en fil métallique du plateau

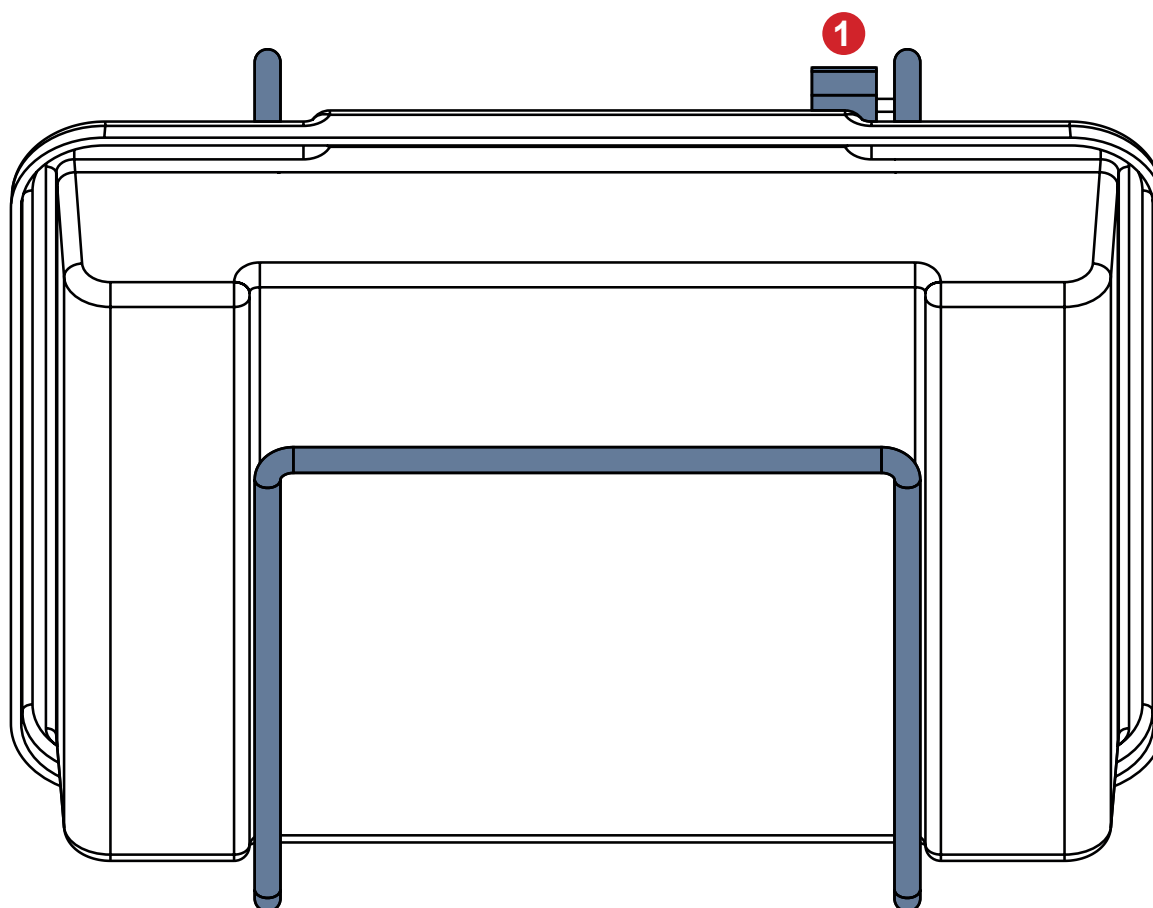


Fig. Conteneur en plastique en position de non-fonctionnement (1 - levier de déverrouillage du conteneur en plastique)

4.12 Porte-bouteille à oxygène



- ATTENTION !**
Le porte-bouteille à oxygène présente un risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte ou en cas de manque de prudence pendant le déplacement du lit !
- Vérifier que le panneau tête en polypropylène est correctement attaché au lit avant de monter le porte-bouteille à oxygène sur le panneau tête de lit en polypropylène.
 - S'assurer que le porte-bouteille à oxygène est correctement installé dans la bonne position sur le panneau tête en polypropylène.
 - Il est nécessaire de vérifier la position du porte-bouteille à oxygène (avec ou sans bouteille à oxygène) avant de déplacer le lit afin de sécuriser sa position de transport.
 - Faire attention aux personnes ou aux objets qui se trouvent à proximité lorsque vous déplacez ou manœuvrez le lit équipé d'un porte-bouteille à oxygène.
 - Attacher chaque bouteille à oxygène insérée dans le porte-bouteille à oxygène horizontal à l'aide d'une sangle en caoutchouc, afin de la protéger contre toute chute ou tout mouvement involontaire. Ne pas utiliser le porte-bouteille à oxygène horizontal sans l'attacher à l'aide d'une sangle en caoutchouc !
 - S'assurer que la valve de la bouteille à oxygène ne sera pas endommagée par une manipulation ou un montage négligent ou incorrect.

Les porte-bouteilles à oxygène sont destinés à recevoir et à transporter des bouteilles à oxygène d'un poids maximal de 15 kg et d'un volume de 5 litres.

Numéro d'identification du porte-bouteille à oxygène	Dimensions de la bouteille à oxygène compatible (longueur x diamètre)
4MAR250141	Max. : 80 cm x 12 cm Min. : 33 cm x 10 cm (type E)
4MAR250140	Max. : 80 cm x 14 cm Min. : 32 cm x 12 cm
4MAS0001653	Max. : 52 cm x 14 cm Min. : 29 cm x 9 cm

4.12.1 Porte-bouteille à oxygène vertical

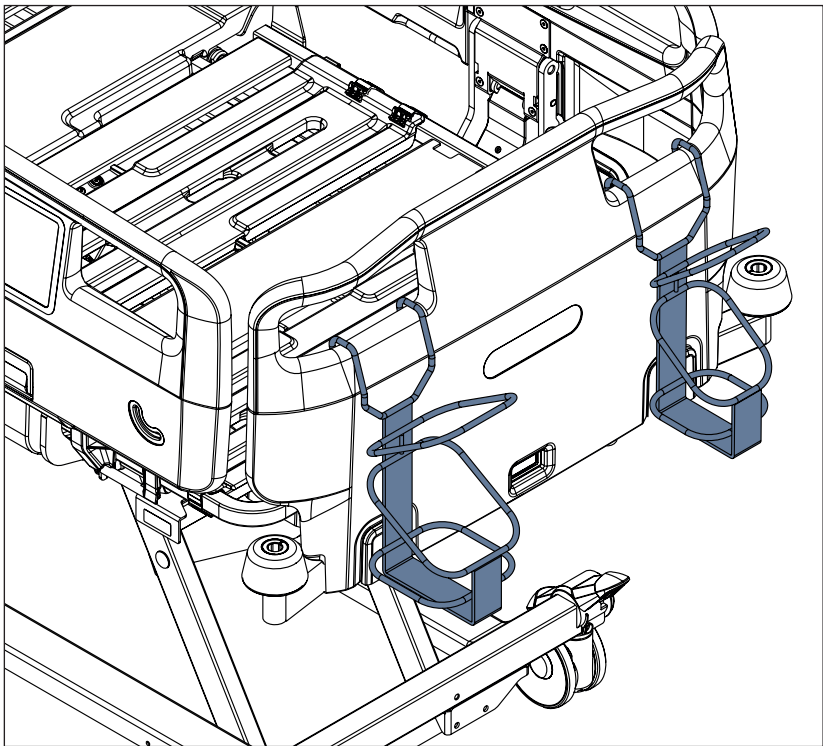


Fig. Deux porte-bouteilles à oxygène verticaux sur le plateau de tête en polypropylène

- Pour monter le porte-bouteille à oxygène vertical sur le lit :**
- Attacher le porte-bouteille à oxygène vertical sur le panneau tête en polypropylène de sorte que le porte-bouteille à oxygène vertical soit suspendu au bord de l'une des fenêtres dans le panneau tête en polypropylène.

4.12.2 Porte-bouteille à oxygène horizontal pour panneau tête en polypropylène

Pour monter le porte-bouteille à oxygène horizontal sur le lit :

► Attacher le porte-bouteille à oxygène horizontal sur le panneau tête en polypropylène de sorte que le porte-bouteille à oxygène horizontal soit suspendu au bord des deux fenêtres dans le panneau tête en polypropylène.

Pour insérer en toute sécurité une bouteille à oxygène compatible dans le porte-bouteille à oxygène horizontal :

► Attacher la bouteille à oxygène insérée dans le porte-bouteille à oxygène à l'aide d'une sangle en caoutchouc, afin de la protéger contre toute chute ou tout mouvement involontaire.

► Vérifier que le porte-bouteille à oxygène horizontal et la bouteille à oxygène compatible sont correctement installés.

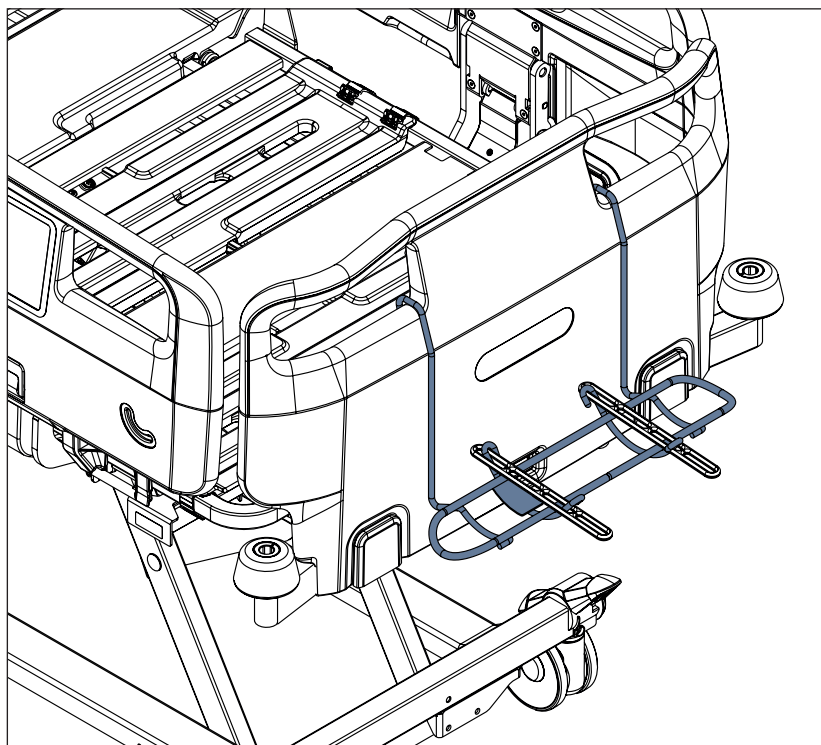


Fig. Porte-bouteille à oxygène horizontal sur le panneau tête en polypropylène

4.13 Porte-poche à urine

Le porte-poche à urine est destiné à attacher des poches à urine.

Le porte-poche à urine est prévu pour être monté sur le rail d'accessoires, dans la zone centrale du lit.

La charge maximale du porte-poche à urine est de 5 kg.

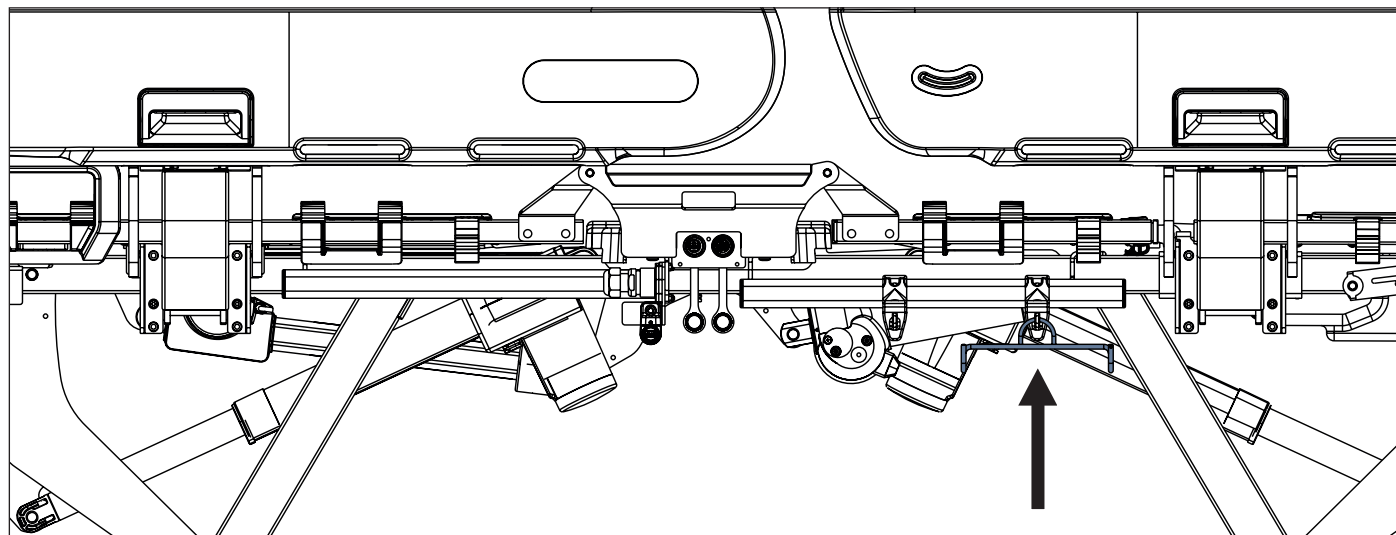


Fig. Porte-poche à urine suspendu au crochet sur le rail d'accessoires

4.14 Porte-urinal

Le porte-urinal est destiné à accueillir des urinaux compatibles.

4.14.1 Porte-urinal pour barrières polypropylène

Le porte-urinal pour barrières polypropylène est destiné à être monté sur le rail d'accessoires ou sur la barrière de pieds en polypropylène.

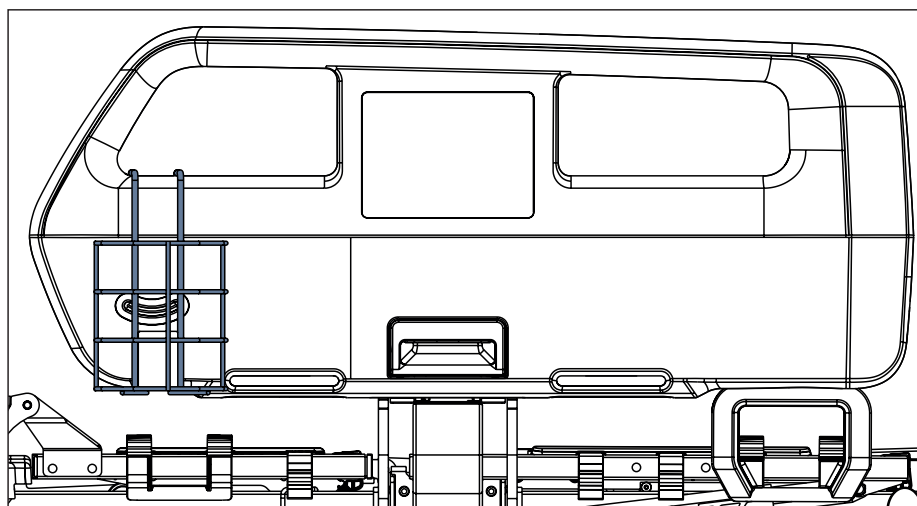


Fig. Porte-urinal suspendu à la fenêtre de droite dans la barrière de pieds en polypropylène

4.15 Porte-bouteille de Redon

Le porte-bouteille de Redon est destiné à accueillir des bouteilles de Redon.

Le porte-bouteille de Redon en configuration avec les barrières polypropylène est prévu pour être monté sur le rail d'accessoires, sous le relève-buste uniquement.

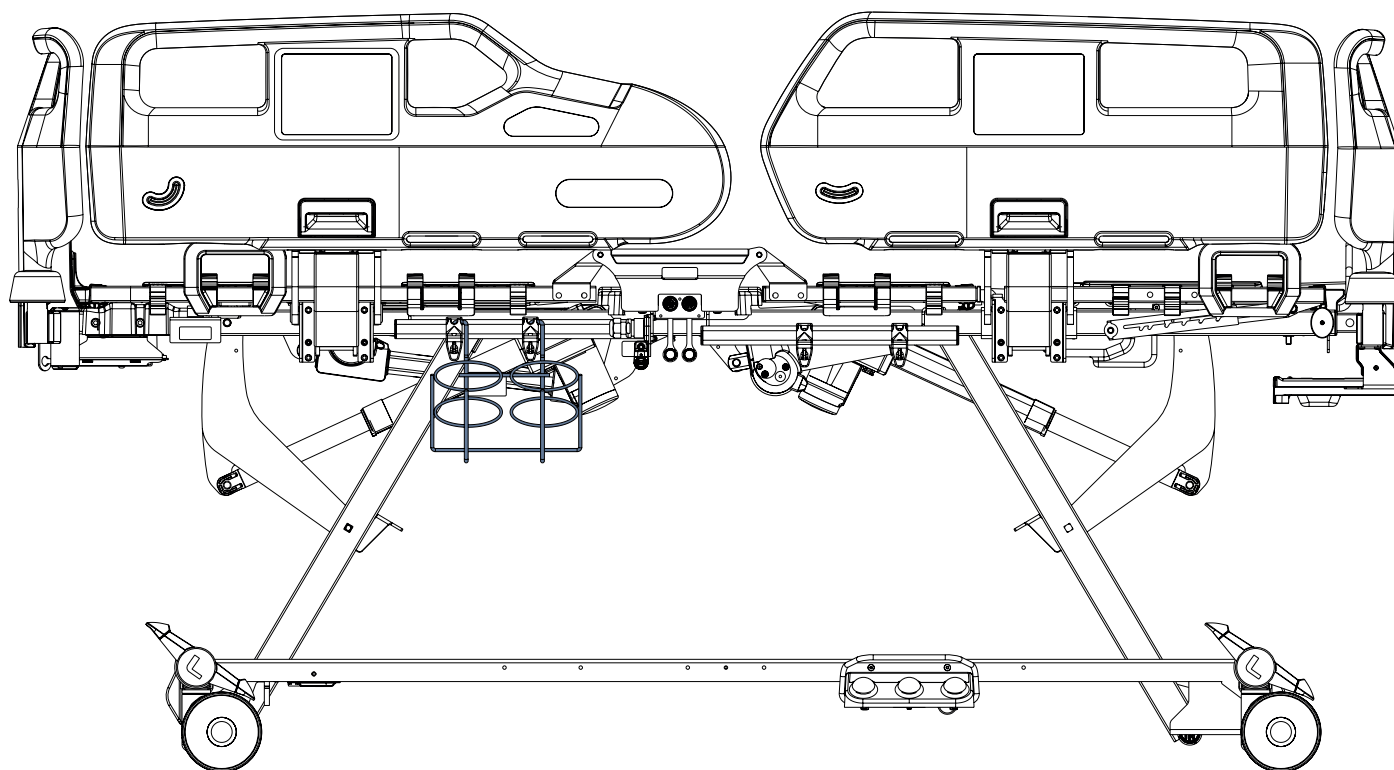


Fig. Porte-bouteille de Redon sur le rail d'accessoires sous le relève-buste du lit avec des barrières polypropylène

4.16 Porte-béquilles

Le porte-béquilles est destiné à maintenir une paire de béquilles uniquement.

Le porte-béquilles **1102070000000** est prévu pour être monté sur le panneau pied ou le panneau tête en plastique uniquement.

Le diamètre maximal d'un tube de béquille compatible sous la poignée de la béquille est de 3 cm. Le diamètre minimum d'un tube de béquille compatible sous la poignée de la béquille est de 2 cm. La charge maximale du porte-béquilles est de 3 kg.

Pour placer une béquille compatible sur le porte-béquilles :

- Insérer dans le porte-béquilles le tube d'une béquille compatible, sous la poignée de la béquille (1).

Pour retirer une béquille compatible du porte-béquilles :

- Sortir la béquille du porte-béquille en la tirant vers vous (2).

4.16.1 Porte-béquilles pour panneau pied en plastique

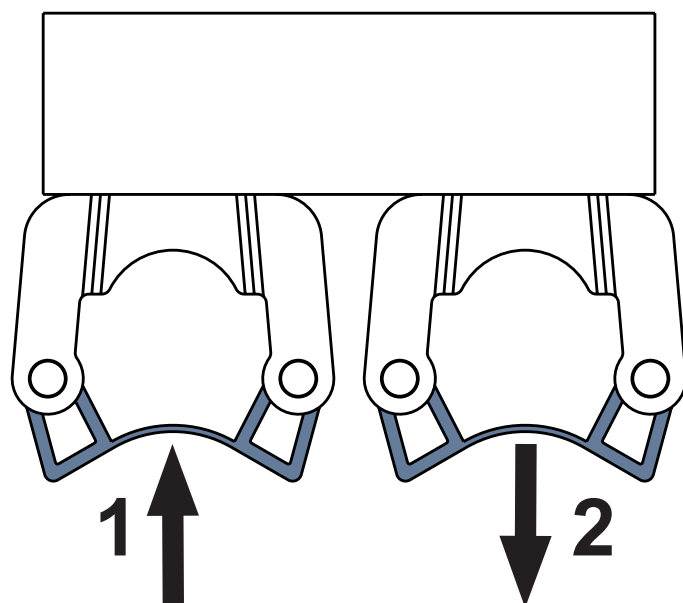


Fig. Porte-béquilles 1102070000000

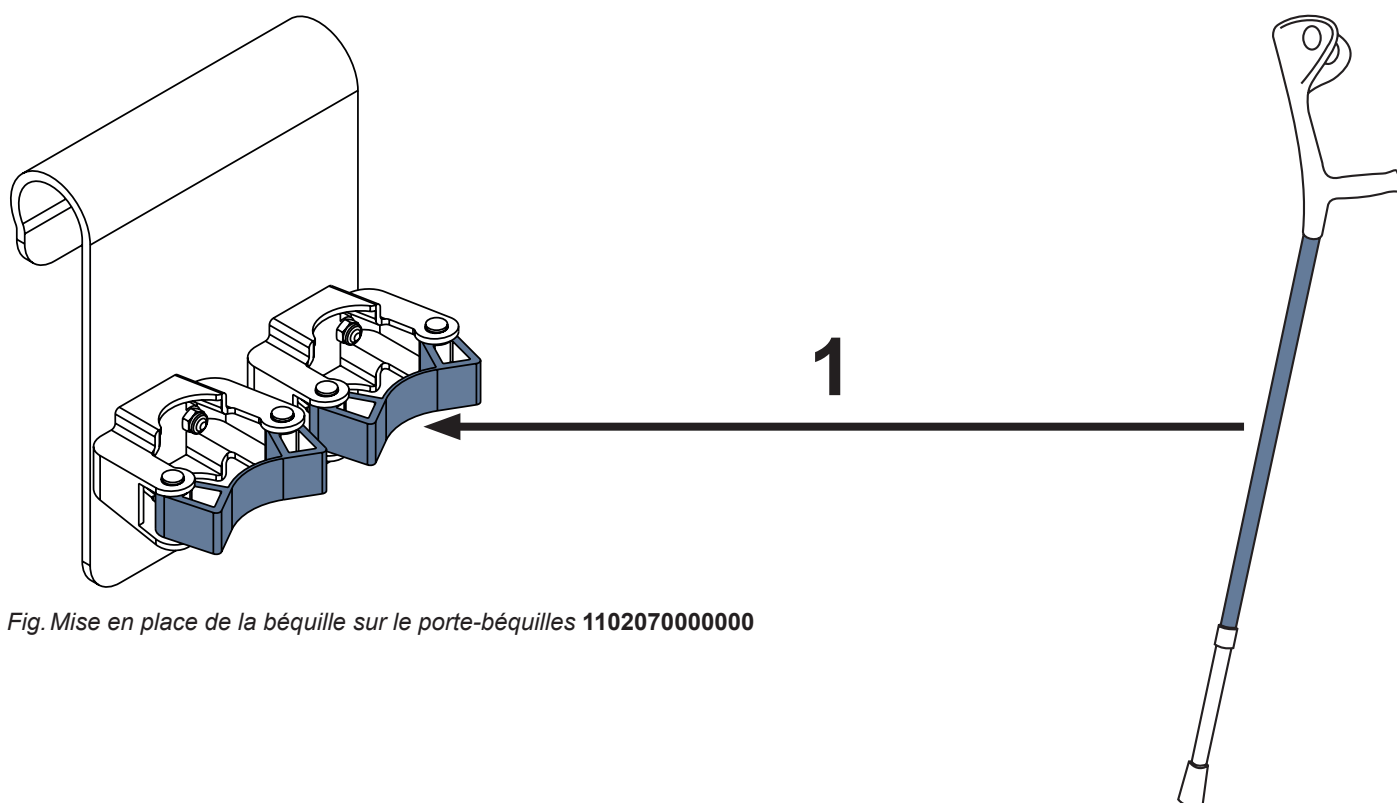


Fig. Mise en place de la béquille sur le porte-béquilles **1102070000000**

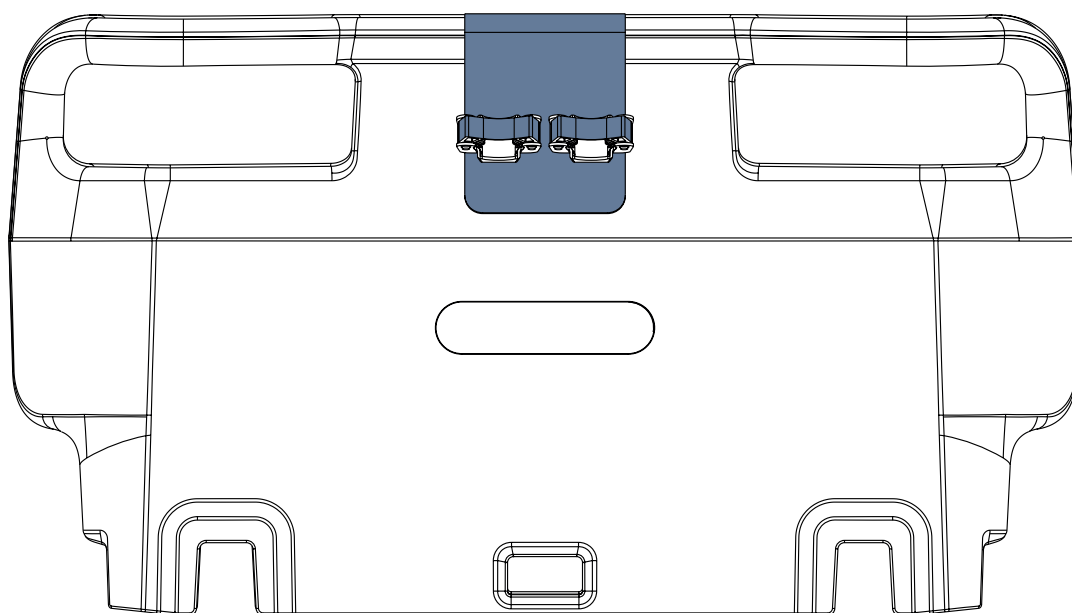


Fig. Porte-béquilles **1102070000000** sur le panneau pied en plastique

4.17 Porte-serviettes

Le porte-serviettes est destiné à contenir des serviettes ou des couvertures.

4.17.1 Porte-serviettes pour panneau pied en plastique

Il est prévu que le porte-serviettes pour le panneau pied en plastique soit suspendu au bord des deux fenêtres dans le panneau pied ou le panneau tête en plastique.

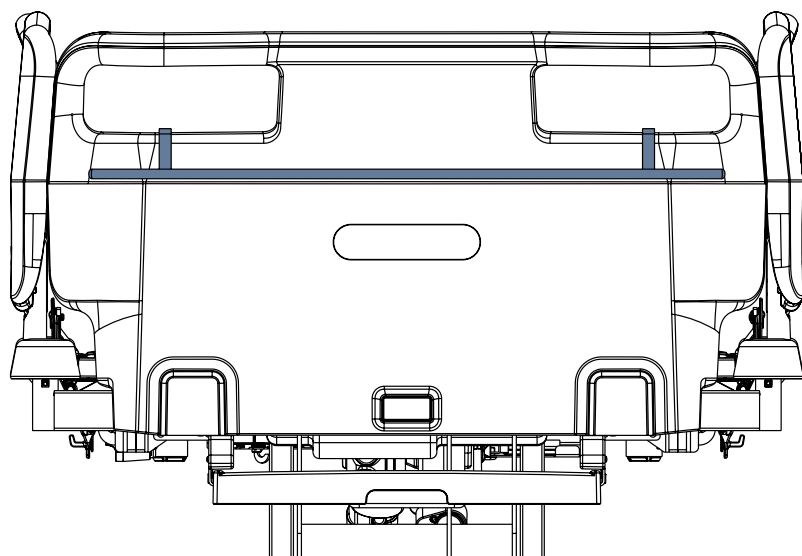


Fig. Porte-serviettes sur le panneau pied en plastique

4.18 Porte-nom

Le porte-nom est destiné à contenir une fiche portant le nom du patient.

4.18.1 Porte-nom pour panneau pied en plastique

Il est prévu que le porte-nom pour panneau pied en plastique soit installé sur le bord supérieur du panneau pied ou du panneau tête en plastique.

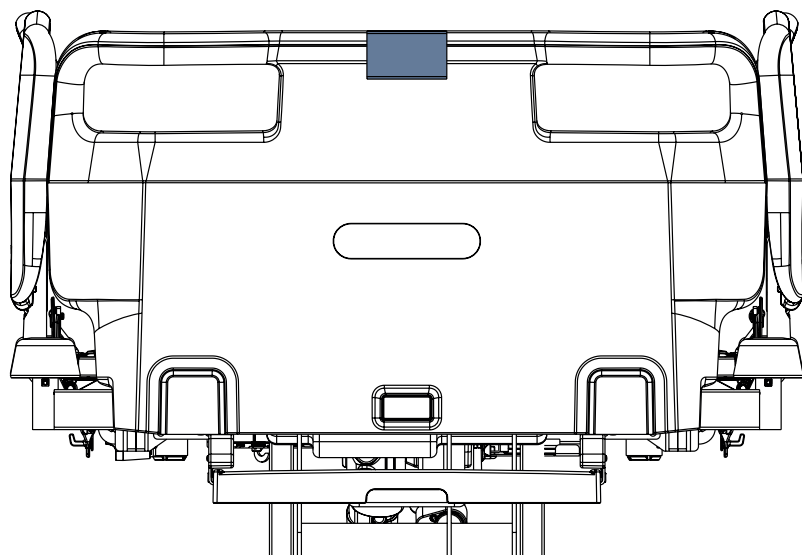


Fig. Porte-nom sur le panneau pied en plastique

4.19 Porte-documents

Le porte-documents est destiné à contenir une fiche pour enregistrer l'évolution de l'état de santé du patient.

4.19.1 Porte-documents pour panneau pied en plastique

Il est prévu que le porte-documents pour panneau pied en plastique soit installé sur le bord supérieur du panneau pied ou du panneau tête en plastique.

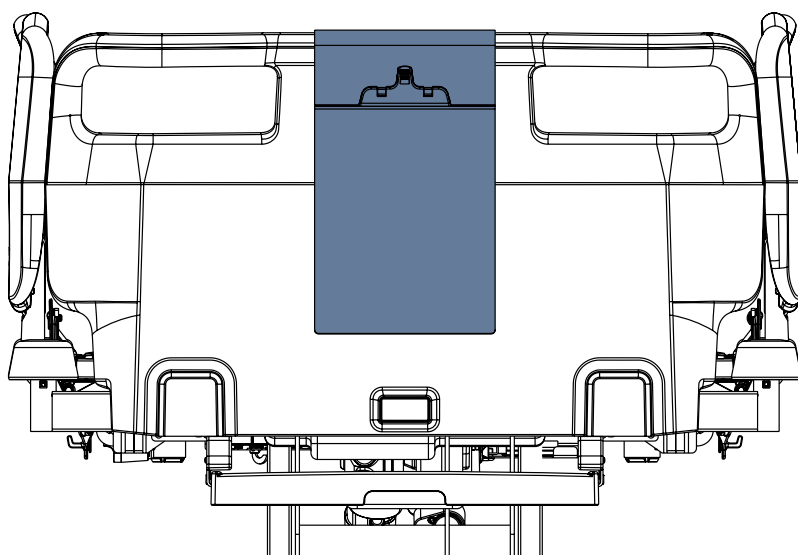


Fig. Porte-documents sur le panneau pied en plastique

4.20 Support pour petits accessoires avec deux crochets

Il est prévu que le support pour petits accessoires avec deux crochets soit installé sur le bord supérieur du panneau pied ou du panneau tête en plastique avec un mécanisme de verrouillage de sécurité. Ce support est destiné à contenir une fiche portant le nom du patient et les affaires du patient comme son sac à main.

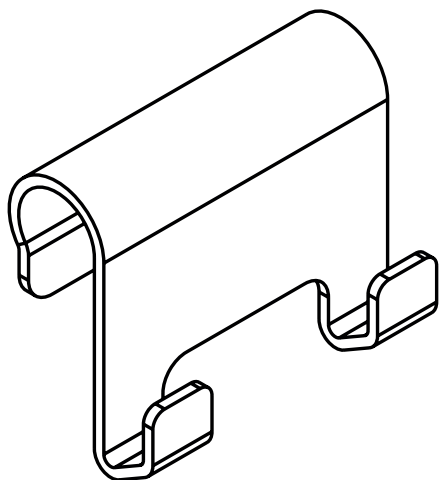


Fig. Support pour petits accessoires avec deux crochets

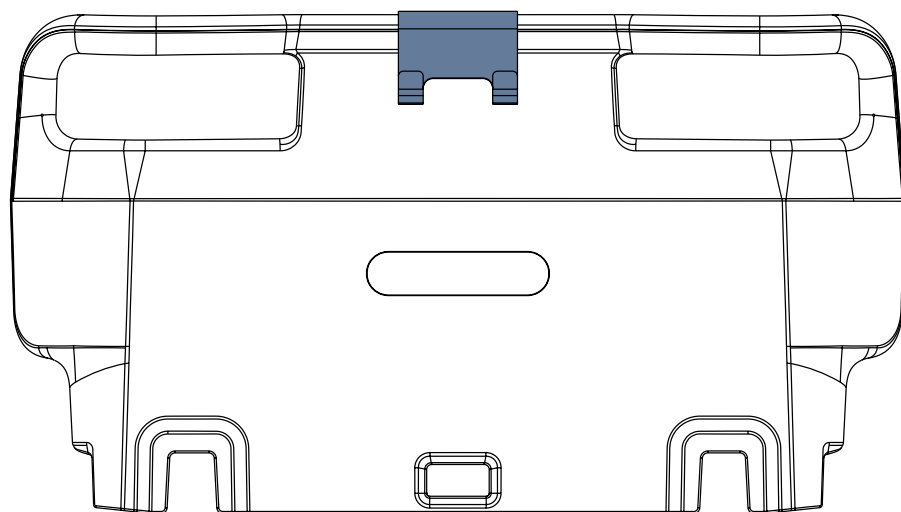


Fig. Support pour petits accessoires avec deux crochets sur le panneau pied en plastique avec un mécanisme de verrouillage de sécurité

4.21 Coussin de positionnement

Le coussin de positionnement est destiné à fournir un soutien supplémentaire au patient pendant que le lit est incliné à gauche ou à droite ; ceci est valable pour le lit Essenza 400 avec latéralisation. Il est prévu que le coussin de positionnement soit placé sur le matelas.



Fig. Coussin de positionnement

4.22 Protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties

Les protections pour barrières en plastique intégrales en deux parties sont destinées à être placées sur les barrières en plastique intégrales en deux parties uniquement.

Un jeu de housses pour barrières polypropylène comprend quatre housses.

Les housses pour barrières polypropylène sont interchangeables.

Chaque housse pour barrière polypropylène contient un rembourrage en mousse qui doit être placé sur le côté intérieur de la barrière.

L'étiquette d'identification de chaque housse pour barrière polypropylène est marquée d'une lettre correspondant à la barrière polypropylène prévue.

La lettre **A** fait référence à la housse prévue pour la barrière polypropylène de tête à droite.

La lettre **B** fait référence à la housse prévue pour la barrière polypropylène de pieds à droite.

La lettre **C** fait référence à la housse prévue pour la barrière polypropylène de pieds à gauche.

La lettre **D** fait référence à la housse prévue pour la barrière polypropylène de tête à gauche.

Vérifiez que la partie supérieure de la housse pour barrière polypropylène n'est pas endommagée.

En cas d'endommagement, remplacez l'intégralité de la housse pour barrière polypropylène.

Vérifiez qu'aucun liquide n'a pénétré dans la housse pour barrière polypropylène.

En cas de pénétration de liquide dans le revêtement en mousse, remplacez l'intégralité de la housse pour barrière polypropylène.

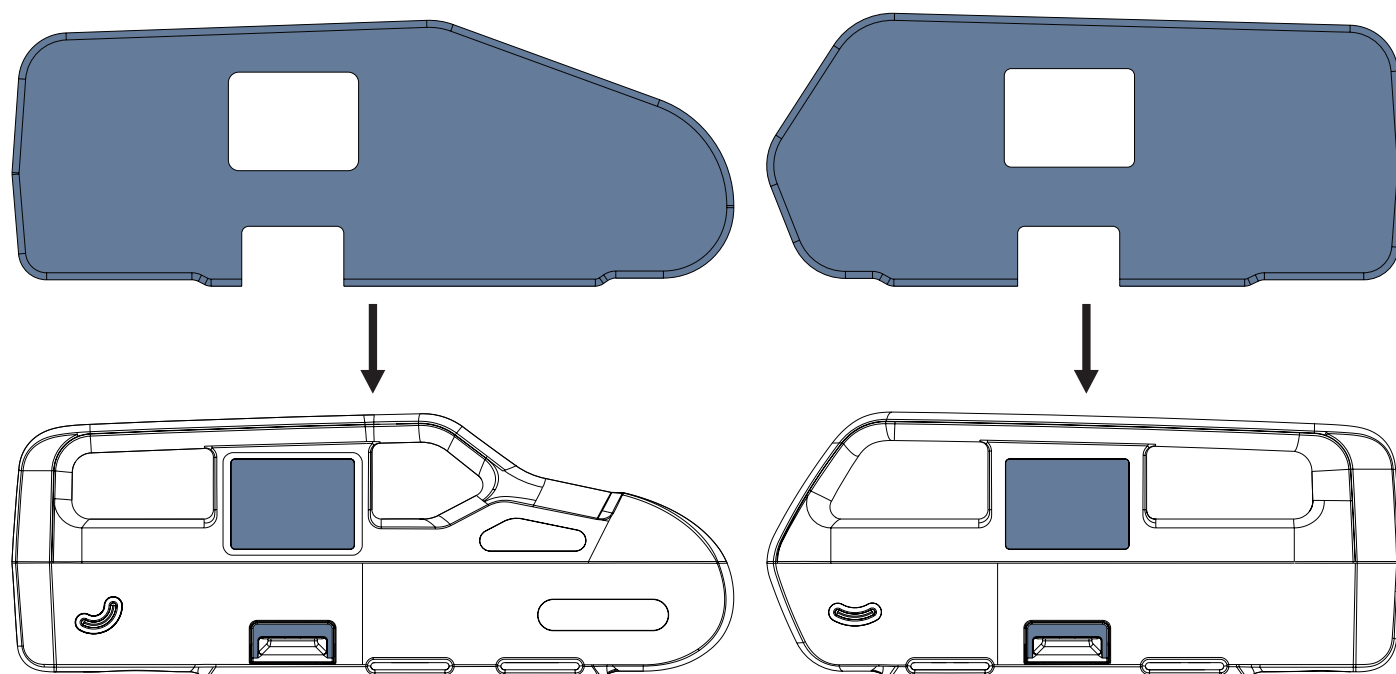


Fig. Mise en place des protections prévues à cet effet sur les barrières polypropylène intégrales en deux parties

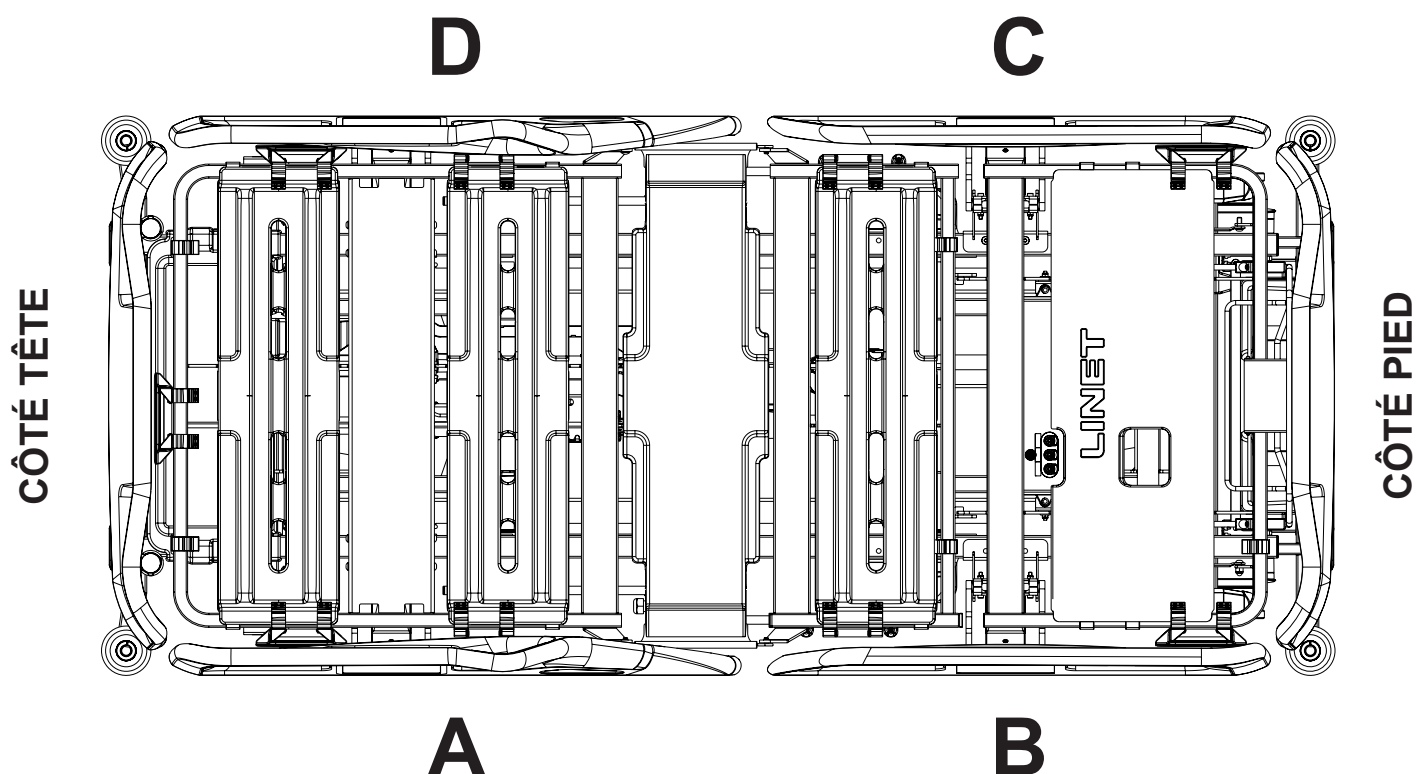


Fig. Positions des protections pour barrières polypropylène intégrales en deux parties

Pour placer correctement la housse sur la barrière polypropylène :

1. Placez la housse sur la barrière polypropylène compatible, du haut vers le bas.
2. Veillez à ce que la housse s'adapte bien à la barrière polypropylène.
3. Fermez la fermeture à glissière de la housse.

Pour nettoyer la housse pour barrière polypropylène :

1. Nettoyez la housse pour barrière polypropylène avec de l'eau chaude et du détergent.
2. Rincez la housse pour barrière polypropylène à l'eau froide.
3. Laissez sécher la housse pour barrière polypropylène ou essuyez-la.
4. Nettoyez la housse pour barrière polypropylène avec un désinfectant.
5. Essuyez la housse pour barrière polypropylène à l'eau froide.
6. Laissez sécher la housse pour barrière polypropylène ou essuyez-la.

Pour laver la housse pour barrière polypropylène :

1. Retirez le rembourrage en mousse de la housse pour barrière polypropylène. Le rembourrage en mousse est inséré dans une poche séparée qui peut être dézipée depuis l'intérieur de la housse.
2. Lavez la housse pour barrière polypropylène dans la machine à laver pendant 3 minutes à 71 °C.
3. Séchez la housse pour barrière polypropylène au sèche-linge à basse température.

4.23 Cadre de traction Z



ATTENTION !

Lisez le mode d'emploi du cadre de traction Z avant d'utiliser ce produit !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ Il ne doit pas y avoir de patient sur le lit lors de l'installation du cadre de traction Z !
- ▶ Éviter les collisions entre le cadre de traction Z et le lit (repose-pieds et relève-buste) lors du positionnement du lit !
- ▶ Évitez les collisions entre le cadre de traction Z et les autres accessoires du lit !
- ▶ Ne pas transporter le lit équipé du cadre de traction Z, qu'un patient soit présent ou non !
- ▶ Ne régler la rallonge de lit qu'avant de placer le cadre de traction Z dans le lit !
- ▶ Veiller à ce que les fonctions de positionnement soient verrouillées pour ne pas être utilisées par un patient dans le lit avec le cadre de traction Z !
- ▶ Respecter la charge de fonctionnement en sécurité du lit, du cadre de traction Z et de ses crochets et poulies !
- ▶ Retirer le cadre de traction Z du lit s'il n'est pas nécessaire pour le traitement !
- ▶ S'assurer que les nœuds de fixation du cadre de traction Z sont fixés dans les positions prévues et procéder régulièrement à cette vérification !

Utilisation prévue

Le cadre de traction Z est une construction de soutien destinée à la fixation, à la traction et au soulagement des membres, de la colonne vertébrale et du bassin.

Le cadre de traction Z est destiné aux services d'orthopédie, de chirurgie, de traumatologie et aux services de soins intensifs.

Emplacement

Le cadre de traction Z est inséré dans les douilles de la potence au niveau de l'extrémité tête du lit et dans les douilles accessoires des butoirs d'angle au niveau de l'extrémité pied du lit s'il s'agit du lit Essenza 400 avec butoirs d'angle et douilles accessoires.

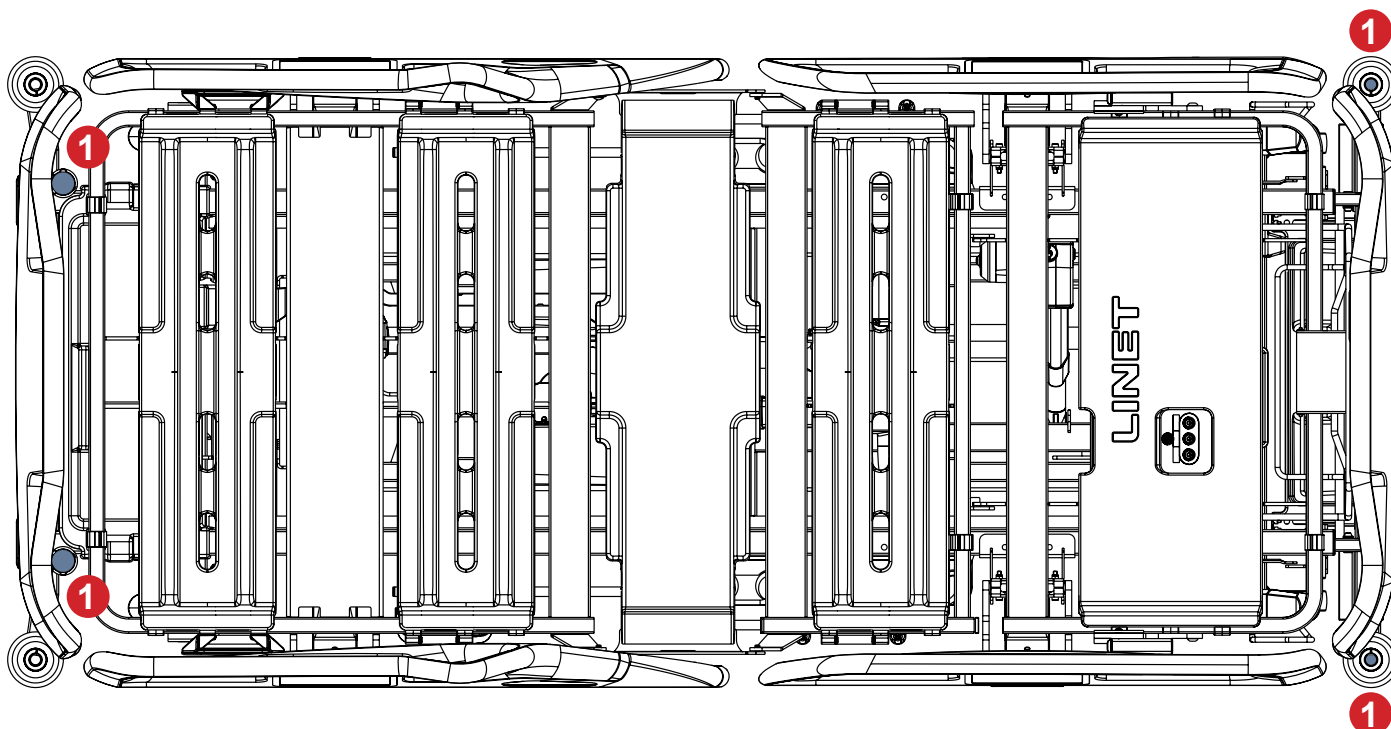


Fig. Positions du cadre de traction Z (1) s'il s'agit d'un lit avec butoirs d'angle avec douilles accessoires

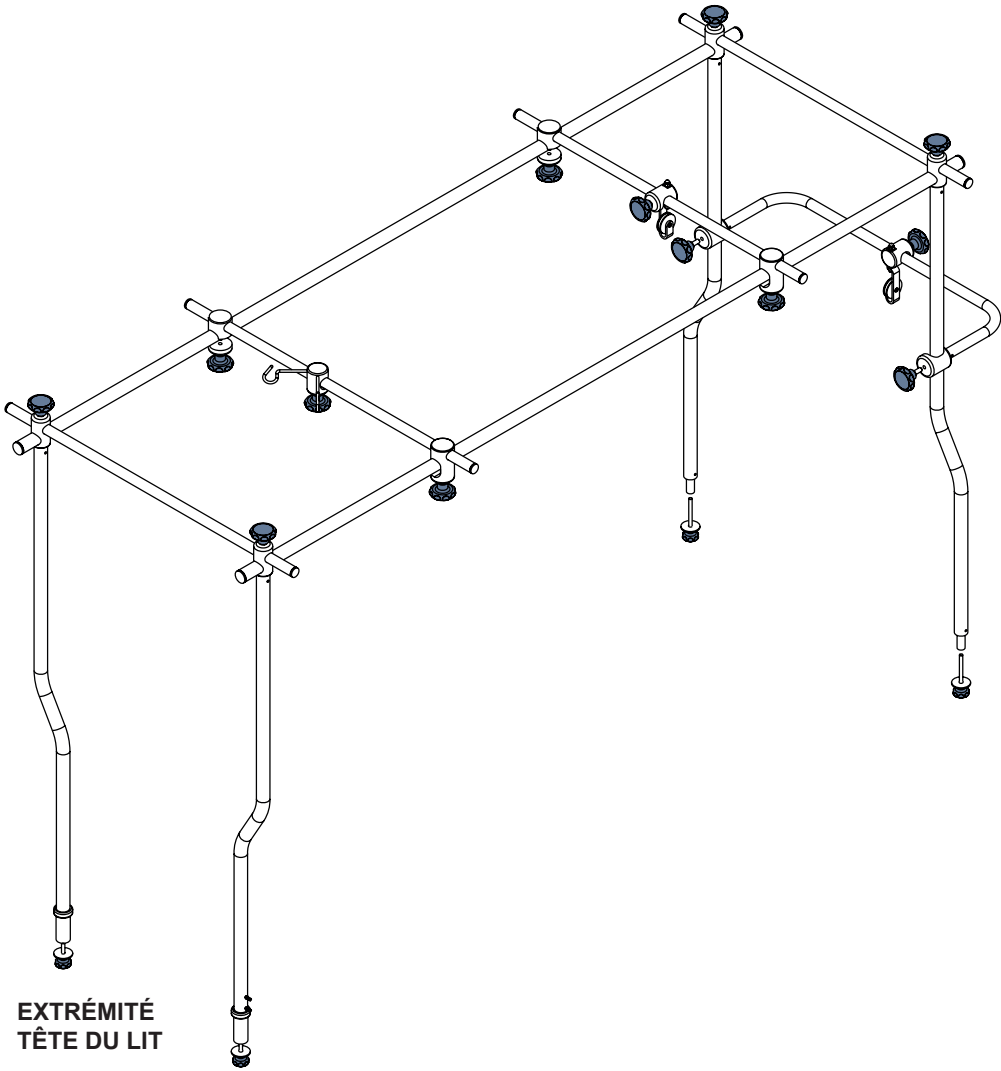


Fig. Cadre de traction Z

4.24 Lampe de lecture



ATTENTION !

Toujours lire les instructions d'utilisation de la lampe de lecture (série 8) avant d'utiliser ce produit !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- Le patient est autorisé à utiliser la lampe de lecture uniquement si le personnel hospitalier a évalué que son état physique et psychique le lui permettait et uniquement si le personnel hospitalier a formé le patient conformément au mode d'emploi ! Le personnel hospitalier est chargé de brancher la lampe de lecture sur le secteur.
- Ne jamais couvrir la lampe de lecture !
- Ne jamais regarder directement la lumière ! La lumière vive peut endommager les yeux.
- Ne pas utiliser de substances explosives ou inflammables à proximité de la lampe de lecture afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion ! Veiller à ce que le haut de la lampe de lecture soit éloigné d'au moins 15 cm de tout objet !



AVERTISSEMENT !

Risque de dommages matériels en cas de mauvais placement du câble d'alimentation !

- Le personnel hospitalier est chargé de faire passer le câble d'alimentation de la lampe de lecture entre le panneau tête du lit et la barrière. Ne pas placer le câble d'alimentation sous le panneau tête lit ou au-dessus du panneau tête du lit ! Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas écrasé par la barrière ni par des parties du sommier !

La lampe de lecture est destinée aux patients pour leur permettre de lire au lit.
La lampe de lecture doit être placée dans les adaptateurs pour accessoires du châssis bas ou dans les douilles à l'extrémité tête du sommier.

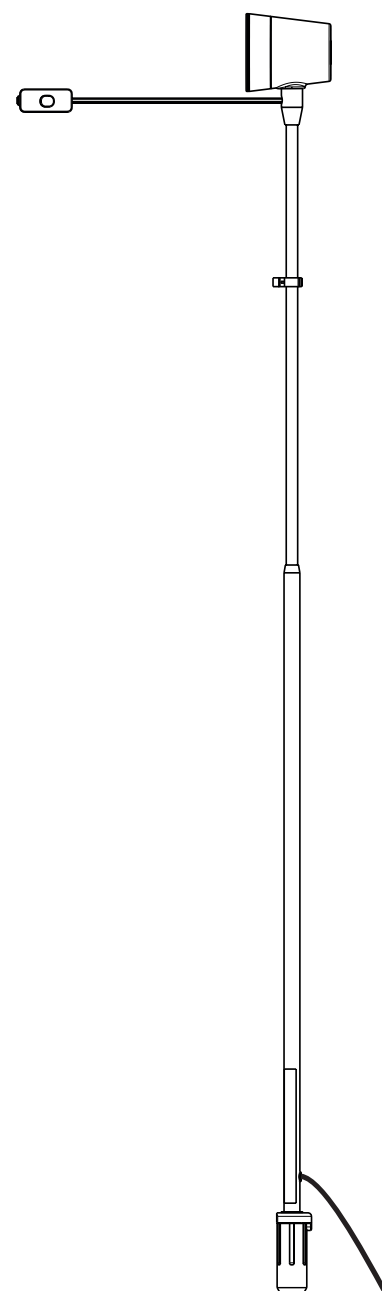


Fig. Lampe de lecture

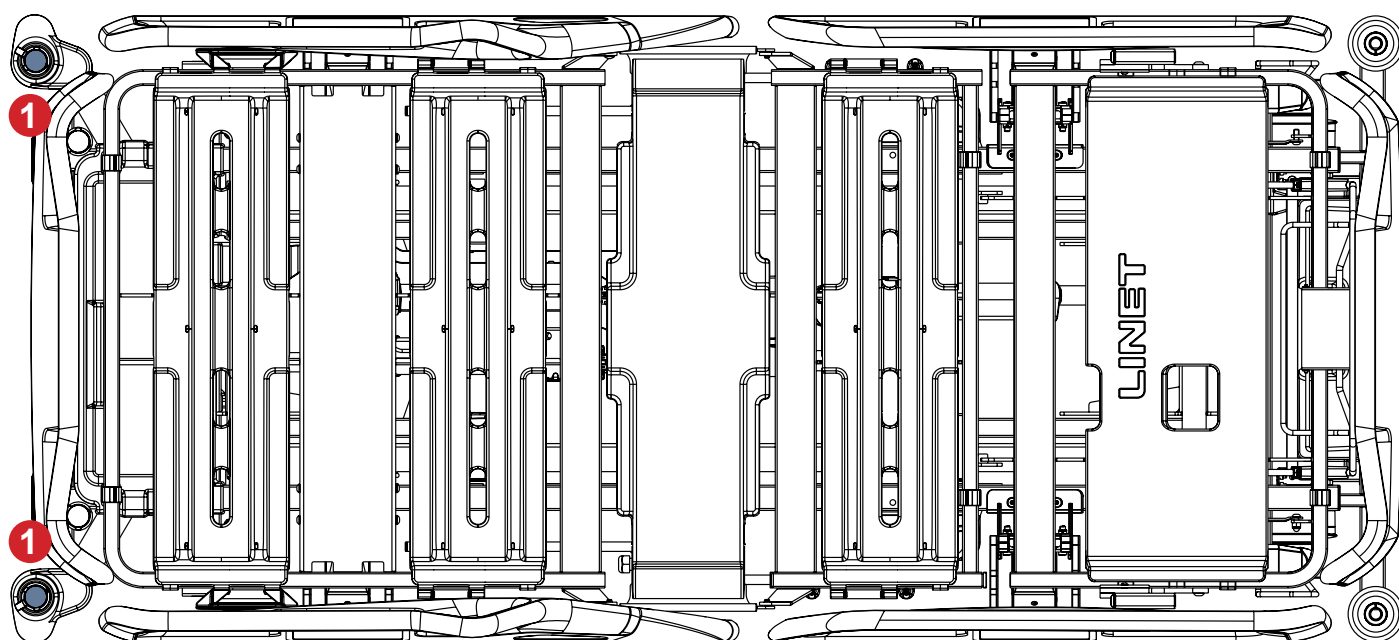


Fig. Adaptateurs pour accessoires pour la lampe de lecture (1) dans le châssis bas du lit

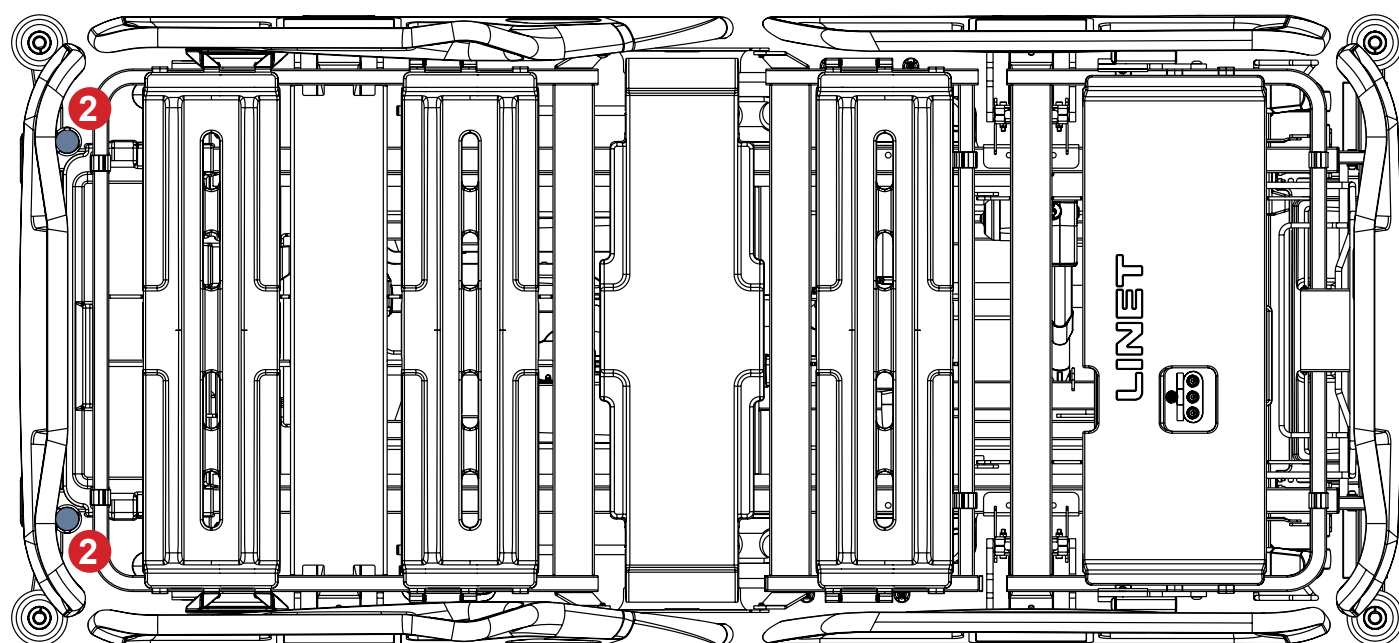


Fig. Douilles pour lampe de lecture (2) à l'extrémité tête du sommier

4.25 Support de cadre de traction D pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité



ATTENTION !

Lire le mode d'emploi du cadre de traction D avant d'utiliser ce produit !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- Ne pas transporter le lit équipé du cadre de traction D, qu'un patient soit présent ou non !
- Ne pas régler la déclive inversée lorsque le lit est équipé du support de cadre de traction D !
- Veiller à ce que le panneau pied du lit soit fixé dans la position de rallonge sélectionnée afin d'éviter tout risque de mouvement involontaire du panneau pied !
- Veiller à ce que les fonctions de positionnement soient verrouillées pour ne pas être utilisées par un patient dans le lit avec le cadre de traction D en place !
- Retirer le cadre de traction D et le support du cadre du lit si vous n'en avez pas besoin pour le traitement !
- Vérifier régulièrement les points de fixation du cadre de traction D et du support du cadre. Les vis rosette doivent être fixées dans les emplacements prévus !

Le support du cadre de traction D pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité est destiné à placer correctement le cadre de traction D sur le lit Essenza 400 avec butoirs d'angle et douilles accessoires.

Le support du cadre de traction D pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité est inséré dans les douilles accessoires des butoirs d'angle côté pied du lit.

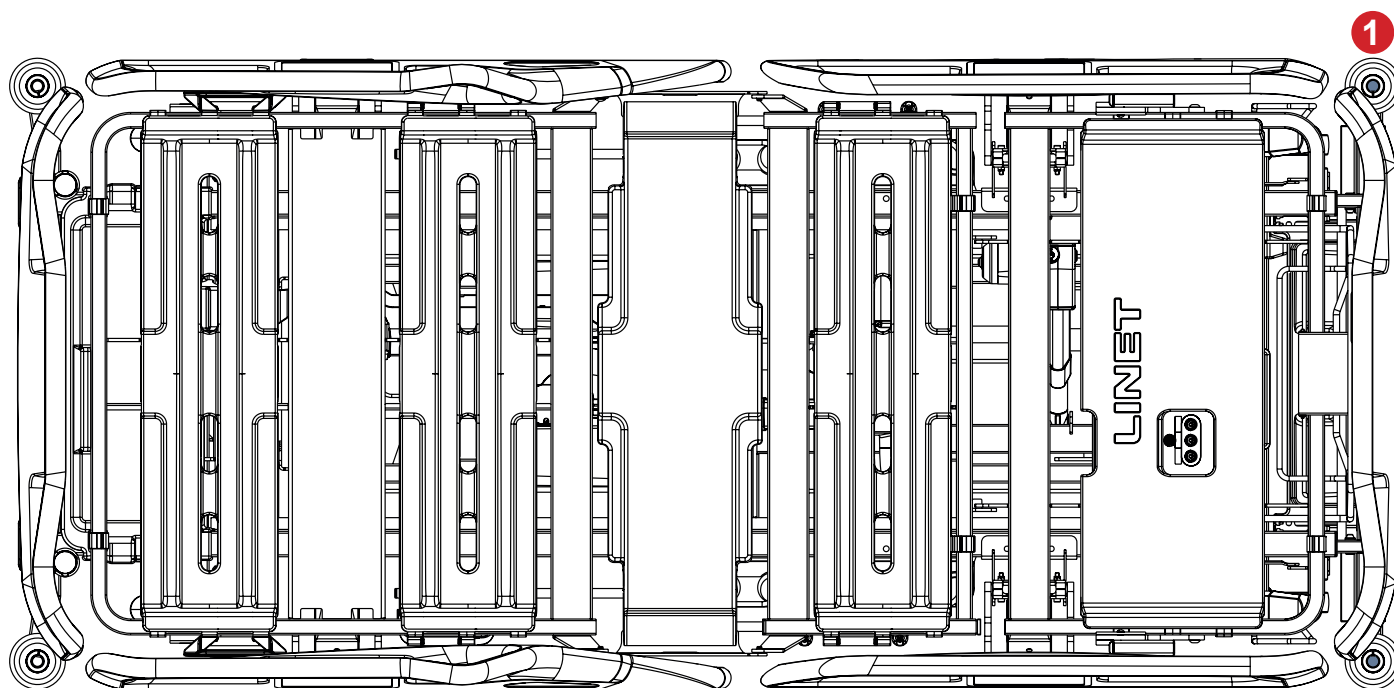


Fig. Positions du support du cadre de traction D pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité
(1) sur le lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires

Pour placer le support du cadre de traction D sur un lit Essenza 400 compatible :

- Veiller à ce que le support du cadre de traction D soit correctement orienté de manière à ce que les deux barres horizontales soient accessibles depuis le côté extérieur de l'extrémité pied du lit.
- Insérer les deux goupilles du support du cadre de traction D dans les butoirs d'angle avec douilles accessoires côté pied du lit.
- Serrer les deux vis rosette pour fixer les goupilles.

Le support du cadre de traction D correctement installé est incliné vers l'extérieur du côté pied du lit.

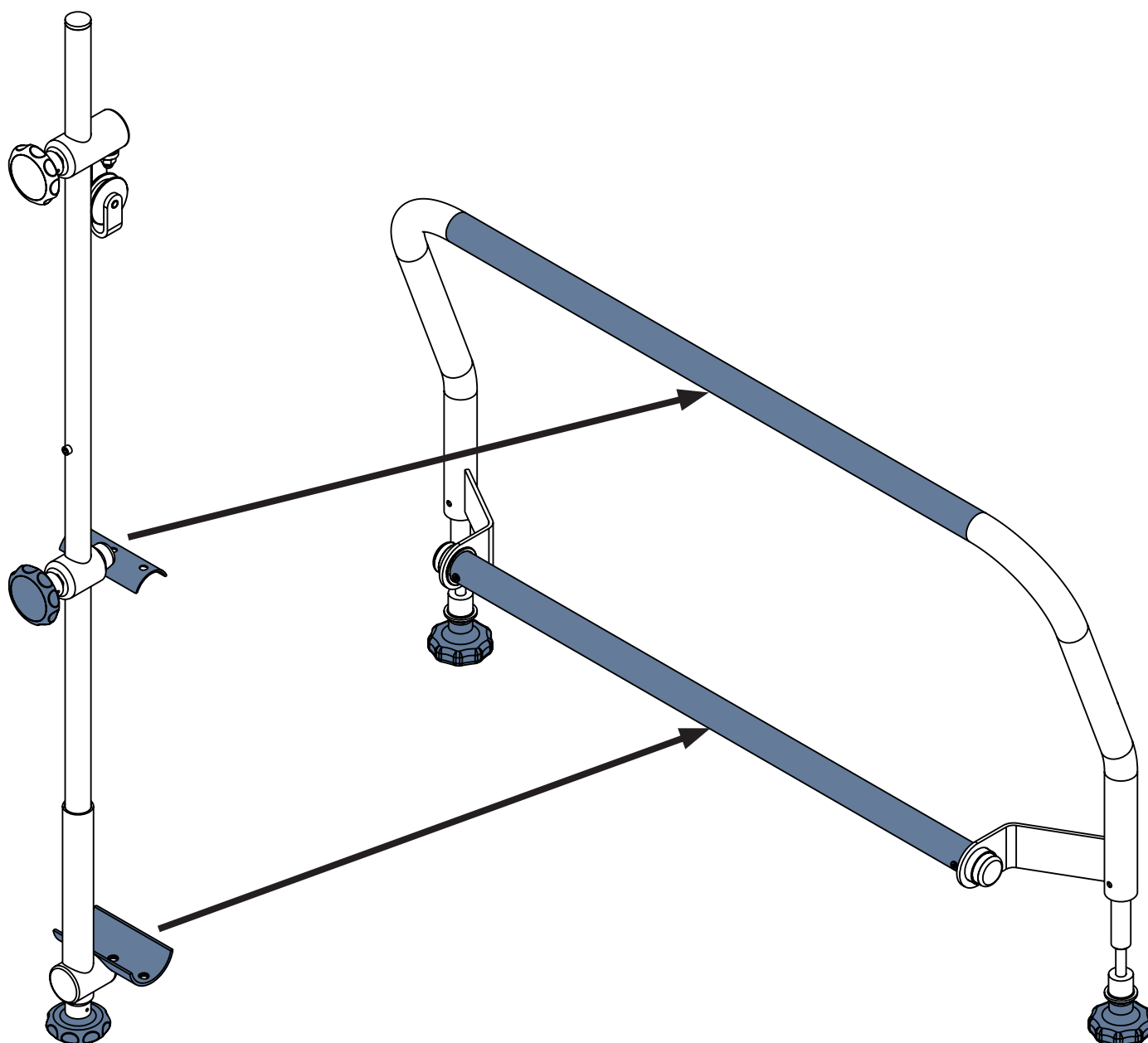


Fig. Mise en place du cadre de traction D sur son support pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité

Pour placer le cadre de traction D sur le support du cadre de traction D :

- ▶ Desserrer la vis rosette inférieure du cadre de traction D.
- ▶ Fixer la partie inférieure du cadre de traction D à la barre horizontale inférieure du support du cadre à l'aide de la vis rosette inférieure du cadre de traction D.
- ▶ Desserrer la vis rosette supérieure du cadre de traction D.
- ▶ Fixer la partie supérieure du cadre de traction D à la barre horizontale supérieure du support du cadre à l'aide de la vis rosette supérieure du cadre de traction D.
- ▶ S'assurer que la position choisie pour le cadre de traction D est conforme au soutien prévu pour le patient.

4.26 Cadre de traction T73



ATTENTION !

Lire le mode d'emploi du cadre de traction T73 avant d'utiliser ce produit !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ Aucun patient ne doit être alité lors de l'installation du cadre de traction T73 !
- ▶ Éviter les collisions entre le cadre de traction T73 et le lit (panneau pied et relève-buste) lors du positionnement du lit !
- ▶ Éviter les collisions entre le cadre de traction T73 et les autres accessoires du lit !
- ▶ Ne pas transporter le lit équipé du cadre de traction T73, qu'un patient soit présent ou non !
- ▶ Ne pas régler la latéralisation lorsque le lit est équipé du cadre de traction T73 !
- ▶ Ne régler la rallonge du lit qu'avant de placer le cadre de traction T73 dans le lit !
- ▶ Veiller à ce que les fonctions de positionnement soient verrouillées pour ne pas être utilisées par un patient dans le lit avec le cadre de traction T73 en place !
- ▶ Respecter la charge de fonctionnement en sécurité du lit, du cadre de traction T73 et de ses crochets, poulies ou poignées !
- ▶ Retirer le cadre de traction T73 du lit s'il n'est pas nécessaire pour le traitement !
- ▶ S'assurer que les nœuds de fixation du cadre de traction T73 sont correctement sécurisés dans les positions prévues et procéder régulièrement à cette vérification !

Utilisation prévue

Le cadre de traction T73 est une structure de soutien destinée à la fixation, à la traction et au soulagement des membres, de la colonne vertébrale et du bassin.

Le cadre de traction T73 est destiné aux services d'orthopédie, de chirurgie, de traumatologie et aux soins intensifs.

Emplacement

Le cadre de traction T73 est inséré dans les douilles de la potence au niveau de l'extrémité tête du lit et dans les douilles accessoires des butoirs d'angle au niveau de l'extrémité pied du lit Essenza 400 avec butoirs d'angle et douilles accessoires.

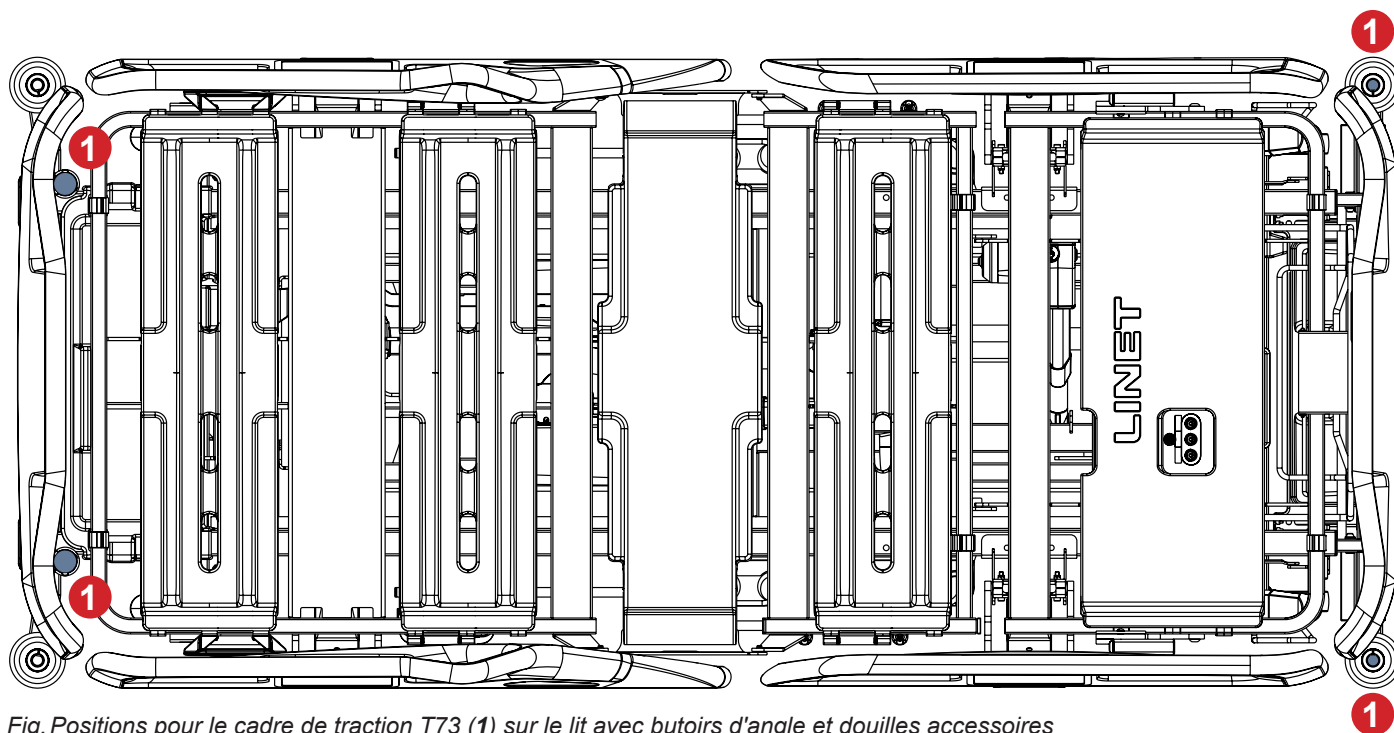


Fig. Positions pour le cadre de traction T73 (1) sur le lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires

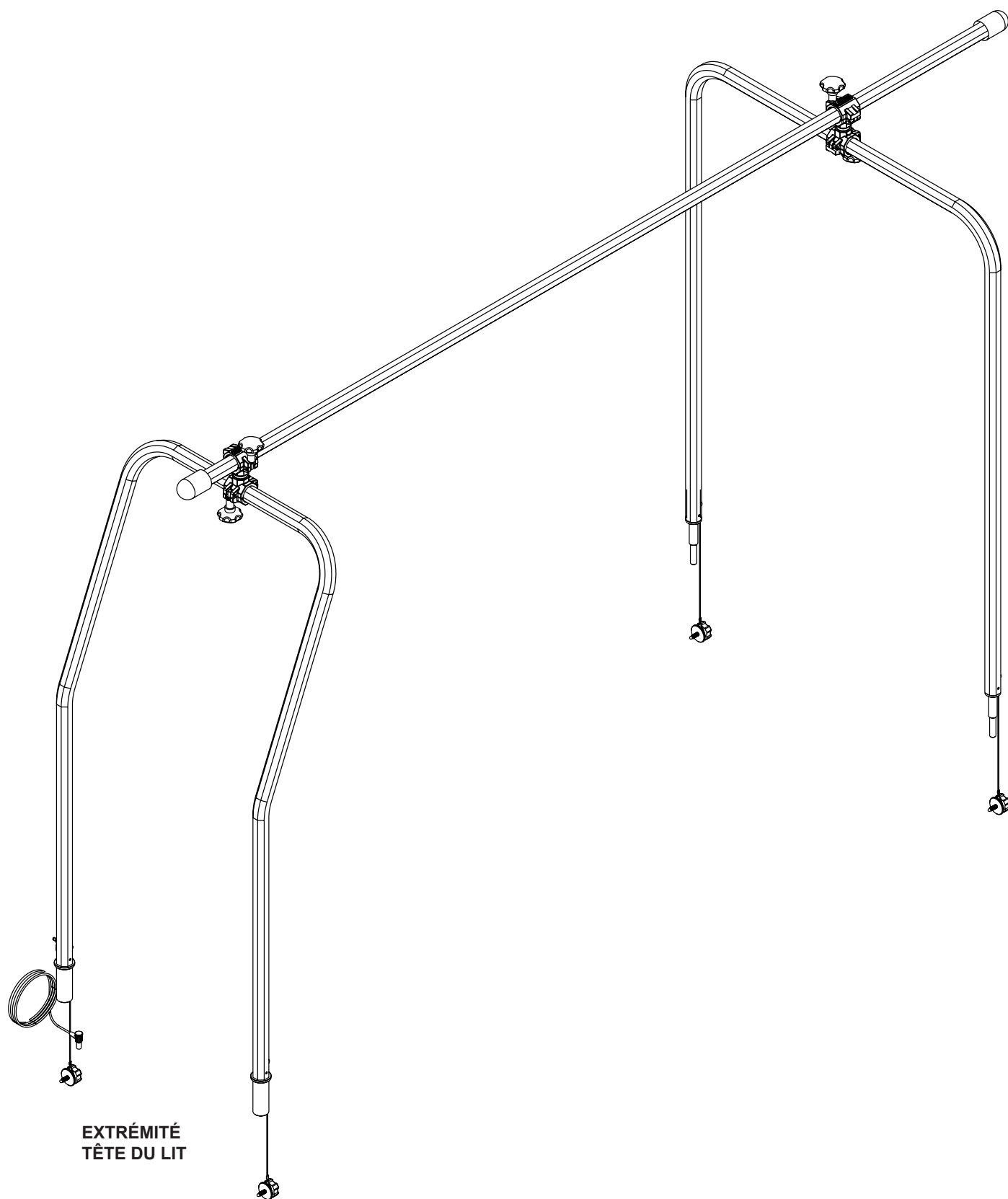


Fig. Cadre de traction T73

4.27 Cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité



ATTENTION !

Lire le mode d'emploi du cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage (MP Essenza 300 S0002789 - Partial assembling) avant d'utiliser ce produit !



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- ▶ Éviter les collisions entre le cadre de traction partiel MP et les autres accessoires du lit !
- ▶ Ne pas transporter le lit équipé du cadre de traction partiel MP, qu'un patient soit présent ou non !
- ▶ Ne pas régler la latéralisation lorsque le lit est équipé du cadre de traction partiel MP !
- ▶ Ne régler la rallonge du lit qu'avant de placer le cadre de traction partiel MP dans le lit !
- ▶ Veiller à ce que les fonctions de positionnement soient verrouillées pour ne pas être utilisées par un patient dans le lit avec le cadre de traction partiel MP en place !
- ▶ Respecter la charge de fonctionnement en sécurité du lit et du cadre de traction partiel MP !
- ▶ Retirer le cadre de traction partiel MP du lit s'il n'est pas nécessaire pour le traitement !
- ▶ S'assurer que les points de fixation du cadre de traction partiel MP sont fixés dans les positions prévues et procéder régulièrement à cette vérification !

Utilisation prévue

Le cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité est une structure de soutien destinée à la fixation, à la traction et au soulagement des membres, de la colonne vertébrale et du bassin.

Le cadre de traction partiel MP pour panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité est destiné aux services d'orthopédie, de chirurgie, de traumatologie et aux unités de soins intensifs.

Emplacement

Le cadre de traction partiel MP pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité est inséré dans les douilles accessoires des butoirs d'angle à l'extrémité pied du lit Essenza 400 avec butoirs d'angle et douilles accessoires.


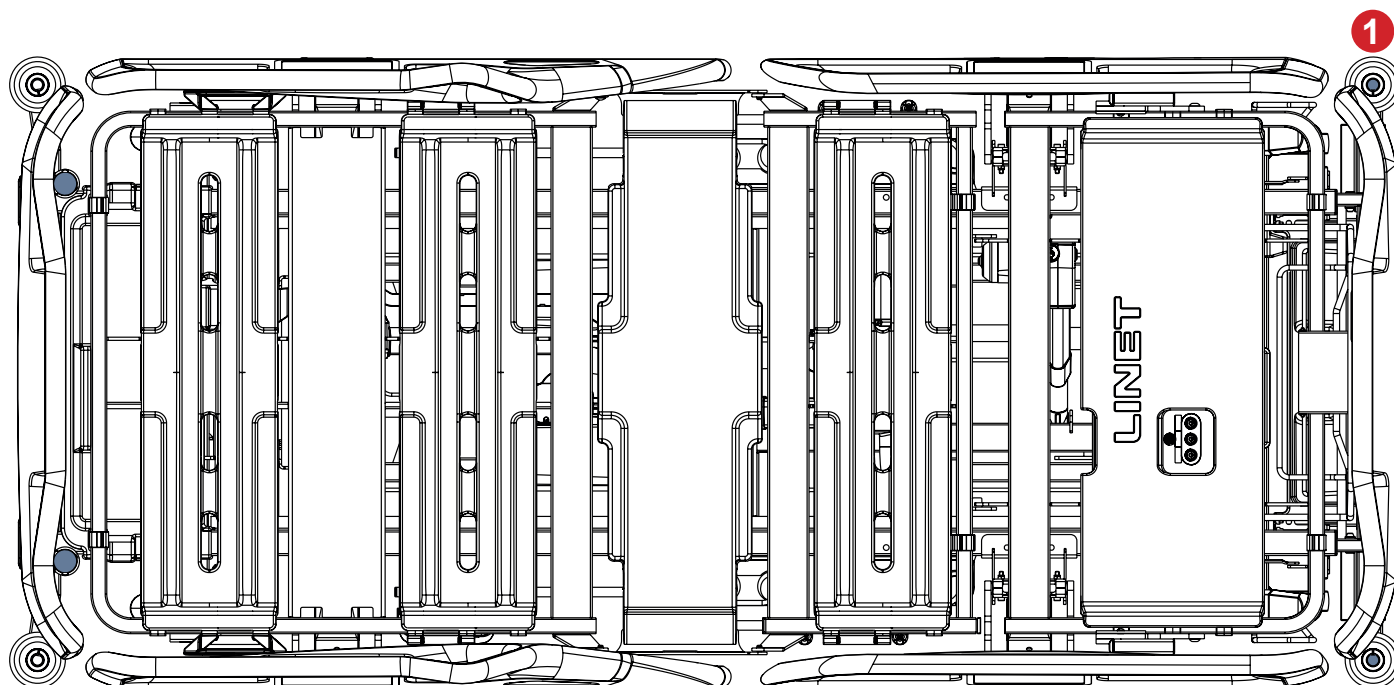


Fig. Positions pour le cadre de traction partiel MP pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité (1) sur le lit avec butoirs d'angle et douilles accessoires

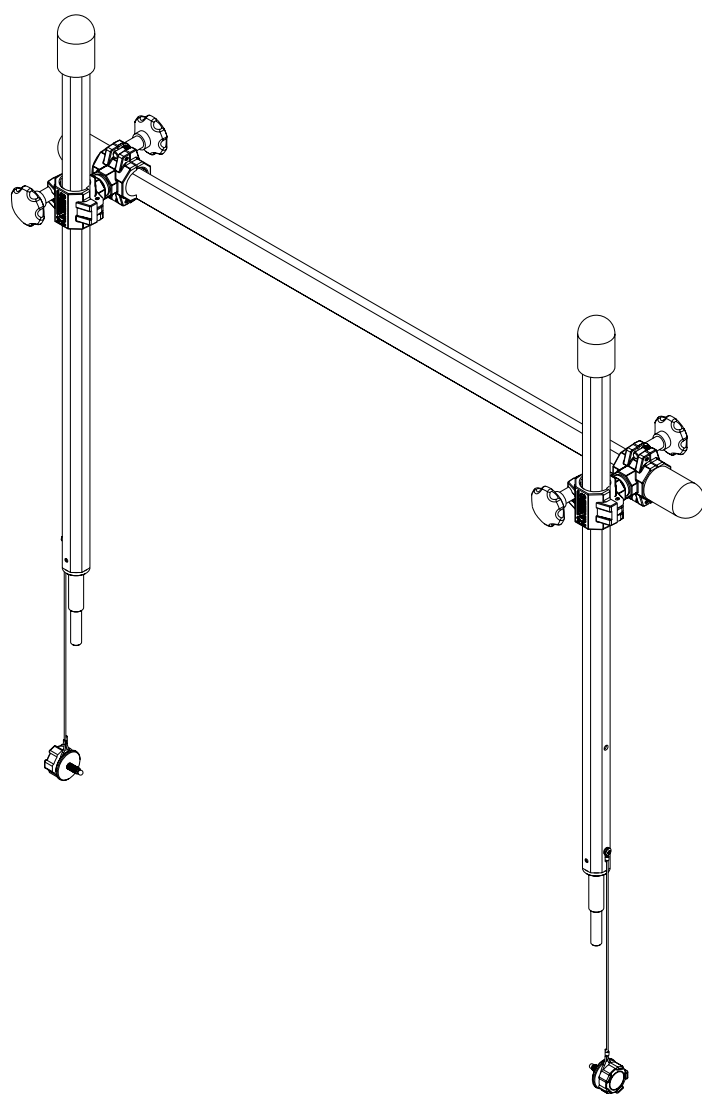

Pour placer le cadre de traction partiel MP pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité à l'extrémité pied du lit :

- Veiller à ce que le cadre de traction partiel MP soit correctement orienté, de sorte que la barre horizontale soit fixée avant les deux barres verticales sur le côté extérieur de l'extrémité pied du lit.
- Insérer les deux goupilles du cadre de traction partiel MP dans les butoirs d'angle avec les douilles accessoires à l'extrémité pied du lit.
- Serrer les deux vis rosette pour fixer les goupilles.

Fig. Cadre de traction partiel MP pour le panneau pied avec un mécanisme de verrouillage de sécurité

4.28 Porte-pompe Cross Infusion Pump Holder



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- S'assurer que les nœuds de fixation du porte-pompe Cross Infusion Pump Holder sont correctement sécurisés dans les positions prévues et procédez régulièrement à cette vérification !
- Éviter les collisions entre le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder et les autres accessoires du lit !
- Ne pas trop serrer les pinces de serrage de la pompe à perfusion pendant le montage. Un serrage excessif peut endommager le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder.
- La pompe à perfusion ne peut être utilisée que si le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder est fixé dans une douille côté tête du sommier et que la pompe à perfusion est correctement fixée au porte-pompe Cross Infusion Pump Holder.
- Ne pas utiliser le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder pour conduire ou pousser le lit pendant le transport.
- S'assurer que le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder n'entre pas en collision avec les parties mobiles du lit (en particulier le relève-buste) ou avec le patient. Ceci doit être vérifié lors de l'installation.

La porte-pompe Cross Infusion Pump Holder est destiné à recevoir une pompe à perfusion compatible.

La porte-pompe Cross Infusion Pump Holder doit être placé dans une douille pour potence côté tête du lit.

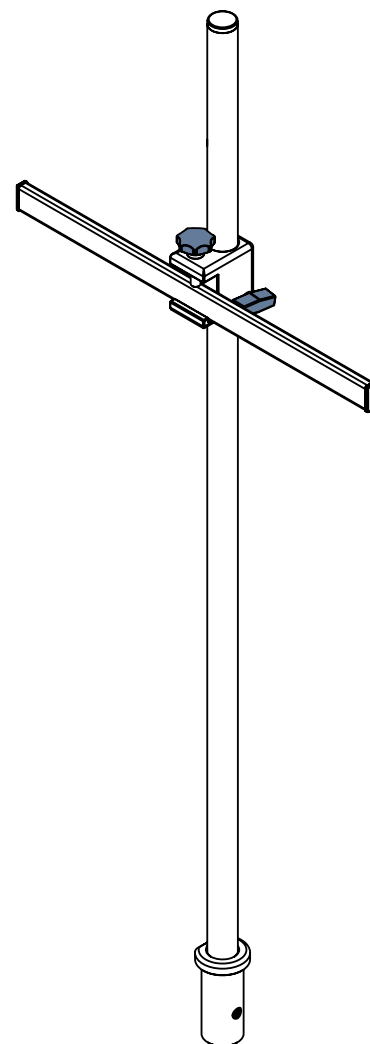


Fig. Porte-pompe Cross Infusion Pump Holder

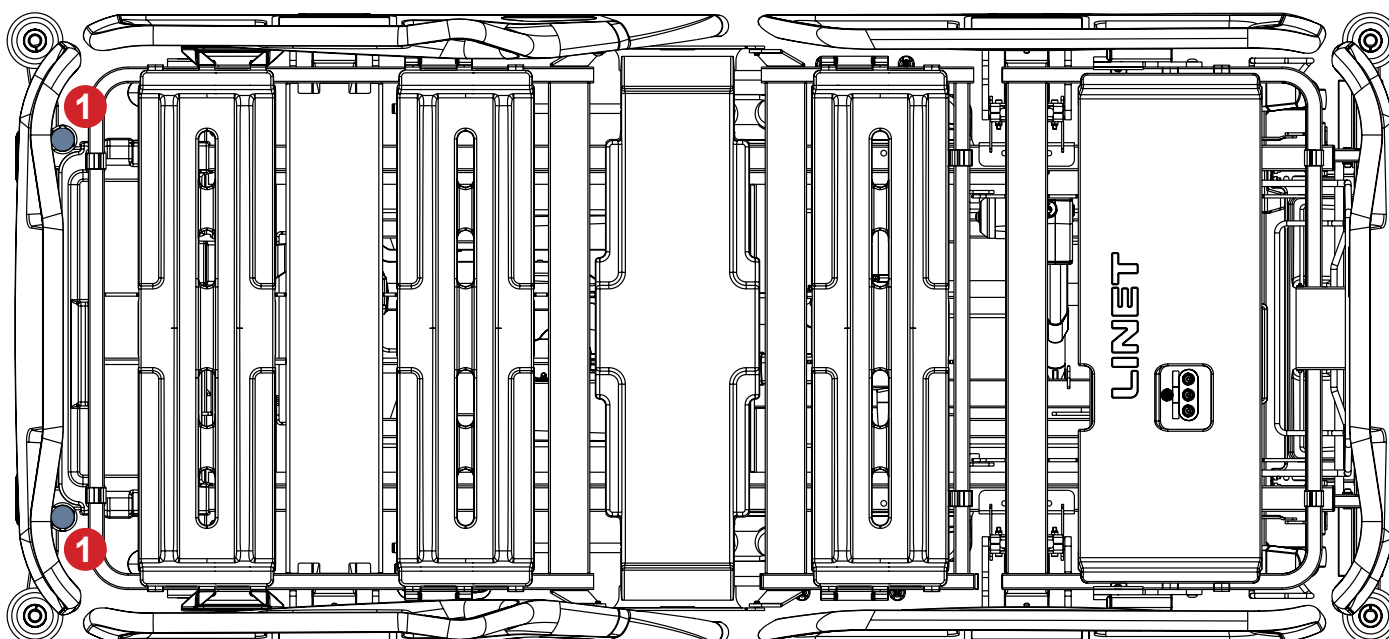


Fig. Douilles pour le porte-pompe Cross Infusion Pump Holder (1)

4.29 Support intubation



ATTENTION !

Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation !

- S'assurer que les points de fixation du support intubation sont fixés dans les positions prévues et procéder régulièrement à cette vérification !

Utilisation prévue

Le support intubation empêche l'extubation du patient connecté au ventilateur.

Emplacement

Le support intubation ne peut être placé dans l'angle du cadre du relève-buste que si le lit Essenza 400 est équipé de supports compatibles.

Pour placer correctement le support intubation sur cadre du relève-buste :

- S'assurer que la barrière de tête est en position haute.
- Placer le support intubation dans le support compatible sur le côté droit ou gauche du cadre du relève-buste.
- Fixer le support intubation sur sa partie inférieure à l'aide d'une vis rosette.
- Passer la sonde d'intubation à travers la tête en plastique du support intubation.
- Incliner le sommier pour vérifier que la sonde d'intubation est bien fixée. Aucun élément ne doit se détacher.

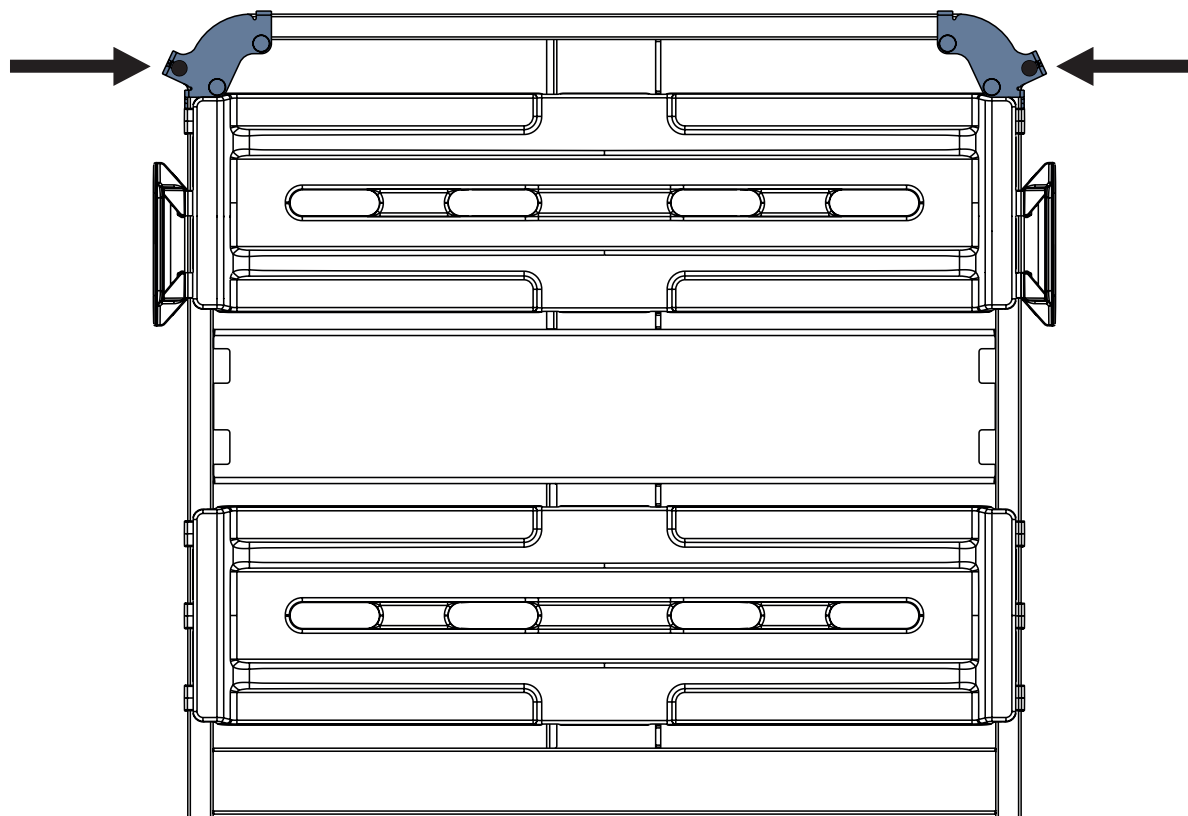


Fig. Relève-buste standard avec supports compatibles pour support intubation

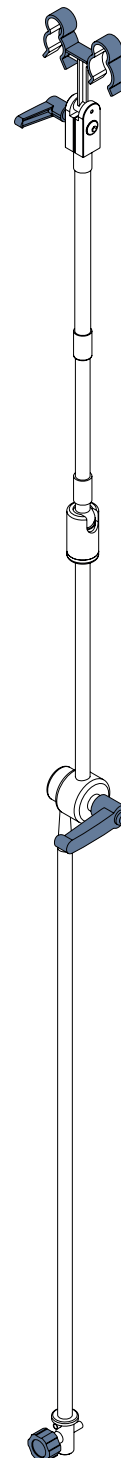


Fig. Support intubation
4MAS25012800

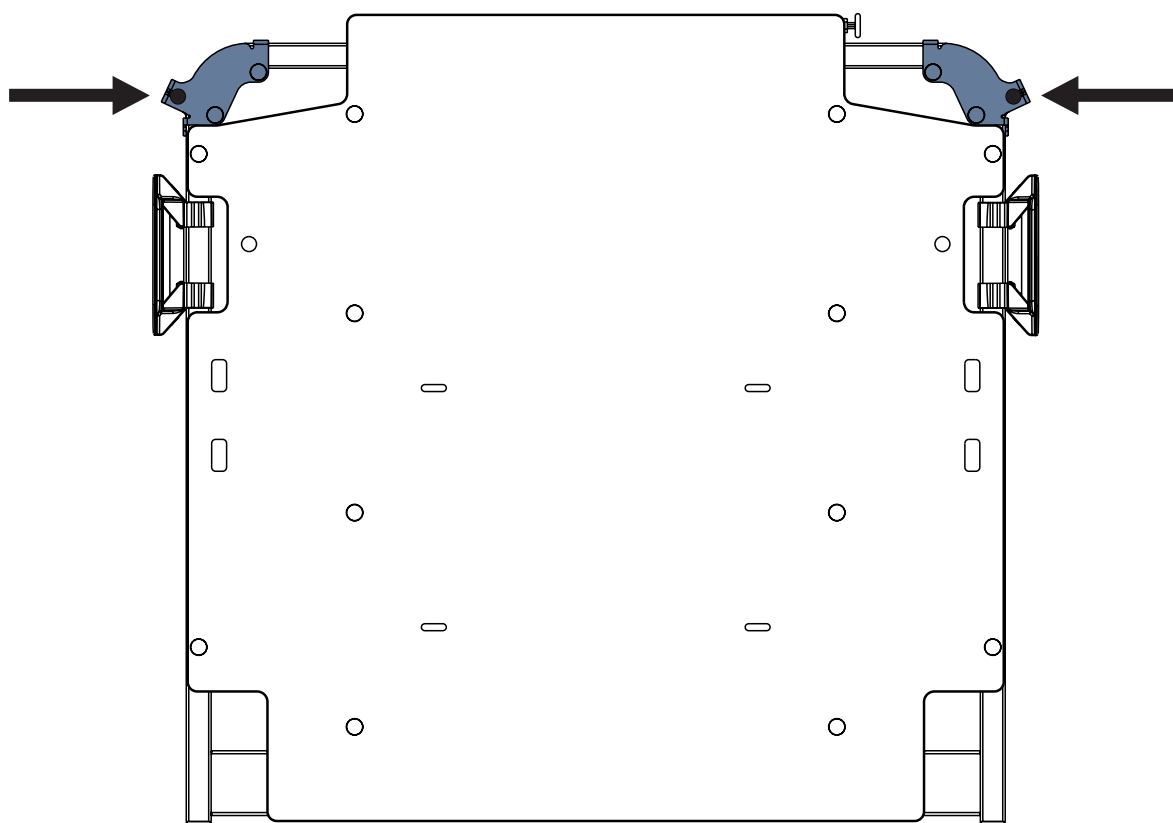


Fig. Relève-buste pouvant passer aux rayons X avec supports compatibles pour support intubation

5 Élimination

5.1 Protection de l'environnement

Chez LINET®, nous réalisons l'importance de protéger l'environnement pour les générations futures. Au sein de la société LINET®, nous appliquons un système de gestion de l'environnement qui est conforme à la norme internationale ISO 14001. La conformité à cette norme est vérifiée chaque année par un audit externe réalisé par un organisme agréé. Sur la base de la directive **WEEE** – Déchets d'équipements électriques et électroniques, la société LINET, s. r. o. est enregistrée dans la liste des producteurs d'équipements électriques et électroniques (**Seznam výrobců elektrozařízení**) du ministère de l'Environnement de la République tchèque (Ministerstvo životního prostředí).

Les matériaux utilisés dans ce produit et dans les accessoires LINET® ne sont pas dangereux pour l'environnement. Les produits LINET® et les accessoires LINET® répondent aux exigences valides de la législation nationale et européenne dans les domaines de **RoHS** et **REACH**, ils ne contiennent donc aucune substance interdite en quantité excessive. Aucune des pièces en bois n'est fabriquée en bois tropical (comme l'acajou, le bois de rose, l'ébène, le teck etc.) ou en bois provenant de la région amazonienne ou de forêts tropicales similaires. Le bruit du produit (niveau de pression acoustique) répond aux exigences de la réglementation relative à la protection de la santé publique contre les effets indésirables du bruit et des vibrations dans les espaces intérieurs protégés des bâtiments. Les matériaux d'emballage utilisés sont conformes aux exigences de la loi sur les emballages (**Zákon o obalech**). En ce qui concerne l'élimination des matériaux d'emballage après l'installation des produits, contactez votre représentant commercial ou le service client du fabricant pour connaître la possibilité d'une reprise gratuite des emballages par une entreprise agréée (pour plus de détails, voir www.linnet.cz).

5.2 Élimination

Les matériaux utilisés dans ce produit et dans les accessoires LINET® sont nocifs pour l'environnement, mais l'ensemble de ces matériaux peut être réutilisé et recyclé de manière très efficace. Il convient d'effectuer le démontage mécanique du produit et le tri des matériaux en fonction des types de déchets de base (plastique, métal, bois) à la fin de vie du produit. Le principal objectif des obligations précisées dans la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques est d'augmenter la réutilisation, la récupération des matériaux et la valorisation des équipements électriques et électroniques au niveau requis, en évitant ainsi la production de déchets et en évitant les éventuels effets nocifs des substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques sur la santé humaine et l'environnement. Les équipements électriques et électroniques LINET® qui ont une batterie ou un accumulateur intégré et les accessoires LINET® sont conçus de telle manière que les batteries ou accumulateurs usagés puissent être retirés en toute sécurité par des techniciens qualifiés LINET®. Il existe une information sur son type sur la batterie ou l'accumulateur intégré.

5.2.1 En Europe

Pour mettre au rebut les équipements électriques et électroniques, y compris les accessoires LINET® :

- ▶ L'équipement électrique et électronique ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- ▶ Mettre cet équipement au rebut dans les points de collecte ou de reprise désignés.
- ▶ Mettre le produit, ses composants ou ses accessoires au rebut conformément aux lois et réglementations locales !
- ▶ Faire appel à une entreprise agréée pour l'élimination des déchets !

Pour éliminer les autres équipements, y compris les accessoires LINET® :

- ▶ L'équipement ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager.
- ▶ Mettre cet équipement au rebut dans les points de collecte ou de reprise désignés.

LINET® participe à un système collectif avec la société de reprise REMA System. En apportant vos équipements électriques et électroniques à un point de reprise, vous participez au recyclage et vous économisez les ressources primaires en matières premières tout en protégeant votre environnement des effets d'une élimination non professionnelle.

5.2.2 Hors Europe

- ▶ Mettre le produit, ses composants ou ses accessoires au rebut conformément aux lois et réglementations locales !
- ▶ Faire appel à une entreprise agréée pour l'élimination des déchets !