

# SPRINT 100

**LINET**

Le brancard



Brancard de transport

# SPRINT 100


Le brancard



## CONÇU POUR UN TRANSPORT ERGONOMIQUE



**IV&Drive®** permet de déplacer le brancard depuis n'importe quelle hauteur sans compromettre la posture ergonomique.<sup>1</sup>

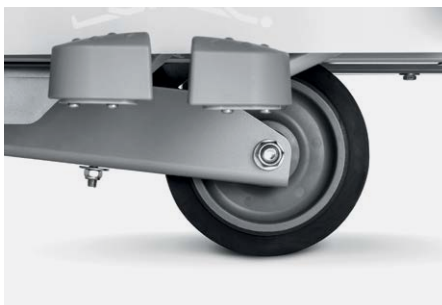

**FlexiDrive®** facilite les manœuvres pour les soignants et réduit la force de poussée initiale de 77%.<sup>1</sup>



Les **poignées ergonomiques** sont repliables pour faciliter l'accès au patient.

## SÉCURITÉ ÉPROUVÉE POUR LES SOINS



**EasyBrake®** garantit un freinage sans effort pour les soignants, depuis les quatre côtés du lit.



Les **barrières SoftDrop** s'abaissent en douceur, délicatement et silencieusement.



**Nettoyage facile** grâce à une conception épurée des colonnes, des surfaces lisses et un châssis facilement accessible.

## CONFORT CENTRÉ SUR LE PATIENT, DÈS LA CONCEPTION



**Positionnement en 4 parties** permettant des ajustements simples, y compris la position de chaise cardiaque.



**Plan de couchage large** garantissant le confort de tous les patients et un nettoyage aisé pour le contrôle des infections.



**Matelas standard 5"** avec technologie antidérapante réduisant le risque de glissement du patient.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## SPRINT 100

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Charge de fonctionnement en sécurité                           | 320 kg                |
| Poids maximal du patient                                       | 280 kg                |
| Poids moyen du brancard                                        | 120 kg                |
| Angle max. du relève-buste / relève-cuisses / relève-jambes    | 90°/ 40°/ 20,5°       |
| Proclive / Déclive                                             | +18°/-18°             |
| Dimensions hors-tout en position standard (longueur × largeur) | 211 cm × 76 cm, 86 cm |
| Dimensions du plan de couchage                                 | 55.5 cm – 88 cm       |
| Diamètre des roues                                             | 20 cm                 |
| Garde au sol                                                   | 10,7 cm               |



## RÉFÉRENCES

1. LINET White paper. 2025 Best practice for patient transport in Sprint 200 for reducing WRMSDs.



**LINET**

Members of LINET Group

LINET France  
7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | France  
tel. : +33 2 47 80 31 80 | fax : +33 2 47 80 31 81 | e-mail : [info@linet.fr](mailto:info@linet.fr) | [www.linet.fr](http://www.linet.fr)

