



PŘEHLED SORTIMENTU

Zdravotnictví

LINET

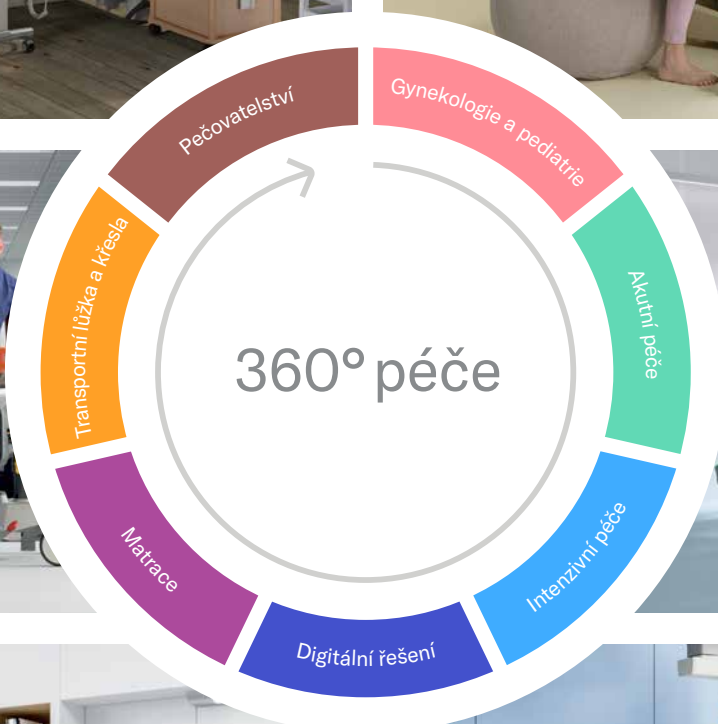

PŘEHLED SORTIMENTU ZDRAVOTNICTVÍ

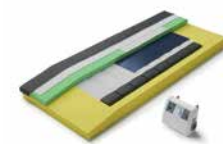Gynekologie a pediatrie	Akutní péče		Intenzivní péče	Matrace	Transportní lůžka a křesla	Digitální řešení	Stolky k lůžku	
								
TOM 2	AVE2	ELEGANZA 2	ESSENZA	MULTICARE X	AKTIVNÍ MATRACE	SPRINT 100 SPRINT 200	SAFESENSE 3	ELEGANZA STOLKY
								
ELEGANZA 2 JUNIOR KIT	GRACIE	ELEGANZA 1	PRAKTIKA 1 PRAKTIKA 2	ELEGANZA 5	HYBRIDNÍ MATRACE	PURA	SMARTTRACK	SOLIDO
								
	GRACIELLA			ELEGANZA 4	PASIVNÍ MATRACE	SELLA		

AVE2

Porodní lůžko

Gynekologie
a pediatrie



Porodní lůžko AVE2 nabízí kompletní péči od vstupu do nemocnice až po samotný porod. Na lůžku je možné provádět gynekologická vyšetření, ultrazvuk, monitorování CTG a perineální zákroky.



Výsuvný podnožní díl s otočným mechanismem pro snadné a rychlé zasunutí. Zůstává připojený k lůžku a nemusí se skladovat mimo něj. Výhodou je omezení rizika vzniku infekcí a rovněž prevence poranění zad personálu.



Koncept pevných nožních opěrek umožňuje zdravotnickému personálu velmi rychle a efektivně reagovat na různé situace, které mohou během porodu nastat.



Hygiena je zvýšena díky koženě odolné proti bakteriím, bezešvému čalounění a odděleným částem, které zjednodušují údržbu. Odolnost lůžka je také zaručena elektrostaticky lakovaným epoxidovým nátěrem, který poskytuje ochranu proti korozi.



Jemné podsvícení lůžka přispívá k vytvoření komfortního prostředí během porodu.



Koncept OneHand zajišťuje snadné ovládání funkcí lůžka. Jednoduše a rychle můžete ovládat opěrky nohou a lýtek, odklápět postranice a ovládat tlačítka – to vše pomocí jedné ruky.



Postranní madla s integrovaným ovládacím panelem lze v případě potřeby zasunout, například při přesunu rodičky z jednoho lůžka na druhé. Zároveň slouží jako opora při sedání nebo vstávání.



Výjimečná všestrannost lůžka AVE2 umožňuje širokou škálu porodních poloh, zapojení partnera do porodního procesu a vytváří fyziologicky optimální porodní prostředí.



OPTIMÁLNÍ PRACOVISTĚ



Snadné přepínání mezi jednotlivými nastaveními až pro tři lékaře. Ordinaci lékaře lze jednoduše sdílet.



Ultrazvukové vyšetření lze provádět na křesle bez nutnosti přesouvat klientky na jiné místo.



Nástrojový vozík s ergonomickým úložným prostorem je snadno přístupný a přemístitelný.

MODERNÍ VYBAVENÍ



Integrovaný kolposkop bezpečně uložený pod sedadlem a připravený k okamžitému použití.



FULL HD LCD displej a bezdrátový přenos fotografií a videí do počítače lékaře.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



Volba polohy pomocí bezdrátového ovladače a dodatečné nastavení díky nožním a ručním ovladačům.



Rychlé polohování včetně přednastavených tlačítek pro nejčastější užití křesla.



Snadný přístup do křesla i pro méně pohyblivé ženy díky úplnému odstranění opěrek nohou.

GRACIELLA

Gynekologické vyšetřovací křeslo

Gynekologie
a pediatrie



Pomocí **předvolených poloh** si lékař může stiskem jednoho tlačítka nastavit křeslo do dvou nejčastěji používaných pozic.



Variabilita polohování nožních opěrek pro komfort pacientky a potřeby ošetřujícího lékaře.



LED lampa poskytuje optimální viditelnost a komfort při vyšetření pacientky.



Křeslo umožňuje **vyšetření ultrazvukem** bez nutného přesunu pacientky na vyšetřovací lehátko a to díky snadnému nastavení do rovné polohy.



Výsuvné kolečko na podvozku usnadňuje manipulaci s křeslem v prostoru ambulance.



Hygiena bezešvého polstrování je základem unikátního hygienického konceptu křesla Graciella. Materiál je uzpůsoben snadné dekontaminaci běžnými hygienickými prostředky.

TOM 2

Dětské lůžko

Gynekologie
a pediatrie



Teleskopické postranice mají dvě ergonomická madla, která zajišťují mimořádné bezpečné uvolnění postranic.



Snadný přístup je umožněn prostřednictvím malých dvířek integrovaných do postranic, navržených pro praktické použití v pediatrické péči.



Odnímatelná čela lůžka umožňují úplný přístup k pacientovi. Intuitivní a rychle dostupné odemknutí. Panel s vysokou odolností proti poškození.



Elektrické polohování umožňuje nastavit výšku lůžka, náklon zádového dílu a polohy TR/ATR.



Přiložení speciálního **bezpečnostního klíče** ke kontrolnímu panelu zajistí přepnutí do provozního módu.



Sloupová konstrukce je jednou z nejvýraznějších funkcí lůžka a umožňuje nastavení výšky. Zajišťuje dokonalou stabilitu, hygienu a neomezený přístup ke všem částem lůžka.

ESSENZA 300

Adaptabilní nemocniční lůžko

Akutní
péče



NADSTANDARDNÍ ERGONOMIE A BEZPEČÍ DÍKY DESIGNU PŘÍZPŮSOBENÉMU POTŘEBÁM SESTER A PACIENTŮ



Laterální náklon se stává standardem v akutní péči, který snižuje fyzickou zátěž zdravotnického personálu o 67 %.



Nízká výška pomáhá zmírňovat závažnost pádů pacientů.



EasyDrive snižuje potřebnou počáteční tlačnou sílu až o 100 % ve srovnání s lůžkem bez pohonu.



Koncept bezpečné mobilizace podporuje pacienta prostřednictvím speciálně navržených prvků a může pomoci urychlit proces zotavení.

EFEKTIVITA JEDINÉ PLATFORMY UMOŽŇUJÍCÍ NEUVĚŘITELNOU VŠESTRANNOST



Efektivita jediné platformy zajištěná intuitivním uživatelským ovládacím panelem.



Neuvěřitelná všestrannost, která splňuje všechny požadavky jednotlivých oddělení. Promyšlený design je dalším bonusem.

BEZKONKURENČNÍ EFEKTIVITA DÍKY POKROČILÝM TECHNOLOGIÍM



SafeSense 3 asistenční systém pomáhá šetřit čas tím, že umožňuje vzdáleně sledovat bezpečnou polohu pacienta na lůžku nebo upozorňuje, když pacientovi hrozí pád, či dodá informaci o nadměrném nárůstu vlhkosti.



SmartTrack využívající technologii INTRAX® usnadňuje práci sestrám sledováním nemocničního zařízení a pacientů s přesností na úrovni jednotlivých pokojů.



Integrovaná matrace Air2Care umožňuje zdravotnickému personálu časově nenáročnou údržbu.


ELEGANZA 2

Chytré lůžko pro akutní péči

Akutní
péče




Alarm brzdy automaticky upozorní zvukovým signálem na situaci, kdy lůžko zůstane nezabrzdnuté (ale jen tehdy, pokud je zapojený napájecí kabel).

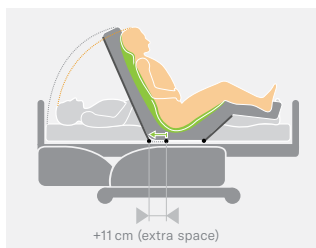

Autoregrese zvětšuje během polohování prostor v pánevní oblasti o 11cm – výsledkem je snížení tlaku a střížných sil.



Podsvícení podvozku lůžka usnadňuje pacientovi noční orientaci v místnosti.

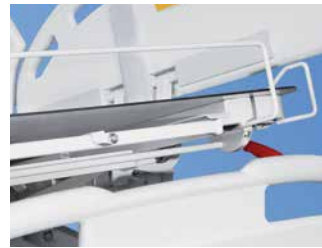

RTG transparentní zádový díl dovoluje rentgenové vyšetření na lůžku bez nutnosti fyzické manipulace s pacientem.



Tlačítko pro přivolání sestry zabudované v postranici umožňuje pacientovi okamžitě přivolat sestru.



Páté kolečko usnadňuje transport lůžka po dlouhých chodbách a udržuje přímý směr.



Junior Kit Eleganza 2 lze využít pro malé pacienty od 90 cm výšky a 4 let věku.

IMAGE 3

Bariatrické lůžko pro akutní péči


Akutní
péče



Systém **Ergoframe** snižuje maximální tlak v oblasti pánve o 16 %.



Páté kolečko usnadňuje transport lůžka po dlouhých chodbách a udržuje přímý směr.

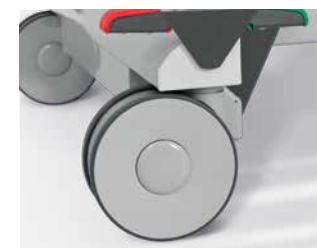

Alarm brzdy automaticky upozorní zvukovým signálem na situaci, kdy lůžko zůstane nezabrzdnuté (ale jen tehdy, pokud je zapojený napájecí kabel).



Vyšší nosnost díky širší ložné ploše, bezpečné pracovní zatížení lůžka se zvýšilo na 320 kg.


ELEGANZA 1

Lůžko pro akutní péči

Akutní
péče



Páté kolečko usnadňuje transport lůžka po dlouhých chodbách a udržuje přímý směr.

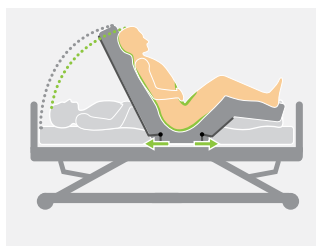

Systém **Ergoframe** snižuje maximální tlak v oblasti pánve o 16 %.



Plastová ložná plocha je tvořena osmi samostatně odnímatelnými díly pro zefektivnění a urychlení hygieny lůžka.



Nožní ovladače umožňují praktické a snadné nastavení výšky lůžka včetně vyšetřovací polohy. Jsou vybaveny mechanickou ochranou proti náhodné aktivaci.


PRAKTIKA 1 & 2

Univerzální mechanicky ovládané nemocniční lůžko

Akutní
péče



Odnímatelné díly ložné plochy s bezpečnostními zámky pro zefektivnění a urychlení hygieny lůžka.

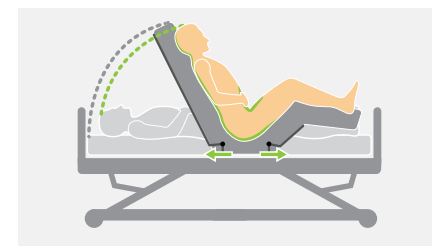

Systém **Ergoframe** snižuje maximální tlak v oblasti pánve o 16 %.



Klikový mechanismus usnadňuje polohování zádového a stehenního dílu, lýtkový díl lze ručním zdvihem nastavit do 5 různých poloh.

MULTICARE X

Prémiové lůžko pro jednotky intenzivní péče

Intenzivní
péče



ODHALTE BENEFITY LATERÁLNÍHO NÁKLONU LOŽNÉ PLOCHY LŮŽKA



Bezpečnější manipulace s pacientem vede ke snížení fyzické zátěže zdravotnického personálu o 67 % a ke snížení rizika MSD.



Postupný laterální náklon po 1° pro jemné a přesné polohování pacienta (mikropolohování).



Jednodušší a hladší přesun pacienta vyžadující, díky laterálnímu náklonu, o 33 % méně fyzické námahy zdravotnického personálu.



Včasná mobilizace pacienta zkracuje jeho pobyt v nemocnici až o 28%, díky laterálnímu náklonu a madlu Mobi-Lift.

ZLEPŠENÍ FUNKCE PLIC



Automatická laterální terapie umožňuje nastavit cykly laterálního náklonu lůžka podle individuálních potřeb pacienta.



Díky kombinaci reverzní Trendelenburgovy polohy a laterálního náklonu lze snadno provádět **posturální drenáž** (hygienu dýchacích cest).



Matrace umožňuje zvolit nastavení určené k podpoře ošetřování v **pronační poloze**, kterou je možné kombinovat s automatickou laterální terapií.

EFEKTIVNOST NEMOCNIČNÍHO PROVOZU



Multiboard X: **Intuitivní nastavení** lůžka i integrované matrace **na jedné obrazovce**.



Plně automatická matrace **OpticareX** umožňuje upravit nastavení stisknutím jediného tlačítka na jedné obrazovce.



Řešení Smart Care pomáhají s administrativou a poskytují přehled o stavu pacienta.

ELEGANZA 5

Lůžko pro intenzivní péči s laterálním náklonem 15°

Intenzivní
péče



Laterální náklon napomáhá snadné manipulaci s pacientem na lůžku. Snižuje fyzickou námahu a minimalizuje riziko poranění zad ošetřujícího personálu.



i-Board jeden ovládací panel pro ošetřující personál s intuitivními a předem zvolenými ovládacími prvky.



i-Drive Power optimalizuje rychlost transportu v různých situacích, čímž snižuje riziko náhodné aktivace nebo nesprávného použití.



Elektrické prodloužení lůžka se přizpůsobí různým výškám pacientů pro větší komfort a umožňuje léčbu kontraktury Achillovy šlachy.



SafetyPort snižuje počet administrativních úkonů a zefektivňuje provoz nemocnice.



RTG transparentní zádový díl umožňuje rentgenové vyšetření na lůžku bez nutnosti fyzické manipulace s pacientem.



Integrovaná váha zobrazuje aktuální hmotnost pacienta a zaznamenává definované hodnoty.



Madlo Mobi-Lift poskytuje oporu při vstávání z lůžka.

ELEGANZA 4

Přizpůsobitelné lůžko pro intenzivní péči

Intenzivní
péče



Uživatelsky přívětivý **ovládací panel** umožňuje nastavení většiny funkcí pro běžné polohování, ale i pro kritické situace stiskem jednoho tlačítka.



Koncept postranic podporuje bezpečnost, zabraňuje pádům a umožňuje použití různých pasivních a aktivních matrací.



Bed exit alarm monitoruje pohyb pacienta na lůžku a případně opuštění lůžka. Může být nastaven ve dvou režimech, podle stavu a mobility pacienta.



Systém **ErgoFrame** snižuje maximální tlak v oblasti pánve o 16 %.



Integrované váhy zajišťují komfortní měření aktuální hmotnosti pacienta, bez dalších rizik spojených s jeho manipulací při přesunu na jiné lůžko.



RTG transparentní zádový díl umožňuje rentgenové vyšetření na lůžku bez nutnosti fyzické manipulace s pacientem.






Alarm brzdy automaticky upozorní zvukovým signálem na situaci, kdy lůžko zůstane nezabrzdnuté (ale jen tehdy, pokud je zapojený napájecí kabel).



Madlo Mobi-Lift poskytuje oporu při vstávání z lůžka.

AKTIVNÍ, HYBRIDNÍ A PASIVNÍ MATRACE

Aktivní matrace s technologií 3 cel

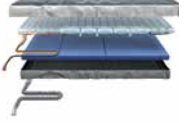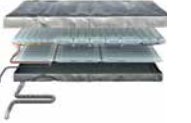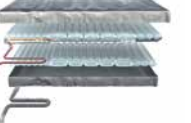VIRTUOSO OVERLAY	VIRTUOSO 50	VIRTUOSO 100	VIRTUOSO 200	VIRTUOSO 300	VIRTUOSO PRO
Základní	Základní	Progresivní	Progresivní	Prémiové	Prémiové
					
- Nulový tlak - APT, CLP a MCM v jednom	- Nulový tlak - APT, CLP a MCM v jednom	- Nulový tlak - APT, CLP a MCM v jednom	- Nulový tlak - APT, CLP a MCM v jednom	- Nulový tlak - APT, CLP a MCM v jednom - Head & Heel zoner	- Nulový tlak - APT, CLP a MCM v jednom - Head & Heel zoner

Aktivní matrace s technologií 2 cel

AIR2CARE 5 OVERLAY	AIR2CARE 6	AIR2CARE 8	AIR2CARE 6 IN	AIR2CARE 8 IN
Základní	Progresivní	Prémiové	Prémiové	Prémiové
				
Periodické uvolňování tlaku	Periodické uvolňování tlaku	- Periodické uvolňování tlaku - Maximální hmotnost pacienta až 250 kg	Periodické uvolňování tlaku	Periodické uvolňování tlaku

Optimální péče

OPTICARE	OPTICARE X	HYBRIMATT 200	HYBRIMATT 100	HYBRIMATT 100 IN
Progresivní	Prémiové	Prémiová redistribuce tlaku	Účinná redistribuce tlaku	Účinná redistribuce tlaku
				
- Integrovaný systém - Optimální zanoření - Řízení mikroklimatu	- Integrovaný systém - Optimální zanoření - Prone Nursing Mode - Řízení mikroklimatu	- Aktivní a pasivní systém v jednom - Mikroklima management	Aktivní a pasivní systém v jednom	- Aktivní a pasivní systém v jednom - Integrované řešení

Hybridní systémy

JIŽ BRZY

Prémiové

VISKOMATT 50	VISKOMATT 30	VISKOMATT 10
2vrstvá pěna (viskoelastická a studená)	2vrstvá pěna (viskoelastická a studená)	2vrstvá pěna (viskoelastická a polyetherová)
		
190 kg	165 kg	150 kg
- Vyztužené okraje - Svařované švy	- Vyztužené okraje - Svařované švy	- Vyztužené okraje - Svařované švy

Prémiové

VISKOMATT 30B
2vrstvá pěna (studená a polyetherová)


- Vyztužené okraje
- Šité švy

Prémiové

VISKOMATT 10B
2vrstvá pěna (studená a polyetherová)


- Vyztužené okraje
- Šité švy

Progresivní

MEDIMATT 30
2vrstvá pěna (studená a polyetherová)


- Vyztužené okraje
- Šité švy

Základní

EFFECTACARE 10	EFFECTACARE 20	PRIMACARE 10
Monobloková pěna	Monobloková pěna	Monobloková pěna
		
110 kg	150 kg	200 kg
- Konvexní profilovaný povrch - Šité švy	- Částečně profilovaný povrch - Šité švy	- Plně profilovaný povrch - Šité švy


AIR2CARE

A Great Deal of Pressure Relief



ÚČINNOST V PREVENCI DEKUBITŮ

matrace

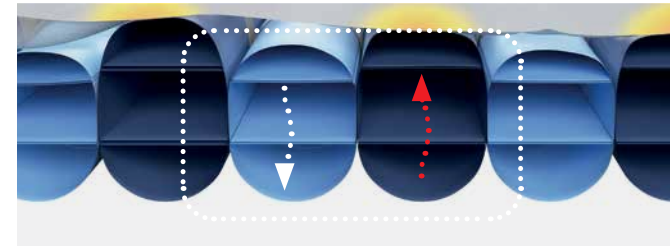

Dvoucelový alternující systém zajišťuje přerušované snižování tlaku.



Funkce uvedení do Fowlerovy polohy pomáhá minimalizovat riziko propadnutí.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ DÍKY UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝM FUNKCÍM



Systém Easy Smart s automatickým nastavením tlaku podle hmotnosti a polohy pacienta.



Snadný transport pacienta díky režimu, který lze aktivovat jednoduchým odpojením od kontrolní jednotky systému (SCU).



Komfortní údržba díky jednotlivým celám, které jsou vyjímatelné a lze je snadno umýt, dekontaminovat nebo vyměnit.

BEZPEČÍ A KOMFORT JE ZÁKLADEM PÉČE O PACIENTY



Široký výběr doby cyklu podle stavu pacienta a individuálních preferencí.



Integrovaný kompresor omezuje hluk a vibrace, čímž přispívá ke komfortu pacienta.


VIRTUOSO

Aktivní matrace s technologií 3 cel




PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ

matrace

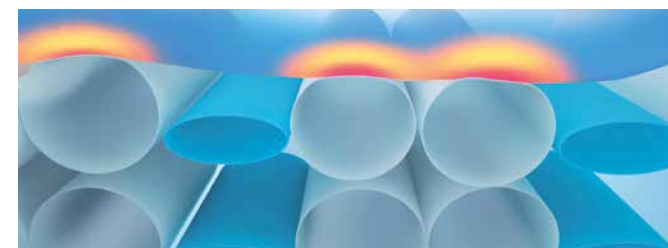

Systém 3 cel

Hmotnost pacienta je rozložena na dvou třetinách povrchu matrace, která zůstává měkká a pohodlná.

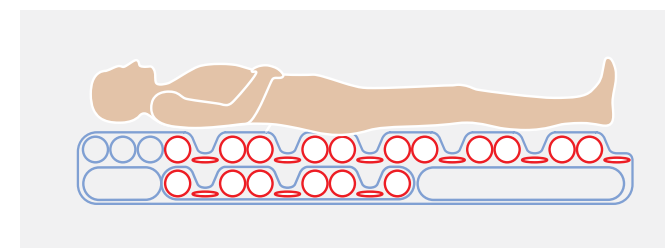

Nulový tlak

cel matrace střídavě odstraňovat tlak, což maximalizuje prevenci vzniku dekubitů.

ŘEŠNÍ PRO INTENZIVNÍ A AKUTNÍ PÉČI



Mikroklima Management

Snížení vlhkosti a vytvoření optimálního prostředí je jedním z klíčových faktorů účinné prevence dekubitů. Proudění vzduchu ve svrchní vrstvě matrace pomáhá snižovat nadměrnou vlhkost.



Automatické zvýšení tlaku Fowler Boost

Při polohování zádového dílu systém automaticky zvyšuje tlak.

OPTIMÁLNÍ PÉČE



Zóny hlavy, těla a pat

Zóna hlavy umožňuje volbu střídavého nebo statického režimu. Zóna těla poskytuje vyprázdnění, v případě potřeby, jakýchkoli nadbytečných cel. Patní zóna nabízí funkci selektivního vypouštění vzduchu. Zóny jsou k dispozici pro modely Virtuoso 300 a Virtuoso PRO.



Režimy

Virtuoso nabízí celou řadu režimů, jako je například Střídavá tlaková terapie, režim MAX, Konstatní nízký tlak, Mobilní režim.

HYBRIMATT

Hybridní cesta k efektivitě



HYBRIDNÍ PŘÍSTUP K PREVENCI VZNIKU DEKUBITŮ

matrace



Aktivní systém se střídáním 2 cel zajišťuje střídavé snižování tlaku.



Pasivní systém pomáhá rozložit tlak díky vrstvě viskoelastické pěny v matraci.

PŘÍNOS PRO ZDRAVOTNÍKY A PRACOVNÍ POSTUPY NEMOCNICE



Hybridní matrace **zjednodušují každodenní ošetrovatelské postupy** a podporují flexibilitu prevence.



Všechny matrace řady HybriMatt umožňují plný přístup ke všem součástem matrace pro **snadné čištění a dezinfekci**.

VŠESTRANNÉ MOŽNOSTI MATRACE



Integrovaná matrace představuje ucelené řešení pro lůžka řady Essenza.



Matraci s externím kompresorem lze umístit **na jakýkoliv typ lůžka**.

OPTICARE X

matrace poskytující optimální zanoření

matrace



4 sofistikované režimy

pro vyšší komfort a léčbu pacienta: Optimalizace, Pronační režim, Mobilní režim a režim Max.



Plně integrovaný systém

OptiCare X je kompatibilní s lůžkem Multicare X. Ovládání matrace i lůžka je integrováno do jediného ovládacího panelu zabudovaného do lůžka.



Zónové potahy

Zónové potahy Dartex® od společnosti Trelleborg s kluzným středem pro lehčí polohování pacienta a okraji pro snadnější uchopení podporujícími bezpečnou mobilizaci pacienta.




Mikroklima management

OptiCareX pomáhá předcházet hromadění vlhkosti, které může přirozeně vznikat při ležení na matraci. Toho je dosaženo pomocí nastavitelného proudění vzduchu pod matrací.

OPTICARE

matrace poskytující optimální zanoření

matrace

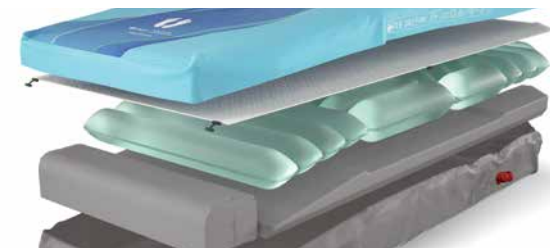

Prevence vzniku dekubitů

Matrace přináší novou, chytrou technologii pro prevenci dekubitů. Jakmile je pacient na lůžku, matrace automaticky zahájí proces optimalizace tlaku. To šetří čas personálu a zvyšuje jeho efektivitu.




Plně integrovaný systém

Matrace OptiCare je kompatibilní s lůžky Multicare a Eleganza 5. Ovládání matrace i lůžka je integrováno do jediného ovládacího panelu zabudovaného v lůžku.



Patní zóna

Speciální patní zóna se sklonem 7° maximálně odlehčuje tlak na paty a významně snižuje riziko vzniku dekubitů v této oblasti.

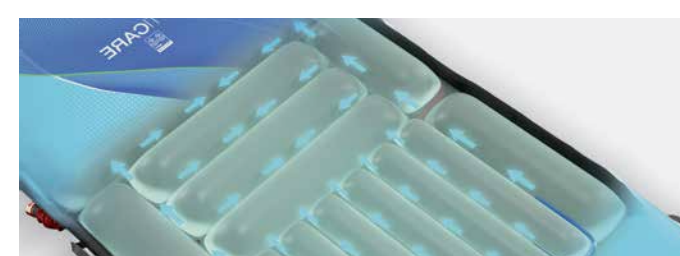

Mikroklima management

OptiCare podporuje udržování přirozené termoregulace cirkulací vzduchu po povrchu matrace.

PASIVNÍ MATRACE

Řada pasivních matrací LINET je navržena tak, aby zlepšovala rozložení tlaku pomocí mechanismů zanoření a obklopení. Nabízí také vysokou úroveň pohodlí při ležení a spánku.

Premiové

VISKOMATT 50

2vrstvá pěna (viskoelastická a studená)

- Vyztužené okraje
- Svařované švy



kg

190 kg

VISKOMATT 30

2vrstvá pěna (viskoelastická a studená)

- Vyztužené okraje
- Svařované švy



kg

165 kg

VISKOMATT 10

2vrstvá pěna (viskoelastická a polyetherová)

- Vyztužené okraje
- Svařované švy



kg

150 kg

VISKOMATT 30 B

3vrstvá pěna (viskoelastická, studená a polyetherová)

- Vyztužené okraje
- Svařované švy



kg

235 kg

VISKOMATT 10 B

3vrstvá pěna (viskoelastická, polyetherová a polyetherová)

- Vyztužené okraje
- Svařované švy



kg

235 kg

matrace

Progresivní

MEDIMATT 30

2vrstvá pěna (polyetherová a studená)

- Vyztužené okraje
- Svařované švy



kg

150 kg

Základní

PRIMACARE 10

Monobloková pěna

- Konvexní profilovaný povrch
- Šité švy



kg

200 kg

EFFECTACARE 20

Monobloková pěna

- Částečně profilovaný povrch
- Šité švy



kg

150 kg

EFFECTACARE 10

Monobloková pěna

- Plně profilovaný povrch
- Šité švy



kg

110 kg

Evakuační potah PRO

Nejlepší řízení rizik: jednoduchá a rychlá evakuace

- V kombinaci s nejvyššími hygienickými standardy
- Vhodné pro pacienty s hmotností do 250 kg (platí pro evakuační popruhy).
- Kompatibilní s prémiovými a progresivními matracemi

30

LINET® | Přehled sortimentu zdravotnictví

LINET® | Přehled sortimentu zdravotnictví

31

SPRINT 200

Inovativní transportní lůžko



BEZPEČNOST OVĚŘENÁ NA MILIONU ZDRAVOTNICKÝCH LŮŽEK

transportní lůžka
a křesla



Systém **vícezónového monitorování lůžka** informuje zdravotnický personál o tom, že pacient lůžko opustil.



16% snížení tlaku v oblasti pánve díky konstrukci ErgoFrame.



Váha s přesností na 0,5 kg – při vážení není třeba pacienta přesouvat na jiné lůžko.



Madlo Mobi-lift zajišťuje pacientovi oporu při vstávání z lůžka.

ERGONOMICKÝ POHON, KTERÝ VÁS DOSTANE TAM, KAM POTŘEBUJETE



Stisknutí tlačítka stačí díky pohonu i-Drive Power k manipulaci s lůžkem.



Dojezdová vzdálenost 11 km bez nutnosti nabíjení.



O 77 % menší než doporučená počáteční tlačná síla i bez motorizovaného kolečka (FlexiDrive).



Stálá ergonomická poloha díky IV&Drive.

ŠPIČKOVÝ DESIGN A MATERIÁLY



2,2× větší než doporučená pevnost postranic.



5× větší než doporučená pevnost infuzních stojanů.



Funkční Design pro snazší čištění a kontrolu infekcí.



Bez mezery při přesunu díky konceptu těsně přiléhajících postranic.

SPRINT 100

Transportní lůžko

transportní lůžka
a křesla



IV&Drive

Infuzní stojany dokážou bezpečně pojmout 100kg pracovní zátěž, aniž by se ohnuly.



EasyBrake

Brzdění i odbrzdění probíhá sešlápnutím pedálu směrem dolů, což snižuje fyzickou námahu a podporuje ergonomii práce.



FlexiDrive

Pohodlí pacienta zvyšuje Sprint 100 využitím výsuvného 5. kolečka, vybaveného funkcí tlumení nárazů, která snižuje otřesy způsobené překážkami či nerovnými povrchy.



Poloha kardiackého křesla

Díky hydraulickému ovládání je nastavení pacienta do správné polohy snadné. Mnoho ošetrovatelských úkonů je snazších v poloze pacienta vsedě.



Ochranná kolečka

Speciálně navržená ochranná kolečka chrání lůžko při převozu před poškozením.



SoftDrop postranice

pokrývají většinu délky lůžka a dají se sklopit z jeho obou stran.. Díky technologii SoftDrop se navíc postranice sklápějí plynule, pomalu a bezhlučně.



Čištění

Povrch konstrukce lůžka Sprint 100 se čistí velmi snadno. Údržba celého lůžka je absolutně nenáročná.



Větší komfort

Celkový dojem pacienta dokáže výrazně vylepšit správný výběr matrace. Sprint 100 nabízí tři varianty matrací.

PURA

Multifunkční křeslo pro jednodenní chirurgii a léčbu

transportní lůžka
a křesla



Pura pro jednodenní chirurgii

Plně vybavené křeslo pro jednodenní chirurgii, rekonvalescenci nebo diagnostiku.



Pura pro vyšetření a léčbu

Komfortní pro dialýzu, onkologickou léčbu nebo dárce krve.



Snadný transport

Převoz pacientů je bezpečný a fyzicky nenáročný.



Komfort pro pacienta

Při déletrvajících procedurách je komfort pacienta zajištěn ergonomickou konstrukcí křesla a měkkým čalouněním.



Zaměřeno na bezpečnost

Technologie SoftDrop umožňuje plynulé a snadné spuštění postranic a neomezený přístup k pacientovi.



Jednoduchá mobilizace

Nízká, bezpečná poloha je komfortní a ergonomická při sezení v křesle nebo při sedání do křesla a vstávání z něj.

SELLA


Multifunkční křeslo

Multifunkční křeslo Sella svou kombinací potřebných funkcí, ergonomicky vhodně zvolených parametrů a přívětivým designem přináší řadu výhod a ulehčení jak pro imobilní osobu, tak i pro obsluhující personál.



SAFESENSE 3

Digitální asistenční systém

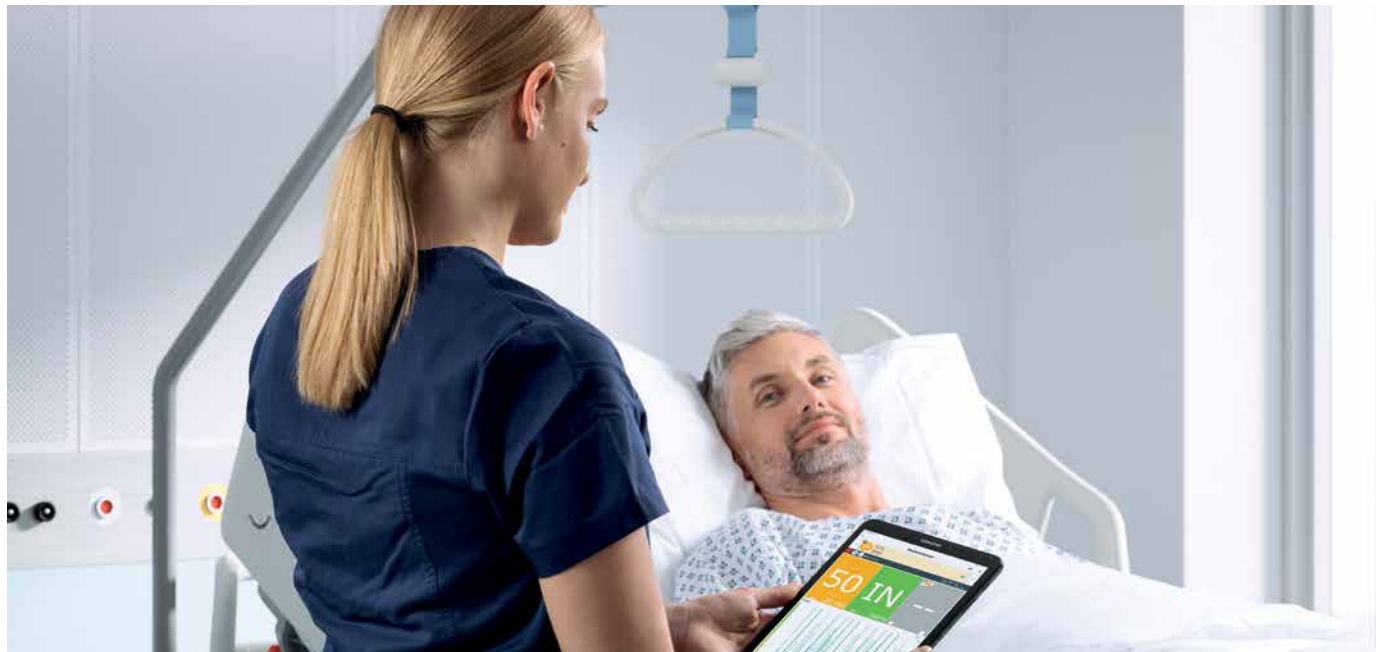


Monitorovací systém pro detekci pohybu a vlhkosti s inteligentními technologiemi.

- INTELIGENTNÍ PŘIPOMENUTÍ DEKUBITU – Upozorňuje zdravotnický personál na to, že se pacient v průběhu přednastavené doby nepohnul.
 - PREVENCE PÁDŮ, MONITOROVÁNÍ POHYBU – Sleduje pacientovu aktivitu na lůžku. Upozorní personál, kdykoliv pacient lůžko opustí.
- OZNÁMENÍ O OPUŠTĚNÍ LŮŽKA BED EXIT

Senzorová podložka

Patentovaná, neelektronická a pevná senzorová podložka pro přenos signálu a flexibilní použití na lůžku.

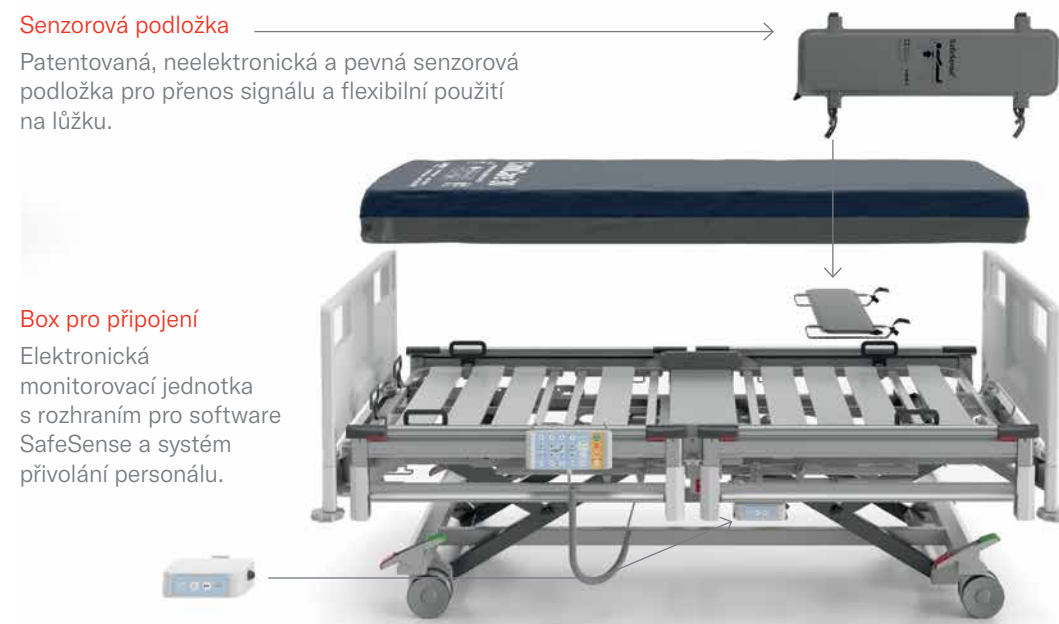

Box pro připojení

Elektronická monitorovací jednotka s rozhraním pro software SafeSense a systém přivolání personálu.

Systém je snadno nastavitelný a nabízí možnosti úprav dle konkrétního pacienta.

Podložka Wetness pad

Informuje zdravotnický personál o nadměrném nárůstu vlhkosti.



Vedení signálu

Spojení mezi senzorovou podložkou a připojovacím boxem.

STOLKY K LŮŽKU



Eleganza Mano & Classic

Nemocniční stolky k lůžku, které nabízejí řadu praktických funkcí.



Combinea

Modulární řada výrobků Combinea poskytuje až šest různých řad nočních stolků.



Stylo 3LE

Produktová řada Stylo kombinuje design nábytku, který vytváří domácí atmosféru s jeho inovativními funkcemi.



Solido 3

Tento server lze používat z obou stran lůžka nebo židle, při jídle či nakloněný při čtení a psaní.

LINET AKADEMIE

Získejte praktické dovednosti a klinické informace. Naučte se změnit rutinní praktiky a používat moderní technologie. Natrénujte správnou manipulaci s klienty. Osvojte si základní postupy správné ergonomické péče. Pečujte o vlastní zdraví s podporou elektricky polohovatelných lůžek.



Kromě špičkových nemocničních a ošetrovateľských lůžek, matrací a dalších zdravotnických pomůcek LINET nabízí svým zákazníkům související služby, aby mohli maximálně využít technologický a funkční potenciál našich výrobků.

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ

Naučte se 100% využívat moderní technologie

- Detailní zaškolení zdravotnického personálu zkušeným klinickým koučem LINET přímo na Vašem pracovišti ve skupině max. 10 osob
- Základní principy ergonomicky správné péče, nácvik polohování
- Využití klinických poloh lůžka při prevenci dekubitů

PROGRAM VČASNÁ MOBILIZACE S LINETEM

- Délku hospitalizace můžete ovlivnit
- Program zaměřený na včasnou mobilizaci pomocí sofistikovaných funkcí lůžek LINET určených pro náročné potřeby JIP a ARO 4stupňový program vycházející z mezinárodních standardů (ACCNA – American association of critical care nurses) pro intenzivní péči
- Podpora terapie a rekonvalescence pacienta, snížení pracovního zatížení pro personál

SERVIS LINET



Vyberte si z řady možností

Naše servisní smlouvy nabízejí různé stupně pravidelné údržby a kvalitního servisu podle potřeb Vašeho zařízení. Ručíme za 100% ochranu Vašich lůžek a matrací.

Typ smlouvy	Preventivní prohlídka	Opravy	Náhradní díly
3 ★★★★★ 3hvězdičková smlouva – PREVENCE Tato smlouva garantuje nezbytné minimum pro bezpečnost a dobrý stav výrobku. Zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu a kontrolu – vizuální, funkční a elektrickou s doporučením výměny opotřebovaných dílů.	●		
4 ★★★★★ 4hvězdičková smlouva – POKROČILÁ 4hvězdičková smlouva garantuje pravidelnou preventivní údržbu, kontrolu a opravy zjištěných závad našimi techniky.	●	●	
5 ★★★★★ 5hvězdičková smlouva – PLNÝ SERVIS Tato smlouva zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu výrobků, veškeré opravy a potřebné náhradní díly.	●	●	●
Smlouva o prodloužené záruce Smlouva kombinuje nabídku oprav včetně spotřeby náhradních dílů zdarma na předem stanovenou dobu. Jedná se tedy o prodloužení záručních podmínek po uplynutí standardní záruční doby.		●	●

- Komplexní řešení od jednoho dodavatele
- Prodloužení životnosti produktů a maximální bezpečí pro pacienty
- Kontrola nad financemi
- Rozsah služeb dle vašich potřeb
- Originální náhradní díly za výhodnou cenu
- Servis nejvyšší kvality od zkušených techniků



SPECIFIKACE LŮŽEK

		MULTICARE X	ELEGANZA 5	ELEGANZA 4	ESSENZA 300LT	ESSENZA 300	IMAGE 3 BARIATRIC	ELEGANZA 2	ELEGANZA 1	PRAKTIKA 1+ 2	SPRINT 200	SPRINT 100	
Elektrické polohování		●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	
Vnější rozměry lůžka (šířka × délka)	[cm]	105 × 215	100 × 219	217,5 × 100	99,5 × 219	99,5 × 219	110 × 220	99,5 × 223,5	99,5 × 218	99,5 × 218	89 × 216	76 (86) × 211	
Prodloužení	[cm]	0 – 22	0 – 22	11, 22	0 – 30	0 – 30	10, 22, 30,5	15, 32	15	×	×	×	
Hmotnost	[kg]	224	210 – 248	195	180	165	160	156	135	125 (80*)	*	120	
SWL	[kg]	250	250	250	270	300	320	250	185–250	200	320	320	
Výška ložné plochy	minimum	[cm]	44	43.5	41	39,5*	25,5*	28	39,5	39,5 (37*)	42 (55*)	53	55,5
	maximum	[cm]	82	81.5	79	89.5*	75.5*	80	77.5	76 (73.5*)	76 (55*)	86	88
Rozměry matrace (šířka × délka)		[cm]	87,5 x 214	90 × 208	90 × 208	86 / 90 × 200	86 / 90 × 200	100 × 200	86 / 90 × 200	86 / 90 × 200	90 × 200	76 × 203	66 × 193
Max. výška matrace		[cm]	23	23	23	16 / 20	16 / 20	26	14–24*	16–27*	16	13	13
TR/ATR		[°]	13 / 16	14 / 14	14 / 14	14 / 14	14 / 14	16 / 16	15 / 15	12 / 12 (Ne*)	17 / 17	18 / 18	
Výška postranic nad ložnou plochou	dělené	[cm]	45	45	45	42	42	×	40	38	×	×	×
	¾ sklopné	[cm]	×	×	×	38	38	48	40	39	×	×	×
	teleskopické	[cm]	×	×	×	43	43	×	×	×	×	×	×
Úhel nastavení stehenního dílu		[°]	30	30	25	35	35	34	32	35	34	40	40
Úhel nastavení zádového dílu		[°]	70	65	65	70	70	70	64	70	70	90	90
Úhel laterálního náklonu		[°]	30	15	×	15	×	×	×	×	×	×	×
Váhy			●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×
Podjezdnost podvozku		[cm]	15	14	15	19,4 (kolečka 150 mm)	19,4 (kolečka 150 mm)	15,5 (13*)	15	18,8 (16*)	×	×	×
Držák RTG kazety		[cm]	35 × 43	35 × 43	39 × 46,5	44 × 47	44 × 47	×	35 × 43	×	×	×	Ano – jen úzká verze
Kompatibilita s aplikací Smart Care **			SafetyPort	SafetyPort	SafetyPort	SafeSense 3 integrovaný	SafeSense 3 integrovaný	SafeSense 3 integrovaný	SafeSense 3 SafeSense 1 integrovaný	SafeSense 3 samostatné řešení	×	×	×

× Ne ● Ano * Dle konfigurace ** SafeSense 3 k dispozici také jako samostatné řešení

SPECIFIKACE MATRACÍ

FUNKCE / PRODUKT			PASIVNÍ MATRACE	CLINICARE 100 HF	"AIR2CARE ŘADA"	"VIRTUOSO ŘADA "	"OPTICARE ŘADA"
Režim terapie	Aktivní	2celový alternující		●	●		
		3celový alternující				●	
		délka cyklu (min)		12	10, 15, 20, 25	7,5	
		nulový tlak				●	
		optimální zanoření					●
	Reaktivní	(např. viskoelastická pěna)	●	●			
Režim konstantně nízkého tlaku				●	●	●	●
Automatické nastavení tlaku					●		●
MCM				●		●	●
Dodatečné přifouknutí matrace v oblasti pánve					Fowler boost	Fowler boost	Režim optimalizace
Integrovaná matrace					●		●
Externí matrace			●	●	●	●	
Overlay					●	●	
Aktivní sedák					●	●	
Třída dekubitů			I-IV	I-IV	I-IV	I-IV	I-IV
× Ne ● Ano							



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o. | Želevčice 5, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 576 111 | info@linet.cz | www.linet.cz



Art. n° 9630-1021-05 | Edition 10/2024

Možnost mírných barevných rozdílů. Změna technických parametrů vyhrazena. | Odkazy na klinická tvrzení jsou k dispozici na stránkách konkrétního výrobku na adrese www.linet.com.